



FOTELIK ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY ZE STABILIZACJĄ PLECÓW I GŁOWY

J O R D I TM



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.



Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.



Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **Akces-MED Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

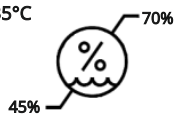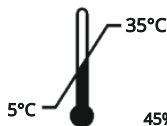

SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	5
2. Wskazania do stosowania wyrobu.....	5
3. Ogólna budowa fotelika	6
3.1 Wyposażenie standardowe.....	6
3.2 Wyposażenie ponadstandardowe.....	7
4. Tabela wymiarowa.....	9
5. Opis regulacji fotelika.....	10
5.1 Montaż fotelika.....	10
5.2 Oparcie.....	13
5.2 Podparcie rąk.....	14
5.2.1 Wysokość podparcia rąk.....	14
5.2.2 Kąt pochylenia podparcia rąk.....	14
5.4 Siedzisko.....	15
5.4.1 Regulacja głębokości siedziska.....	15
5.4.2 Regulacja wysokości siedziska.....	15
5.4.3 Funkcja kubelkowa.....	16
6. Akcesoria.....	17
6.1 JRI_104 Zagłówek HexagonPro.....	17
6.1.1 Montaż zagłówka.....	17
6.1.2 Regulacja zagłówka.....	17
6.2 JRI_135 Peloty biodrowe.....	18
6.3 JRI_154 Separator kolan/JRI_128 Regulowany klin.....	19
6.4 JRI_155 Peloty piersiowe.....	20
6.5 JRI_423 Koła jezdne strętne.....	20
6.6 JRI_619 Podnózek.....	22
6.7 JRI_431 Rączka do prowadzenia.....	22
6.8 JRI_130 Kamizelka 4-punktowa/JRI_114 Kamizelka H.....	23
7. Użytkowanie fotelika	24
7.1 Przygotowanie pacjenta.....	24
7.2 Instrukcja użytkowania fotelika.....	25
7.3 Instrukcja użytkowania kamizelek.....	27
8. Zasady bezpieczeństwa.....	30
9. Warunki gwarancji.....	32
10. Konserwacja i czyszczenie	33
11. Oznakowanie.....	37
11.1 Symbole.....	37
11.2 Przykładowa tabliczka znamionowa.....	37



WSTĘP

JORDI™ jest krzesłem szkolno-terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **JORDI™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubełkowej to zalety fotelika, które szczególnie docenią terapeuci. Dodatkowo fotelik posiada regulację wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. **JORDI™** już w opcji standardowej staje się idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji, a bogata lista akcesoriów pozwala na pełne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dodatkowym atutem jest tapicerka medyczna, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy tapicerkę medyczną **EXTREME-MED™**.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania fotelika przed użytkowaniem, użytkowania fotelika, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących foteliki.

Przed przystąpieniem do użytkowania fotelika **JORDI™**, użytkownik (lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

2. WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe), zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny użytkownika,
- Paraliż,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miedniczej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.




3. OGÓLNA BUDOWA FOTELIKA

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ① Siedzisko z regulacją głębokości,
- ② Oparcie z regulacją kąta pochylenia,
- ③ Pas biodrowy,
- ④ Stelaż z regulacją wysokości,
- ⑤ Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia,
- ⑥ Tapicerka medyczna MEDICUS™



3.2 AKCESORIA

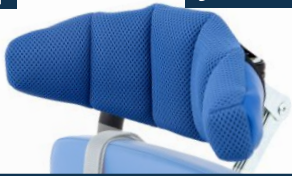 JRI_002 Pas do przenoszenia chorych	 JRI_015 JRI_016 JRI_020 Koło TANGO z hamulcem stop (75 mm/100 mm/ 125 mm)	 JRI_102 Pas podtrzymujący głowę
 JRI_104 Zagłówek HexagonPro™	 JRI_114 Kamizelka H	 JRI_125 Kamizelka pełna 6-punktowa
 JRI_128 Regulowany klin międzyudowy	 JRI_130 Kamizelka 4- punktowa	 JRI_135 Peloty biodrowe
 JRI_147 5-punktowe paski stabilizujące stopy	 JRI_154 Separator kolan	 JRI_155 Peloty piersiowe
 JRI_156 2-punktowe paski stabilizujące stopy	 JRI_161 aondałki stabilizujące stopy i stawy skokowe	 JRI_403 Stolik



4 TABELA WYMIAROWA

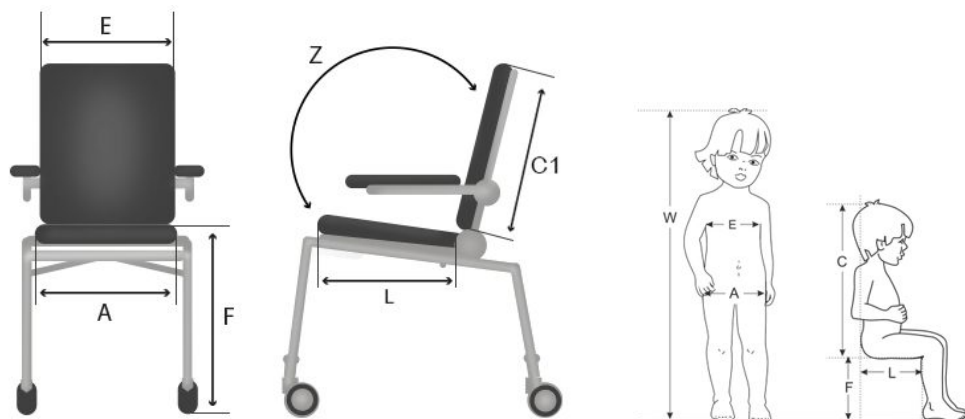


TABELA POMIAROWA

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
W	Orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	90-110	100-120	110-150	150-180
A	Szerokość siedziska	[cm]	25	30	37	45
E1	Szerokość oparcia (z pelotami)	[cm]	12-22	15-26	22-33	30-42
L	Głębokość siedziska	[cm]	23-29	26-34	30-40	35-45
C1	Wysokość oparcia	[cm]	33	39	46	55
C	Wysokość zagłówka (opcja)	[cm]	43-59	50-66	58-74	67-83
F	Wysokość siedziska od podłoża	[cm]	26-30	31-39	37-49	42-56
Z	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90-135	90-135	90-135	90-135
	Max. waga użytkownika	[kg]	50	65	80	120

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Szerokość	[cm]	37	42	52	64
Długość	[cm]	48	54	60	68
Wysokość	[cm]	56	68	80	92
Waga	[kg]	6,5	8	10	12

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

5. OPIS OBSŁUGI FOTELIKA

LEGENDA



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.






Ikona ostrzegawcza - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zastosować **szczególne środki ostrożności**.

5.1 MONTAŻ FOTELIKA

i

Przed rozpoczęciem montażu fotelika należy zamontować pas biodorowy na siedzisku (fot.1-7)

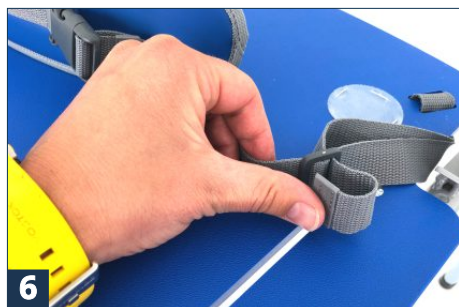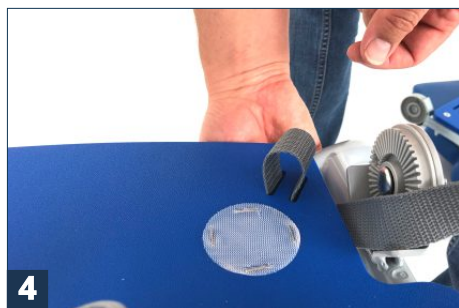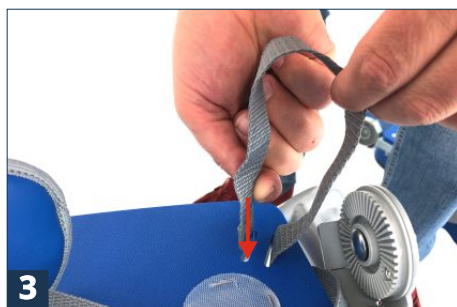






5.2 OPARCIE



Każdorazowo po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić pokrętła!


5.3 PODPARCIE RĄK

5.3.1 WYSOKOŚĆ PODPARCIE RĄK

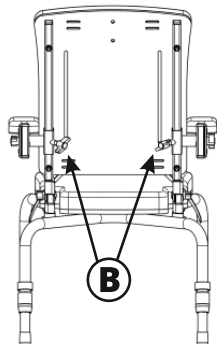

Każdorazowo po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić pokrętkę!

5.3.2 KĄT POCHYLENIA PODPARCIA RĄK

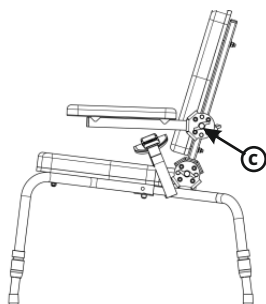

Każdorazowo po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić pokrętkę!



Przed nałożeniem stolika podłokietniki powinny być ustawione na tej samej wysokości, równoległe do podłoża.

5.4 SIEDZISKO


5.4.1 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA



!

Maksymalne wysunięcie siedziska sygnalizowane jest zatrzaskami wchodzącymi w otwory, które znajdują się w rurach siedziska po obu jego stronach. Aby zmniejszyć głębokość siedziska po osiągnięciu maksymalnego wysunięcia należy palcem wcisnąć zatrzask do środka rury. Nie należy wysuwać siedziska poza zatrzaski!

5.4.2 REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

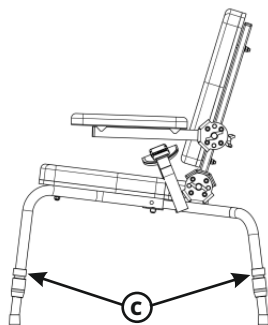



5.4.3 FUNKCJA KUBEŁKOWA



Dzięki odpowiedniemu ustawieniu wysokości nóg możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika (fot.32).



Istnieje ryzyko wywrócenia fotelika do tyłu, które wzrasta przy skrajnych ustawieniach sprzętu (maksymalne odchylenie oparcia, maksymalny kąt funkcji kubełkowej, użycie kół). W przypadku dzieci nadpobudliwych lub z tendencją do odchylania się zalecane jest zastosowanie podnóżka oraz zachowanie szczególnej ostrożności!

6 AKCESORIA

6.1.JRI_104 ZAGŁÓWEK HEXAGON PRO

6.1.1 MONTAŻ ZAGŁÓWKA



Aby zamontować zagłówek należy ściągnąć tapicerkę z oparcia (fot.33) przyłożyć zagłówek do oparcia w miejscu otworów i przykręcić dwoma dołączonymi śrubami za pomocą klucza imbusowego (fot.34).



6.1.2 REGULACJA ZAGŁÓWKA



Zagłówek można dowolnie regulować za pomocą klucza imbusowego. Możliwa jest również zmiana szerokości zagłówka.





Każdorazowo po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić mocowania!

6.2.JRI_135 PELOTY BIODROWE



Aby zamontować peloty biodrowe należy ściągnąć tapicerkę siedziska (fot.41), przyłożyć peloty w miejscu otworów (fot.42) i przykręcić dwoma dołączonymi śrubami za pomocą klucza imbusowego. Należy zwrócić uwagę, aby szersza strona peloty była skierowana w stronę oparcia.



6.3.JRI_128 REGULOWANY KLIN

JRI_154 SEPARATOR KOLAN



Aby zamontować separator kolan lub regulowany klin należy w pierwszej kolejności ściągnąć tapicerkę siedziska, przyłożyć adapter od spodu siedziska w miejscu otworów i przykręcić czterema dołączonymi śrubami za pomocą klucza imbusowego.



43



44



45



Separator kolan lub regulowany klin należy wsunąć w adapter aż do momentu ich całkowitego zablokowania. Stopień wysunięcia separatora lub klina reguluje się za pomocą zatrzasku, który należy odciągnąć, a następnie ustawić elementy w wybranej pozycji.



46



47




48



6.4. JRI_155 PELOTY PIERSIOWE



Zdjąć poduszkę oparcia fotelika. Następnie należy umieścić peloty na oparciu na wybranej wysokości i zabezpieczyć za pomocą pokręteł.

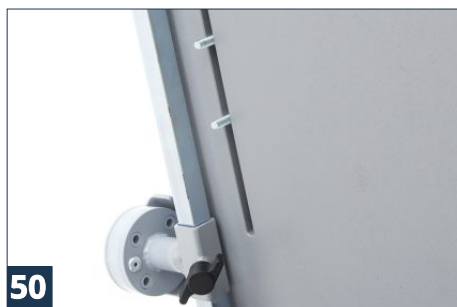

6.5. JRI_423 KOŁA JEZDNE SKRĘTNE



6.6.JRI_619 PODNÓŻEK

i

Aby zamontować podnóżek należy wsunąć go w plastikowe zaczepy umieszczone na stelażu fotelika (fot.56). Po dopasowaniu wysokości podnóżka należy mocno dokręcić zaczepy za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



56



57

i

Aby zmniejszyć dystans między siedziskiem, a podnóżkiem należy:

- Poluzować zaczepy i wyciągnąć podnóżek.
- Następnie poluzować nakrętkę, wcisnąć przycisk blokujący (fot.58) z jednoczesnym wysunięciem metalowej rurki z plastikowej nakrętki (fot.59).
- Wsunąć metalową rurkę po przeciwnej stronie nakrętki (fot.60), dokręcić nakrętkę.
- Gotowy podnóżek (fot.61) wsunąć w plastikowe zaczepy umieszczone na stelażu fotelika. Po dopasowaniu wysokości podnóżka należy mocno dokręcić zaczepy za pomocą śrubokrętu krzyżowego.



58



59



60


61

62

6.7.JRI_431 RĄCZKI DO PROWADZENIA




Aby zamontować rączkę należy poluzować kluczem mocowanie znajdujące się na rączce (fot.63). Następnie wsunąć rączkę do ramy z tyłu oparcia (fot.64), dokręcić mocowanie rączki za pomocą klucza imbusowego (fot.65).


63

64

65

6.5. JRI_130 KAMIZELKA 4-PUNKOWA JRI_114 KAMIZELKA H

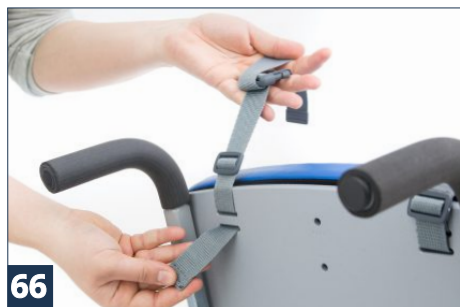

Przed korzystaniem z kamizelki należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji. Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki znajdują się na stronie 27 instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.

7. UŻYTKOWANIE FOTELIKA



Fotelik **JORDI™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej w zakresie jego obsługi. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

7.1. PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące staw skokowy,
- użytkownik nie był umieszczany w foteliku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.



Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!

8.2. Przygotowanie urządzenia

1. Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie,
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do fotelika, w bezpiecznej odległości od źródeł ognia i wysokiej temperatury,
- Upewnić się, czy wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne,
- Sprawdzić stan kół i hamulców (jeżeli dotyczy),
- Zablokować hamulce (jeżeli dotyczy),
- Dopasować fotelik do wymiarów pacjenta,
- Odpiąć kamizelkę, pasy tułowia itp. tak, aby umożliwić swobodne ułożenie pacjenta w foteliku,
- Umieścić pacjenta w foteliku,
- Zapiąć elementy służące do stabilizacji pacjenta np. kamizelkę itp.,
- Zamontować dodatkowe wyposażenie fotelika np. stolik.

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.



Przed przystąpieniem do użytkowania fotelika należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

Fotelik będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowany do wymiarów ciała użytkownika. Główną zasadą przy dopasowywaniu urządzenia jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować jego dyskomfort. Nieumiejętne korzystanie z urządzenia może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.



Nieprawidłowa konfiguracja fotelika może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie, wyjąć pacjenta z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Decyzję o zastosowaniu fotelika zawsze podejmuje lekarz prowadzący!

7.3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KAMIZELEK



Kamizelka zapewnia wsparcie postawy u użytkowników siedzących na wózkach inwalidzkich, fotelikach lub innych siedziiskach rehabilitacyjnych. Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala przyjąć prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji kamizelka nie ogranicza możliwości swobodnych ruchów kończyn górnych.

Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika!

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

- 1) **Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, to istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie** – należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.
- 2) **Użytkownik zsuwa się z siedziska, wówczas górny brzeg kamizelki obejmuje jego szyję i blokuje tchawicę utrudniając oddychanie** – z kamizelką ZAWSZE należy stosować wyposażenie zapobiegające zsuwaniu się użytkownika z wózka takie jak pas biodrowy, pasy odwodzące uda lub klin międzyudowy.
- 3) **Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę uciskają szyję użytkownika blokując tchawicę utrudniając oddychanie. Może się tak zdarzyć, jeżeli ciało użytkownika zostało w niewłaściwy sposób zabezpieczone w foteliku/wózku** – należy wówczas dodatkowo ustabilizować ciało użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie zawiera takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować tułowia użytkownika należy wymienić je na urządzenie posiadające taką funkcję.
- 4) **Kamizelka jest zbyt mocno dociągnięta do oparcia w wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać** – w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę w taki sposób, aby pomiędzy kamizelką a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej np. kamizelki Flex-Point®, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.

Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

- 1) Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji :
 - na środku siedziska,
 - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa przylegały do oparcia.
- 2) Zabezpiecz użytkownika za pomocą np. pasa biodrowego, pasów odwodzących uda lub klina międzyudowego.
- 3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają opadanie tułowia na bok, które może prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję.
- 4) Zabezpiecz kamizelkę:
 - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
 - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
 - zapnij pasy naramienne kamizelki,
 - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- 5) Sprawdź pozycję użytkownika:
 - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
 - upewnij się, że możesz wsunąć dłoń między ciało użytkownika a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Pozycja kamizelki MUSI zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka MUSI być używana przez cały czas z elementami zabezpieczającymi użytkownika przed zsunięciem (np. z pasem biodrowym, pasami odwodzącymi uda lub klinem międzyudowym). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubekowa i odchylane oparcie.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby całe stopy użytkownika miały stabilne podparcie. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.

- 4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!
- 5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeśli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję użytkownika.
- 6) Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
- 7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub wymiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
- 8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
- 9) Nie należy zostawiać użytkownika w urządzeniu bez opieki!
- 10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
- 11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami jej bezpiecznego stosowania.

Dbanie o kamizelkę

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- 1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
- 3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić jego wymianę na nowy.
- 5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost/utratę wagi.
- 6) Szelki kamizelki należy tak wyregulować, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
- 7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Fotelik **JORDI™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem należy przygotować podopiecznego i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie fotelika **JORDI™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze fotelika oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania fotelika należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem fotelika należy:

- sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji fotelika;
- upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należyście zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
- sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
- sprawdzić sprawność hamulców;
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek;
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
- dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb pacjenta np. ustawienie pelot, podnóżka itp.;
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane
- zabezpieczyć pacjenta wszelkimi dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia fotelika takimi jak: kamizelka, klin międzyudowy, zagłówek. Ma to na celu zabezpieczenie pacjenta m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia. W przypadku występowania u użytkownika nadmiernego napięcia w obrębie przywodzicieli kończyn dolnych zalecane jest stosowanie wybranych pasów odwodzących uda w celu zapobiegania powstawaniu odcisnięć i/lub odleżyn w okolicy stawów kolanowych od strony przyśrodkowej.

2. Zabrania się użytkowania fotelika w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.

3. Zabrania się użytkowania fotelika jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.

4. Zabrania się pozostawiania pacjenta w foteliku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać urządzenia jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
6. Zabrania się pozostawiania fotelika z pacjentem na terenie pochyłym lub nierównym bez opiekuna, pomimo aktywnego hamulca.
7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania fotelikiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.
8. Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania i wysiadania z fotelika użytkownik nie stawał na podnóżku.
8. Wsiadanie i wysiadanie pacjenta z fotelika zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania fotelika kończyny pacjenta nie dostawały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Fotelik należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Fotelik nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu fotelika bez pacjenta należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
13. Przed użyciem fotelika należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać rehabilitację, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



Fotelik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń !

Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaniechać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie obciążenia zawieszone na rączce fotelika mogą zaburzyć jego stabilność!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 9 instrukcji.

9. WARUNKI GWARANCJI

- 1) **Akces-MED Sp. z o.o.** sprzedaje sprzęty sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- 2) Fotelik **JORDI™** jest objęty **24-miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez pacjenta. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- 3) Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą być usunięte na koszt użytkownika, chyba że sprzęt jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku Użytkownik może wystąpić o refundację przez NFZ naprawy sprzętu wykonanej w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- 4) Producent określa czas użytkowania wyrobu na **48 miesięcy**. Po tym okresie Użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- 5) W razie uszkodzenia sprzętu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** (tel. 17/ 864 04 70).



10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Fotelik będący urządzeniem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja fotelika są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów fotelika:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym,
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tkaniny przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia.
4. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy opłukać przy użyciu letniej wody, osuszając ją później czystą ściereczką.
5. Tapicerki nie należy zamaczać!
6. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.
9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować fotelika podczas korzystania z niego przez użytkownika.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu s i ę



Przed ponownym użyciem fotelika, tapicerka zawsze musi być sucha!
Ze szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących firma Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności!



Przed ponownym użyciem fotelika, tapicerka zawsze musi być sucha!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń;
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo dokręcone, nie zniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koło;
- sprawdzić, czy konstrukcja fotelika nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji;
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym, zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone;
- sprawdzić, czy paski pasów 5-punktowych, kamizelek, pasów tułowia, sandały stabilizujące stopy itp. nie są postrzępione, a sprzączki, rzepy i klamry działają prawidłowo.



Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wyrobu spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).**



PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: - cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, - czy wyrób jest kompletny, - czy wszystkie śruby, wkręty, pokręta, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulec.	Sprawdzić: - unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, - czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, - czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególnie sprawdzić: - poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), - poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), - poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), - czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, - poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżki.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: - elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, - czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, - czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapiczerka musi być sucha.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, sztybnokłozczka (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy os, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: oznaczenia i etykiety wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może używać wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie
www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.

11. OZNAKOWANIE

11.1. SYMBOLE

	Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE
	Numer katalogowy
	Numer seryjny
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
	Uwaga!
	Wytwórca
	Data produkcji
	Wyrób nie zawiera lateksu
	Przechowywać w suchym miejscu
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających
	Chronić przed promieniami słonecznymi
	Ograniczenie temperatury przechowywania
	Wilgotność względna przechowywania

	Suszyć pionowo
	Nie chlorować
	Nie prasować
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie wybielać
	Nie chlorować
	Ostrożnie, delikatna zawartość

-  Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
-  Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.
-  Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu.
-  Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.

11.2. Przykładowa tabliczka znamionowa

KOD QR
po zeskanowaniu
kieruje do strony
internetowej wyrobu

ADRES WYTWÓRCY

**MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
WYROBU**

**NUMER SERYJNY W FORMIE
KODU KRESKOWEGO**



AKCESMED
www.akces-med.com

Akces-MED Sp. z o.o.
Jasionka 055B
36-002 JASIONKA
POLAND

05.2014

MAX LOAD: 50 kg

SN JRI 001/U/1/AA

NAZWA WYROBU W JĘZYKU POLSKIM

JORDI 1
FOTELIK ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY ZA STABILIZACJĄ PLECEW I GŁOWY

NAZWA WYROBU W JĘZYKU ANGIELSKIM

JORDI 1
MODULAR POSITIONING CHAIR

DATA PRODUKCJI

05.2014

OZNAKOWANIE
patrz wyżej


NUMER SERYJNY

WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619



Autoryzowany Przedstawiciel



akces-med.com

Data wydania: 01.03.2016
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2021
© Sławomir Wroński 2021