



FOTELIK ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY ZE STABILIZACJĄ
PLECÓW I GŁOWY

KIDOO™



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.



Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.



Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **Akces-MED Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

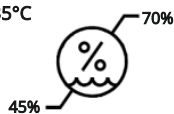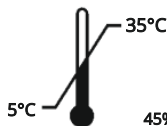



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	6
2. Wskazania do stosowania wyrobu.....	6
3. Ogólna budowa fotelika	7
3.1 Wyposażenie standardowe.....	7
3.2 Akcesoria.....	8
4. Tabele rozmiarowe.....	10
5. Opis obsługi fotelika.....	11
5.1 Siedzisko.....	12
5.2 Oparcie.....	12
5.3 Podłokietniki.....	13
5.4 Stelaż.....	14
5.4.1 Regulacja wysokości fotelika.....	14
5.4.2 Funkcja kubełkowa fotelika.....	14
6. Akcesoria.....	16
6.1 KDO_102 Pas podtrzymujący głowę.....	16
6.2 KDO_104 Zagłówek HexagonPro™.....	18
6.2.1 Montaż zagłówka.....	18
6.2.2 Regulacja zagłówka.....	18
6.3 KDO_124 Pelota lędźwiowa.....	20
6.4 KDO_128 Separator kolan, KDO_154 Regulowany klin.....	20
6.5 KDO_114 Kamizelka H, KDO_125 Kamizelka 6-punktowa, KDO_130 Kamizelka 4-punktowa.....	21
6.6 KDO_134 / 137 Poduszki zawężające siedzisko o 6 i o 10 cm.....	22
6.7 KDO_155 Peloty piersiowe.....	22
6.8 KDO_162 Dynamiczne stabilizatory kostek FP-22.....	23
6.9 KDO_403 Stolik.....	24
6.10 KDO_429 Miękka osłona na podnóżek.....	24
6.11 KDO_443 Stolik KIDOO.....	25
6.12 KDO_448 Stolik samopoziomujący.....	25
6.13 KDO_436 Stolik JOY.....	26
6.14 KDO_616 Podnóżek z 2-punktowymi pasami stabilizującymi stopy KDO_617/KDO_618 Baza jezdna / Baza jezdna z podnóżkiem z 2-punktowymi pasami stabilizującymi stopy KDO_619 Podnóżek KDO_620 Baza jezdna z podnóżkiem KDO_014 Płazy przeciwwywrotne.....	26





7. Użytkowanie fotelika	28
7.1 Przygotowanie użytkownika.....	28
7.2 Przygotowanie fotelika.....	29
7.3 Przyjęcie pozycji siedzącej.....	30
7.4 Instrukcja użytkowania kamizelek.....	31
8. Zasady bezpieczeństwa.....	34
9. Warunki gwarancji	36
10. Konserwacja i czyszczenie.....	37
11. Oznakowanie	41
11.1 Symbole.....	41
11.2 Przykładowa tabliczka znamionowa.....	41





WSTĘP

KIDOO™ jest fotelikiem terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **KIDOO™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Fotelik ortopedyczno-rehabilitacyjny dla dzieci **KIDOO™** pozwala na właściwe i bezpieczne podparcie dziecka, z możliwością łatwej i intuicyjnej regulacji. Pas biodrowy dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Fotelik ma regulowaną wysokość siedziska i podłokietników, a także kąt oparcia. Wykonane jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępne w **5** rozmiarach.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiedzie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość





1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania fotelika przed użytkowaniem, użytkowania fotelika, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.

Przed przystąpieniem do użytkowania fotelika **KIDOO™** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

2. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenieny, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny pacjenta,
- Paraliż,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miedniczej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.





3. OGÓLNA BUDOWA FOTELIKA

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ① Tapicerka medyczna **MEDICUS™**
- ② Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia
- ③ Pas biodrowy
- ④ Siedzisko z regulacją głębokości
- ⑤ Oparcie z regulacją kąta pochylenia
- ⑥ Stelaż z regulacją wysokości





3.2 AKCESORIA



Płozы przeciwwyrotne




Pasy odwodzące uda



Pas podtrzymujący głowę



Zaglówek HexagonPro™

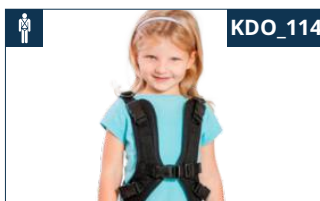

Kamizelka H




Pelota lędźwiowa



Kamizelka pełna 6-punktowa



Regulowany klin międzyudowy

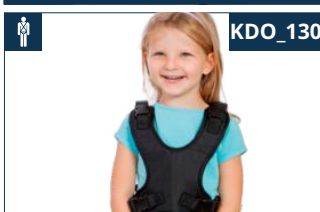

Kamizelka 4-punktowa



Poduszki zawężające siedzisko
o 6 cm



Poduszki zawężające siedzisko
o 10 cm



Separator kolan



Peloty piersiowe



Sandałki stabilizujące stopy
i stawy skokowe



KDO_403



Stolik



KDO_429



Miękka osłona na podnóżek



KDO_431



Rączka do prowadzenia



KDO_436



Stolik JOY™



KDO_443



Stolik Kidoo™



KDO_448



Stolik samopoziomujący



KDO_616



Podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy



KDO_617



Baza jezdna



KDO_618



Baza jezdna z podnóżkiem z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy



KDO_619



Podnóżek



KDO_620




Baza jezdna z podnóżkiem





4. TABELE ROZMIAROWE

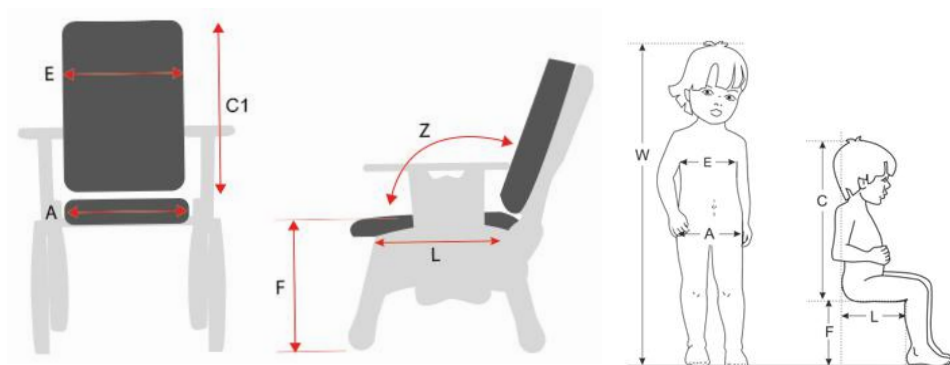

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	90-100	90-115	100-130	110-150	120-160
A/E	szerokość siedziska / oparcia	[cm]	23	26,5	31	35	42
L	głębokość siedziska	[cm]	18-23,5	22,5-30	24,5-34,5	31-41	36-47
C ₁	wysokość oparcia	[cm]	26	31	35	40	44
F	wysokość siedziska od podłoża	[cm]	19,5-26	24-31,5	27,5-36,5	33-44	36-49
Z	kąt pochylenia oparcia	[°]	90-116	90-116	90-116	90-116	90-116
	max. waga użytkownika	[kg]	20	30	40	55	70

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	34	37	42	47	55
Długość	[cm]	37,5	41	53	58	66
Wysokość	[cm]	48	56	63	75	81
Waga	[kg]	5	6,5	8	11	14

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

W ramach naszego stałego ulepszania produktu, Akces-MED zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez powiadomienia. Ponadto nie wszystkie oferowane opcje i funkcje są kompatybilne ze wszystkimi konfiguracjami.





5. OPIS OBSŁUGI FOTELIKA

LEGENDA



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.



Ikona ostrzegawcza - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zastosować **szczególne środki ostrożności**.





5.1 SIEDZISKO



Pokręta **A** służą do regulacji głębokości siedziska. **Po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić pokręta!**

5.2 OPARCIE




Pokręta **B** służą do regulacji kąta pochylenia oparcia. **Regulacja odbywa się w sposób stopniowy! Po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić pokrętła.**





Przy pochylaniu oparcia w pozycji 3 i 4 oraz przy użytkowniku nadpobudliwym ruchowo, mającym tendencję do "bujania się", ze względów bezpieczeństwa rekomenduje się zastosowanie płóz przeciwywrotnych KDO_014, które zabezpieczą fotelik przed wywróceniem.

5.3 PODŁOKIETNIKI

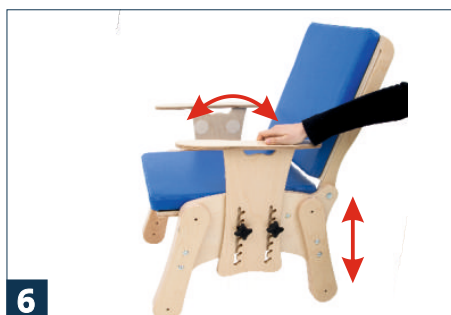

Pokrętła **C** służą do regulacji podłokietników. Przed nałożeniem stolika, podłokietniki powinny być ustawione na tej samej wysokości, równoległe do podłoża. Opuszczenie podłokietników całkowicie w dół znacznie ułatwi posadzenie dziecka na foteliku. **Po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić pokrętła!**



Nie należy podnosić fotelika za podłokietniki! Dotyczy to zarówno fotelika z obciążeniem jak i bez.





5.4 STELAŻ

5.4.1 REGULACJA WYSOKOŚCI FOTELIKA



POTRZEBNE NARZĘDZIA

- ① klucz imbusowy 4



Mocowania **D** służą do regulacji wysokości fotelika. Nóżki powinny być ustawione symetrycznie po obydwu stronach fotelika. **Po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić mocowania!**



5.4.2. FUNKCJA KUBEŁKOWA FOTELIKA



Dzięki odpowiedniemu ustawieniu wysokości nóg możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika. Przy znacznym pochyleniu siedziska należy bezwzględnie stosować **płózy przeciwwyrotne KDO_014**.






Podczas korzystania z funkcji kubelkowej oraz przy użytkowniku nadpobudliwym ruchowo, mającym tendencję do "bujania się" na krześle, ze względów bezpieczeństwa rekomenduje się zastosowanie płóz przeciwywrotnych KDO_014, które zabezpieczą fotelik przed wywróceniem się. Przed przystąpieniem do użytkowania fotelika należy upewnić się, czy wszystkie pokrętła i mocowania regulowanych elementów zostały mocno dokręcone!



6. AKCESORIA

6.1 KDO_101 PAS PODTRZYMUJĄCY GŁOWĘ

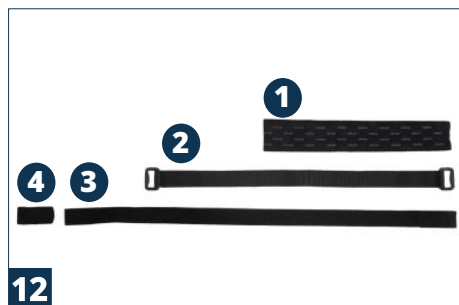

W pierwszej kolejności należy dopasować elementy nr. 1 oraz nr.3 do użytkownika. W tym celu należy je przyciąć na odpowiednią długość.

14 15



Po przycięciu pasek na odpowiednią długość, należy połączyć pasek nr.3 ze złączką nr.4. (zdj.15). Następnie należy połączyć pasek nr.1 z paskiem nr. 3, tak, żeby znajdował się on na środku.





Następnie łączymy dwa końce paska z paskiem nr. 2 w taki sposób, aby wskazany rzep paska nr.2 znajdował był skierowany do środka.



Następnie mocujemy pasek na zagłówek

20





6.2 KDO_104 ZAGŁÓWEK HEXAGONPRO™

6.2.1. MONTAŻ ZAGŁÓWKA



POTRZEBNE NARZĘDZIA

1

klucz imbusowy 4



6.2.2. REGULACJA ZAGŁÓWKA

i

Zagłówek można regulować w **3** płaszczyznach - regulacja wysokości i głębokości (fot.23,24) oraz szerokości zagłówka (fot.25,26). Dzięki modułowej konstrukcji istnieje także możliwość dopasowania zagłówka do kształtu głowy użytkownika. Pomaga to w prawidłowym ustawieniu głowy i poprawia komfort użytkowania. Odpowiednio ustabilizowana i podparta głowa znacząco obniża napięcie mięśni szyi/karku.

**i**

W celu regulacji wysokości i głębokości zagłówka należy poluzować wskazane śruby za pomocą klucza imbusowego (fot.23), ustawić zagłówek w wybranej pozycji, mocno dokręcić śruby. **Należy upewnić się, czy zagłówek jest zablokowany.**





W celu regulacji szerokości zagłówka należy poluzować wskazane śruby za pomocą klucza imbusowego (fot.25), ustawić zagłówek w wybranej pozycji, mocno dokręcić śruby. **Należy upewnić się, czy zagłówek jest zablokowany.**





6.3 KDO_124 PELOTA ŁĘDŹWIOWA



Pelota zapinana jest obwodowo za oparciem fotelika.



30

6.4 KDO_128 REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY KDO_154 SEPARATOR KOLAN



Aby zamontować **Regulowany klin międzyudowy KDO_128** lub **Separator kolan KDO_154** należy wsunąć je w wyznaczone miejsce pod siedziskiem, aż do momentu ich całkowitego zablokowania. Można regulować stopień wysunięcia klina lub separatora za pomocą zatrzasku, który należy odciągnąć, a następnie ustawić elementy w wybranej pozycji.



31



32



33





**6.5 KDO_114 KAMIZELKA H****KDO_126 KAMIZELKA PEŁNA 6-PUNKTOWA****KDO_130 KAMIZELKA 4-PUNKTOWA**

Kamizelki działają jako stabilizator tułowia. Posiadają duży zakres regulacji oraz funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu *Chwyć i pociągnij*®.




Przed korzystaniem z kamizelki należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji. Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki, znajdują się na stronie 31 instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.

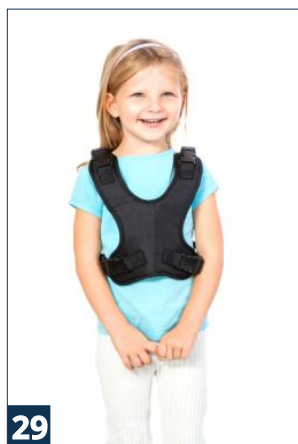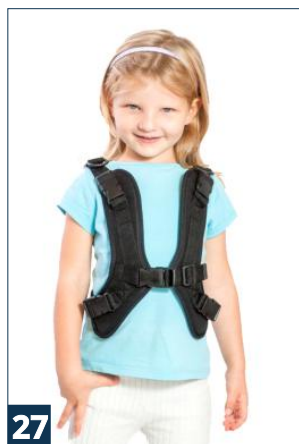



6.6 KDO_134 PODUSZKI ZAWĘŻAJĄCE SIEDZISKO O 6 CM KDO_137 PODUSZKI ZAWĘŻAJĄCE SIEDZISKO O 10 CM

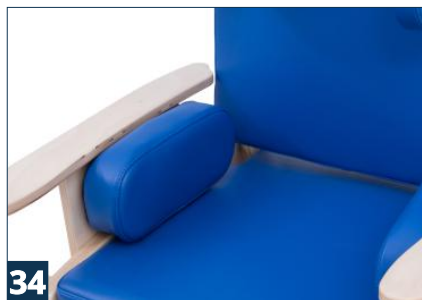**i**

Poduszki montowane są na podłokietnikach przy siedzisku za pomocą rzepów.

6.7 KDO_155 PELOTY PIERSIOWE


i

Aby zamontować peloty należy zdjąć poduszkę oparcia, następnie umieścić peloty na wybranej wysokości, zamontować i dokręcić pokrętła do regulacji, założyć poduszkę oparcia.





6.8 KDO_162 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK FP-22

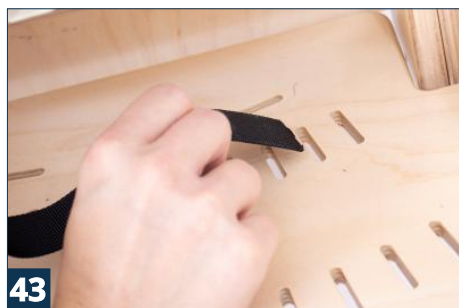



6.9 KDO_403 STOLIK



Aby zamontować stół należy ustawić podłokietniki na tej samej wysokości, a następnie wsunąć blat jednocześnie odciągając zatrzask. Za pomocą zatrzasku można również regulować stopień wysunięcia stołu.



Maksymalne obciążenie stołu to 7 kg!
Nie należy podnosić fotelika (zarówno z obciążeniem jak i bez) za stoła.

6.10 KDO_429 MIĘKKA OSŁONA NA PODNÓŻEK





6.11 KDO_443 STOLIK KIDOO



i

Funkcjonalny i praktyczny stolik **Kidoo™** doskonale sprawdza się podczas terapii, nauki, zabawy czy też w trakcie wykonywania codziennych czynności. **Przed użytkowaniem stolika należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczaną wraz z wyrobem!**

6.12 KDO_448 STOLIK SAMOPOZIOMUJĄCY



i

Do spodu blatu stolika dołączony jest za pomocą rzepów worek wypełniony granulatem. Posiada on kieszeń, która umożliwia dostosowanie ilości granulatu w zależności od potrzeb.

Uwaga! Dodatkowy woreczek z granulatem dostępny opcjonalnie.




**6.13 KDO_436/1 STOLIK JOY****55**

Stolik **JOY™** stanowi wyjątkowy dodatek do naszych fotelików. Może być także z powodzeniem używany z innymi krzesłami, fotelikami szkolnymi czy krzesłami biurowymi. **Przed użytkowaniem stolika należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczaną wraz z wyrobem!**

6.14 KDO_616 Podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi**KDO_617 Baza jezdna****KDO_618 Baza jezdna z podnóżkiem z 2-punktowymi pasami stabilizującymi stopy****KDO_619 Podnóżek****KDO_620 Baza jezdna z podnóżkiem****KDO_014 Płozy przeciw wywrotne****POTRZEBNE NARZĘDZIA****1** klucz imbusowy 4**56****Baza jezdna KDO_617**
- miejsca mocowania

Bazy, podnóżki oraz płozy przeciwwyrotne są montowane do nóżek fotelika.

**57****Baza jezdna z podnóżkiem KDO_618 /**
KDO_620 - miejsca mocowania

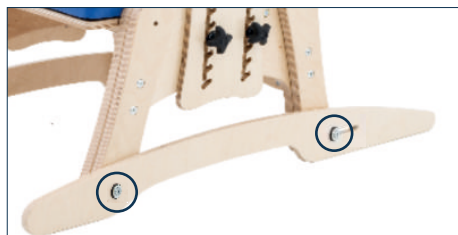

58

Płyty przeciwywrotne
KDO_014 - miejsca mocowania

i

Elementy są mocowane do fotelika za pomocą dołączonego zestawu, zgodnie z przedstawionym obok schematem. Wkręt należy dokręcić kluczem imbusowym.



59

Podnózek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy KDO_616 / Podnózek KDO_619 - miejsca mocowania



60



61

i

Dodatkowo **KIDOO™** może zostać przekształcony w fotelik bujany. W tym celu należy odwrotnie zamontować płyty przeciwywrotne.



62



7. UŻYTKOWANIE FOTELIKA



Fotelik **KIDOO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej w zakresie jego obsługi. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

7.1. PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące staw skokowy,
- użytkownik nie był umieszczany w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.



Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!





7.2. PRZYGOTOWANIE FOTELIKA

1. Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania należy:

- rozłożyć fotelik;
- ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wózka, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury;
- upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należyście zamocowane i stabilne;
- aktywować hamulce (w przypadku zamontowanych baz z kołami);
- dopasować urządzenie do wymiarów użytkownika;
- odpiąć pas biodrowy, aby umożliwić swobodne ułożenie dziecka w foteliku;
- maksymalnie obniżyć podłokietniki co ułatwi włożenie dziecka do fotelika;
- umieścić dziecko w foteliku;
- zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika - pas biodrowy bądź kamizelki;
- ustawić klin międzyudowy;
- zamontować stolik.

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.



Przed przystąpieniem do użytkowania fotelika należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

Urządzenie będzie prawidłowo spełniało swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowane do wymiarów ciała użytkownika. Główną zasadą przy dopasowywaniu urządzenia jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować jego dyskomfort. Nieumiejętne korzystanie z urządzenia może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.





7.3. PRZYJĘCIE POZYCJI SIEDZĄCEJ

Pierwsze przyjęcie przez użytkownika pozycji siedzącej następuje zwykle w warunkach ośrodków rehabilitacji, neurologii, neurochirurgii lub ortopedii. Istotne jest prawidłowe dopasowanie poszczególnych elementów wyposażenia fotelika do stanu użytkownika z uwzględnieniem istniejących przykurczów i deformacji. Sadzanie w warunkach domowych wykonuje wykwalifikowany personel po uprzednim przeszkoleniu (fizjoterapeuta, pielęgniarka środowiskowa, osoby przeszkolone z rodziny) po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi fotelika.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do skutków ubocznych takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie, wyjąć pacjenta z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Decyzję o zastosowaniu fotelika rehabilitacyjnego zawsze podejmuje lekarz prowadzący!

Dopasowanie fotelika do użytkownika powinno zostać wykonane wyłącznie przez osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi i zapoznały się z instrukcją.





7.4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KAMIZELEK



Kamizelka zapewnia wsparcie postawy u pacjentów siedzących na wózkach inwalidzkich, fotelikach lub innych siedziskach rehabilitacyjnych. Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala pacjentowi przyjąć prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji i kształtowi, kamizelka pozwala na wykonywanie swobodnych ruchów kończynami górnymi, w miarę możliwości pacjenta. **Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta!**

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

- 1) Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, to istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi pacjenta, utrudniając mu oddychanie – należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza pacjenta.
- 2) Pacjent zsuwa się z siedziska, wówczas górny brzeg kamizelki obejmuje szyję pacjenta i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie – z kamizelką ZAWSZE należy stosować wyposażenie stabilizujące pacjentowi miednicę takie jak pas biodrowy, pasy odwodzące uda lub klin międzyudowy.
- 3) Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę uciskają szyję pacjenta blokując tchawicę utrudniając oddychanie. Może się tak zdarzyć, jeżeli ciało pacjenta zostało w niewłaściwy sposób zabezpieczone w foteliku/wózku – należy wówczas zastosować opcjonalne wyposażenie tych urządzeń i ustabilizować ciało pacjenta przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie zawiera takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować ciała pacjenta należy wymienić to urządzenie na inne, posiadające taką funkcję.
- 4) Kamizelka jest zbyt ciasno dociągnięta do oparcia w wyniku czego pacjent nie może swobodnie oddychać - w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę w taki sposób, aby pomiędzy kamizelką a ciałem pacjenta opiekun mógł swobodnie wsunąć wyprostowaną dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu ciała pacjenta, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej np. kamizelki Flex-point, która nie utrudnia pacjentowi oddychania.





Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

- 1) Upewnij się, że pacjent siedzi w najlepszej możliwej pozycji:
 - na środku siedziska,
 - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa pacjenta przylegały do oparcia.
- 2) Zabezpiecz miednicę pacjenta za pomocą np. pasa biodrowego, pasów odwodzących uda lub klina międzyudowego.
- 3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla pacjentów ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy boczne ciała pacjenta, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję pacjenta.
- 4) Zabezpiecz kamizelkę:
 - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza pacjenta. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
 - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
 - zapnij pasy naramienne kamizelki,
 - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- 5) Sprawdź pozycję pacjenta:
 - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi pacjenta,
 - upewnij się, że możesz wsunąć wyprostowaną dłoń między ciało pacjenta a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Pozycja kamizelki MUSI zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu pacjenta na siedzisku.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka MUSI być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy pacjenta (np. za pomocą pasa biodrowego, pasów odwodzących uda lub klina międzyudowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubełkowa i odchyłane oparcie.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby cała stopa pacjenta miała stabilne podparcie. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w podparcie dla stóp, stopy pacjenta muszą pewnie opierać się o podłoże.





- 4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!
- 5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeśli pacjent ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję pacjenta.
- 6) Montażu i dopasowania kamizelki do pacjenta może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
- 7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub wymiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
- 8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta!
- 9) Nie należy zostawiać pacjenta w urządzeniu bez opieki!
- 10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
- 11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad pacjentem są zaznajomione z zasadami bezpiecznego stosowania kamizelki.

Dbanie o kamizelkę

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- 1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
- 3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia, włosy lub zlecić jego wymianę na nowy.
- 5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do pacjenta, ze względu na jego wzrost, przyrost/utratę wagi.
- 6) Szelki kamizelki należy tak wyregulować, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
- 7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.





8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Fotelik **KIDOO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem należy przygotować podopiecznego i urządzenie.

Przed decyzją zakupu fotelika **KIDOO™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze fotelika. Przed rozpoczęciem użytkowania fotelik należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem należy:
 - sprawdzić fotelik pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji fotelika;
 - upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a fotelik nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
 - sprawdzić, czy nie zostały poluzowane żadne mocowania, połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
 - sprawdzić poprawność działania hamulców (w przypadku fotelika z zamontowaną bazą z kołami);
 - sprawdzić prawidłowość działania klamer, czy nie rozpinają się pod wpływem nacisku;
 - dopasować fotelik do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie pasa biodrowego oraz dostępnych akcesoriów takich jak zagłówki, peloty, klin;
 - upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień fotelika są mocno dokręcone;
 - zabezpieczyć pacjenta dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia fotelika takimi jak pas biodrowy oraz akcesoria: peloty, klin międzyudowy, zagłówki. Ma to na celu zabezpieczenie pacjenta m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia.
2. Zabrania się użytkowania fotelika w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.





3. Zabrania się użytkowania fotelika, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w foteliku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
6. Zabrania się pozostawiania fotelika z użytkownikiem na terenie pochyłym lub nierównym.
7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania fotelikiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.
8. Wsiadanie i wysiadanie pacjenta z fotelika zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu (w przypadku fotelika z zamontowaną bazą z kołami).
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania fotelika kończyny pacjenta nie dostawały się między regulowane elementy urządzenia.
10. Nie należy podnosić fotelika z podłokietniki ani za stolik. Dotyczy to zarówno fotelika z obciążeniem jak i bez.
11. Fotelik należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Fotelik nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu fotelika bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
13. Przed użyciem fotelika należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.





Wyrób zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo w przypadku połknięcia przez dziecko.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla pacjenta. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaniechać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń !

Nie należy przekraczać maksymalnej, dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 10 instrukcji.

9. WARUNKI GWARANCJI

- **Akces-MED. Sp. z o.o.** sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Fotelik **KIDOO™** jest objęty **24 miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez pacjenta. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że sprzęt jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku Użytkownik może wystąpić o refundację naprawy sprzętu przez NFZ, wykonanej w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- Producent określa czas użytkowania wyrobu na **36 miesięcy**. Po tym okresie Użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia sprzętu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED. Sp. z o.o.** (tel. +48 17 864 04 70).





10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Fotelik **KIDOO™** będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja fotelika są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów fotelika:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą wilgotną ściereczką a następnie osuszyć.
4. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
5. Tapicerki nie należy zamaczać!
6. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tapicerki przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.
9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować fotelika w trakcie jego użytkowania.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczanego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnie płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.





Przed ponownym użyciem wózka, tapicerka zawsze musi być sucha! **Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności!**

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić koła z wszelkich zanieczyszczeń (jeśli dotyczy);
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo dokręcone, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koło (jeśli dotyczy);
- sprawdzić, czy konstrukcja fotelika nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji;
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym, zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone;
- sprawdzić, czy paski pasa biodrowego nie są postrzępione, a rzepy i klamry działają prawidłowo.



Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).**





PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulec.	Sprawdzić: • unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, • czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, • czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególnie sprawdzić: • poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), • poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżki.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: • elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.





Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, sztybnoszące (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy osi, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: oznaczenia i etykiety wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może używać wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie
www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.





11. OZNACZENIA

11.1. SYMBOLE

	Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE
	Numer katalogowy
	Numer seryjny
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
	Uwaga!
	Wytwórca
	Data produkcji
	Wyrób nie zawiera lateksu
	Przechowywać w suchym miejscu
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających
	Chronić przed promieniami słonecznymi
	Ograniczenie temperatury przechowywania
	Wilgotność względna przechowywania

	Suszyć pionowo
	Nie chlorować
	Nie prasować
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie wybielać
	Nie chlorować
	Ostrożnie, delikatna zawartość
	Zakaz zjeżdżania wózkami po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez
	Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
	Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.
	Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu.
	Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.

11.2. PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA

KOD QR
Po zeskanowaniu kieruje do strony internetowej wyrobu

ADRES WYTWÓRCY

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WYROBU

NUMER SERYJNY W FORMIE KODU KRESKOWEGO

NAZWA WYROBU W JĘZYKU POLSKIM

NAZWA WYROBU W JĘZYKU ANGIELSKIM

DATA PRODUKCJI

OZNAKOWANIE
patrz wyżej

NUMER SERYJNY




WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619



Autoryzowany Przedstawiciel



akces-med.com