



WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI
T A T A L U TM



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.



Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.



Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **Akces-MED Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. **System certyfikowany przez Det Norske Veritas.**

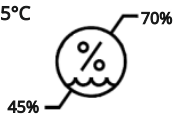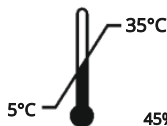



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	3
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	3
3. Ogólna budowa wózka.....	4
3.1 Wyposażenie standardowe.....	4
3.2 Akcesoria.....	5
4. Tabele rozmiarowe.....	7
5. Opis obsługi wózka.....	8
5.1 Rozkładanie wózka do użytkowania.....	9
5.2 Składanie wózka.....	10
5.3 Regulowany podnózek.....	11
5.4 Regulacja głębokości siedziska.....	12
5.5 Montaż pasów 5-punktowych.....	12
5.6 Regulacja rączek do prowadzenia wózka.....	15
5.7 Montaż uchwytu do przenoszenia wózka złożonego.....	15
6. Akcesoria.....	17
6.1 TTL_001 Światła LED.....	17
6.2 TTL_013 Barijerka.....	17
6.3 TTL_101 Pasy odwodzące uda.....	17
6.4 TTL_104 Regulowany zagłówek.....	18
6.5 TTL_114 Kamizelka H / TTL_130 Kamizelka 4-punktowa.....	19
6.6 TTL_128 Regulowany klin międzyudowy.....	20
6.7 TTL_161 Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe.....	20
6.8 TTL_162 Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22).....	20
6.9 TTL_402 Parasolka.....	21
6.10 TTL_403 Stolik.....	21
6.11 TTL_405 Daszek.....	22
6.12 TTL_408 Osłona przeciwdeszczowa / TTL_409 Moskitiera.....	23
6.13 TTL_411 Uchwyt na kubek.....	23
6.14 TTL_417 Śpiwór zimowy z mufkami / TTL_447 Mufki zimowe / TTL_445 Śpiwór.....	24
6.15 TTL_448 Stolik samopoziomujący.....	24
6.16 TTL_501 Torba / TTL_509 Organizier.....	25
6.17 TTL_505 Kosz pod siedzisko.....	25
6.18 TTL_506 Pokrowiec do przenoszenia wózka w pozycji złożonej.....	25
7. Użytkowanie wózka.....	26
7.1 Przygotowanie użytkownika.....	26
7.2 Przygotowanie wyrobu.....	27
7.3 Instrukcja używania kamizelek.....	28
8. Zasady bezpieczeństwa.....	31
9. Warunki gwarancji.....	33
10. Konserwacja i czyszczenie.....	33
11. Oznaczenia.....	37
11.1 Symbole.....	37
11.2 Przykładowa tabliczka znamionowa.....	37





WSTĘP

TATALU™ - od teraz spacer z Twoim dzieckiem są jeszcze bardziej komfortowe! Nowa odsłona wózka spacerowego, którego lekka i wytrzymała konstrukcja doskonale sprawdzi się w każdych warunkach, a forma parasolki pozwala na szybkie złożenie i przechowywanie go, zajmując niewiele miejsca.

Szereg udoskołań wpływa na poprawę odczuć zarówno użytkownika, jak i opiekuna. Wózek można w pełni personalizować - to Ty decydujesz o akcesoriach.

TATALU™ - to komfort i stabilizacja!

Szereg udoskołań takich jak tapicerka **SOFT** osłaniająca boki konstrukcji, zapewniając tym samym ochronę użytkownika, regulowane pasy 5 - punktowe z dodatkową osłoną, zagłówek czy podnóżek z możliwością zmiany pozycji, sprawia, że mały użytkownik czuje się w nim komfortowo i bezpiecznie. Tapicerka **SOFT** spełnia wysokie wymagania stawiane przez opiekunów, co potwierdza m. in. przeprowadzony test papierosa świadczący o niepalności tkaniny.

Zwiększenie komfortu zapewnia niezależny, wzmocniony system amortyzacji oraz obrotowe koła przednie, które zapewniają zwrotność wózka.

TATALU™ - przekonaj się, że spacer z Twoją pociechą mogą być jeszcze przyjemniejsze!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdują się w niej informacje o produkcie oraz instrukcja, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag, prosimy o kontakt:

Konsultant medyczny: tel. kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com



Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.



1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania wózka przed użytkowaniem oraz jego użytkowania, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona na osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących wózek.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **TATALU™**, użytkownik (lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

2. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, z dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Przeznaczony dla osób z zaburzeniami napięcia mięśniowego. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postacie,
- Przepuklinę oponowo - rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowanie choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne i przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnienie i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo - mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortotyczne).

Przeciwwskazania do siedzenia:

- Stan krytyczny użytkownika,
- Paraliż,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.





3. OGÓLNA BUDOWA WÓZKA

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ① Składany stelaż typu parasolka z regulacją głębokości siedziska
- ② Regulowane ręczki do prowadzenia wózka
- ③ 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z osłoną
- ④ Wysokie peloty sztywne tułowia
- ⑤ Regulowany podnóżek
- ⑥ Mięka tapicerka SOFT
- ⑦ Obrotowe, amortyzowane przednie koła pełne z blokadą kierunku jazdy
- ⑧ Amortyzowane, tylne koła pełne z niezależnymi hamulcami
- ⑨ Uchwyt do przenoszenia wózka złożonego





3.2 AKCESORIA



TTL_001



Światła LED



TTL_013



Barierka



TTL_101



Pasy odwodzące uda



TTL_104



Zagłówek



TTL_114



Kamizelka H



TTL_128



Regulowany klin międzyudowy



TTL_130



Kamizelka 4-punktowa



TTL_161



Sandałki stabilizujące stopy
i stawy skokowe



TTL_162



Dynamiczne stabilizatory kostek
(FP-22)



TTL_402



Parasolka



TTL_403



Stół



TTL_405



Daszek



TTL_408



Ostona przeciwdeszczowa



TTL_409



Moskitiera



TTL_411



Uchwyt na kubek





TTL_417
TTL_445

Śpiwór zimowy z mufkami /
Śpiwór



TTL_447

Mufki zimowe



TTL_448

Stolik samopoziomujący



TTL_501

Torba



TTL_505

Kosz pod siedzisko



TTL_506

Pokrowiec do przenoszenia
wózka złożonego



TTL_509

Organizer



4. TABELE ROZMIAROWE

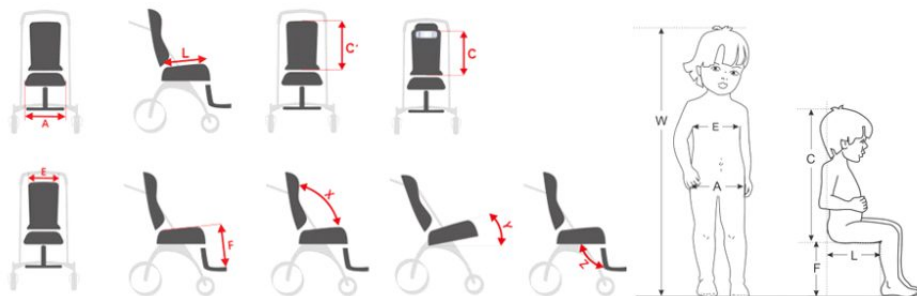


TABELA ROZMIAROWA

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	90 - 130
A	szerokość siedziska **	[cm]	38 (30)
L	głębokość siedziska	[cm]	22, 28
C ₁	wysokość oparcia	[cm]	60
C	wysokość zagłówka	[cm]	45 - 60
E	szerokość oparcia**	[cm]	38 (30)
F	wysokość podnóżka	[cm]	18, 24, 35
	wysokość rączek prowadzących	[cm]	104
X	kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	95
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	25
	max. masa użytkownika	[kg]	35

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

**Wysokie peloty sztywne tułowia zawężają siedzisko/oparcie o 8 cm do wartości 30 cm.

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Wymiary i waga sprzętu		Rozmiar 1
Szerokość	[cm]	55
Szerokość po złożeniu	[cm]	28
Długość	[cm]	104
Długość po złożeniu	[cm]	121
Wysokość	[cm]	104
Wysokość po złożeniu	[cm]	33
Waga	[kg]	11

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



5. OPIS OBSŁUGI WÓZKA

LEGENDA



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.



Ikona ostrzegawcza - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zastosować **szczególne środki ostrożności**.



UWAGA!



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.




5.1 ROZKŁADANIE WÓZKA



Trzymaj użytkownika z dala od ruchomych części wózka podczas rozkładania wózka.
Istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ciała.

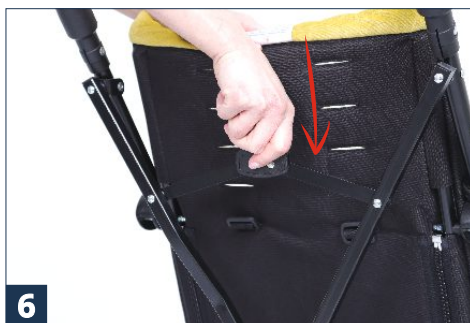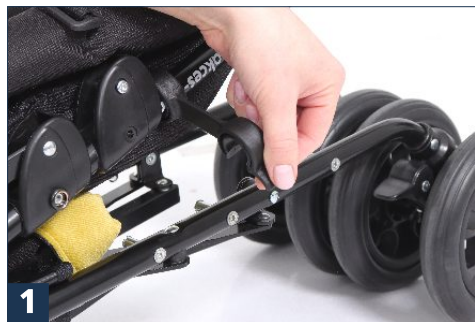

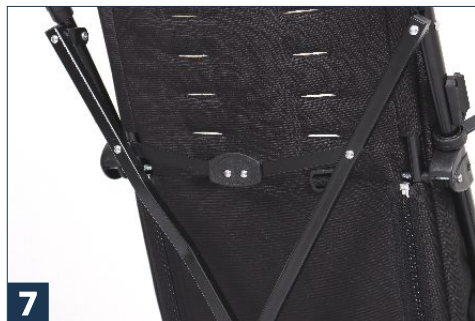


Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zablokowane.

5.2 SKŁADANIE WÓZKA



Trzymaj użytkownika z dala od ruchomych części wózka podczas składania wózka. Istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ciała.


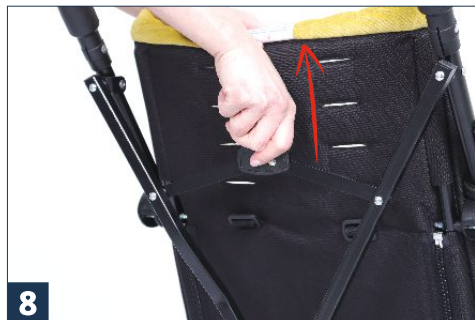




5.3 REGULOWANY PODNÓŻEK

i

Chcąc zmienić wysokość podnóżka, należy nacisnąć dźwignię znajdującą się pod podnóżkiem. Możliwa jest zmiana wysokości na trzech poziomach, wykorzystując elementy znajdujące się na ramie wózka (**zdj. 14**).

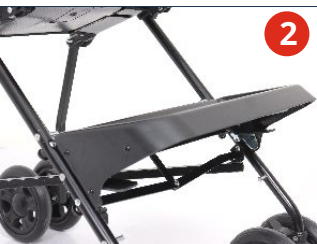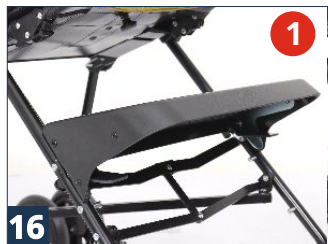




5.4 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA





5.5 MONTAŻ PASÓW 5-PUNKTOWYCH

i



Pasy montować można na wybranej wysokości na oparciu wózka, wybierając otwory w tapicerce na tej samej wysokości.

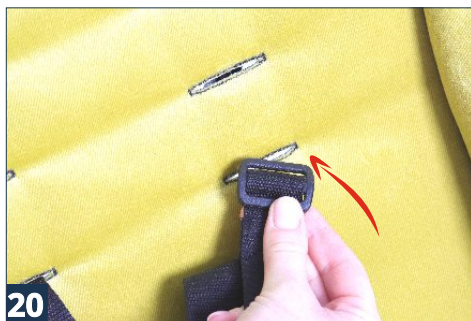

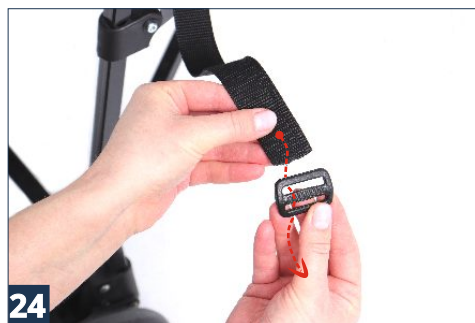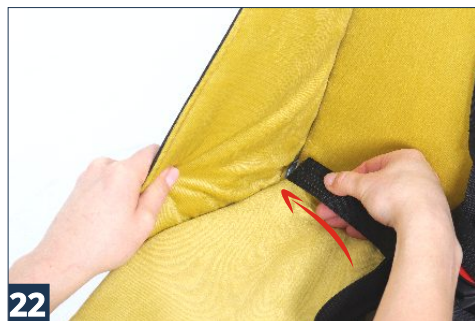



Pasy 5-punktowe montować można w jednym z 3 miejsc na siedzisku wózka (zdj. 31).

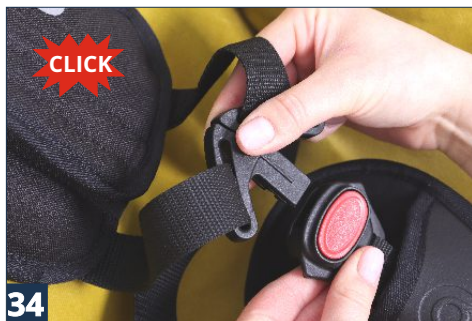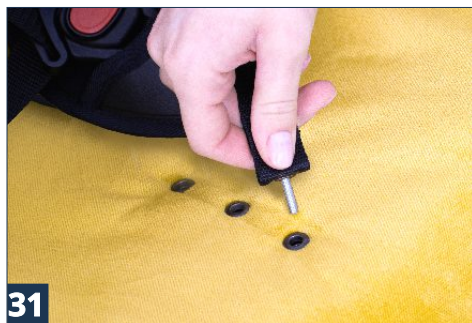


Każdorazowo należy upewnić się czy użytkownik ma prawidłowo zapięte pasy 5-punktowe w trakcie korzystania z wózka!

W tym celu należy mocno pociągnąć pasy i sprawdzić, czy nie rozpinają się samoczynnie pod wpływem użytej siły.





5.6 REGULACJA RĄCZEK DO PROWADZENIA WÓZKA

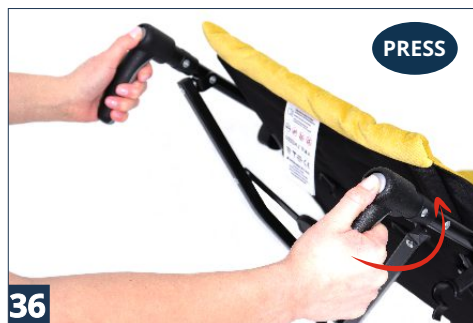

5.7 MONTAŻ UCHWYTU DO PRZENOSZENIA WÓZKA ZŁOŻONEGO








6. AKCESORIA

6.1 TTL_001 ŚWIATŁA LED



Światła LED umieścić w dowolnym, widocznym miejscu na ramie wózka.

6.2 TTL_013 BARIERKA

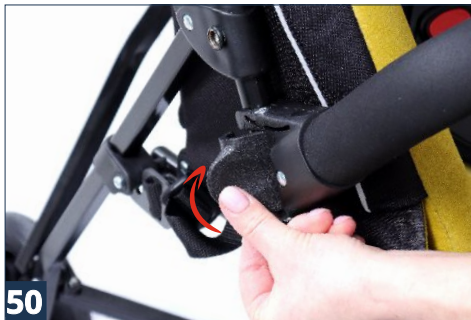

6.3 TTL_101 PASY ODWODZĄCE UDA



Ściągnąć jeden z regulatorów umieszczonych na pasach oraz postępować zgodnie z instrukcją montażu dolnych pasów 5-punktowych (**patrz str. 14, pkt. 5.5, zdj. 22 - 29**).




**i**

Założyć uprzednio ściągnięty regulator oraz przełożyć pasek przez klamrę (zdj. 53).
Koniec paska przełożyć przez regulator (zdj. 54).

6.4 TTL_104 REGULOWANY ZAGŁÓWEK

i

Zagłówek montować można na 3 różnych wysokościach.


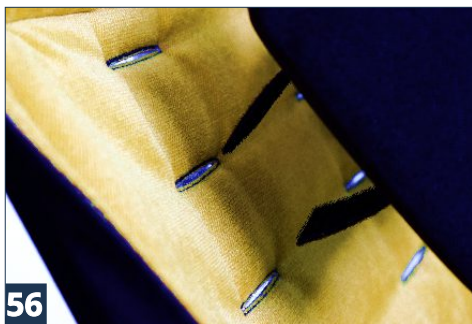




6.5 TTL_114 KAMIZELKA H / TTL_130 KAMIZELKA 4-PUNKTOWA



Montaż pasów górnych odbywa się zgodnie z instrukcją montażu górnych pasów 5-punktowych (**patrz str. 13, pkt. 5.5 Montaż pasów 5-punktowych, zdj. 20 - 21**).

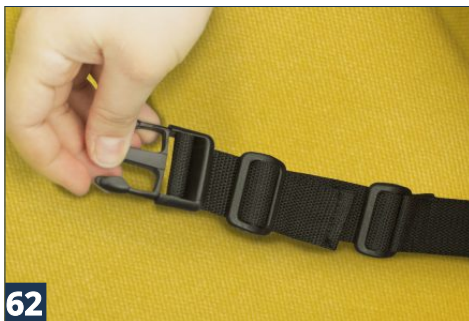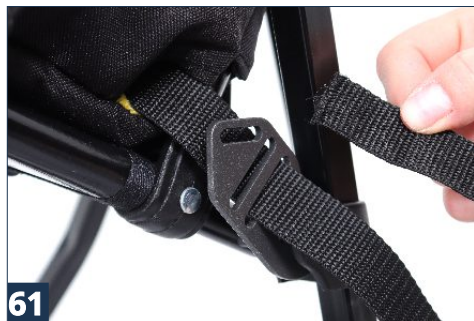

Na pasek założyć ściągnięty uprzednio regulator oraz klamrę. Koniec paska przepleść przez klamrę oraz zabezpieczyć przeplatając ponownie przez element regulujący (**zdj. 62**).



Przed korzystaniem z kamizelki należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji.

Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki znajdują się na stronach 29 - 31 instrukcji.

Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.





6.6 TTL_128 REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY



Regulowany klin międzyudowy montować można w jednym z 3 miejsc na siedzisku.



63



64

6.7 TTL_161 SANDAŁKI STABILIZUJĄCE STOPY I STAWY SKOKOWE



65



Paski sandałów poprowadzić otworami pod spód podnóżka, zapiąć rzepy oraz sprawdzić poprawność zapięcia.

6.8 TTL_162 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK (FP-22)




66



67




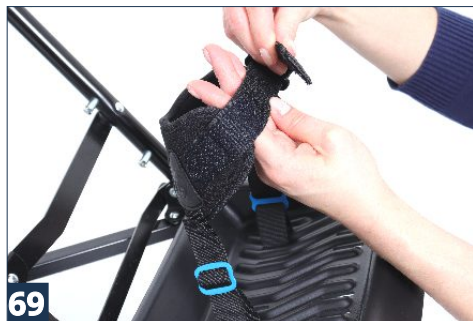

6.9 TTL_402 PARASOLKA



Parasolkę zaciskamy na ramie wózka, dokręcając mocno pokrętkę (zdj. 70). Zmiana kąta nachylenia parasolki odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku (zdj. 70).





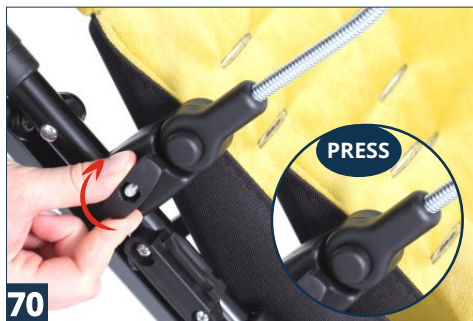


6.10 TTL_403 STOLIK





6.11 TTL_405 DASZEK

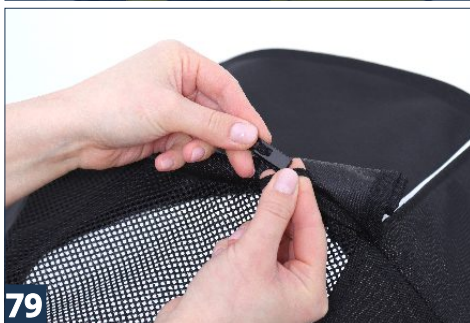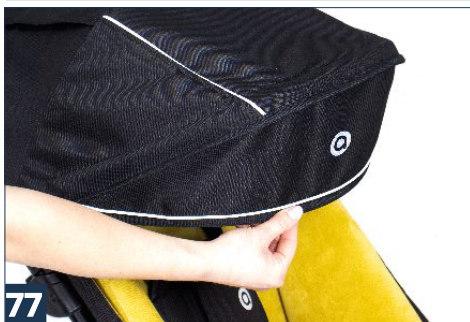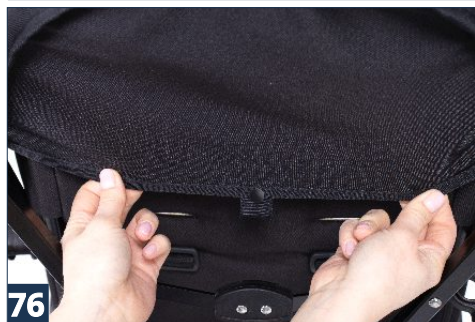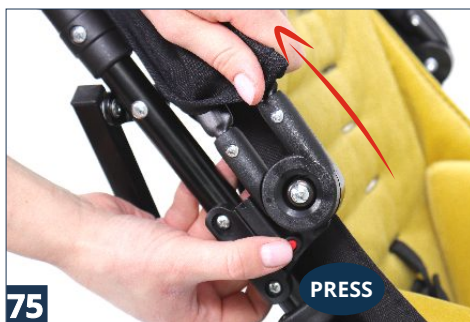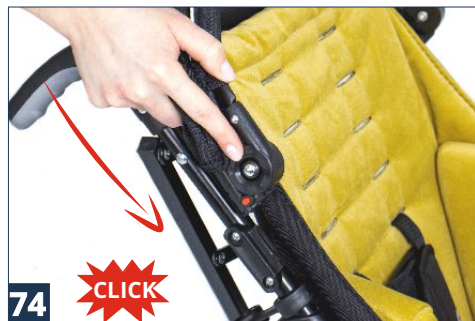




6.12 TTL_408 OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA TTL_409 MOSKITIERA



Do montażu osłony przeciwdeszczowej lub moskitiery konieczne jest rozłożenie daszka oraz wpięcie podnóżka.


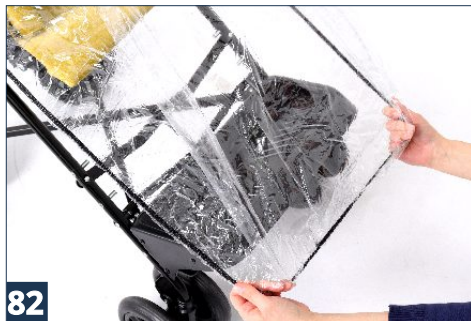


6.13 TTL_411 UCHWYT NA KUBEK





6.14 TTL_417 ŚPIWÓR ZIMOWY Z MUFKAMI TTL_445 ŚPIWÓR TTL_447 MUFKI ZIMOWE

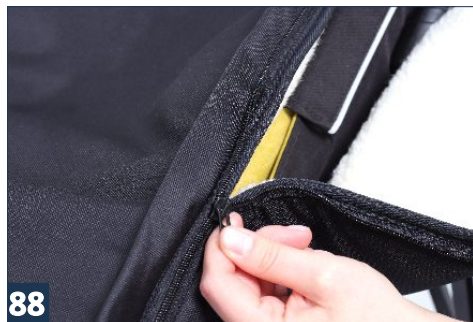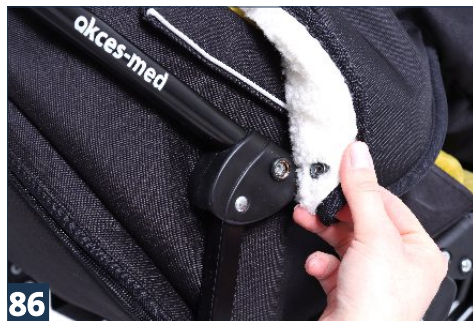

6.15 TTL_448 STOLIK SAMOPOZIOMUJĄCY

**i**

Do spodu blatu stolika dołączony jest za pomocą rzepów velcro worek wypełniony granulatem. Posiada on kieszeń, która umożliwia dostosowanie ilości granulatu w zależności od potrzeb.

Uwaga: Dodatkowy woreczek z granulatem dostępny w ofercie.






6.16 TTL_501 TORBA / TTL_509 ORGANIZER



i

Torbę oraz organizer należy ułożyć na uchwytach do prowadzenia wózka oraz zabezpieczyć przed zsunięciem się, zapinając napy lub zaczepy po obu stronach wózka.

6.17 TTL_505 KOSZ POD SIEDZISKO

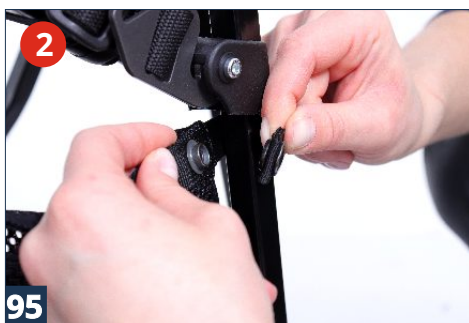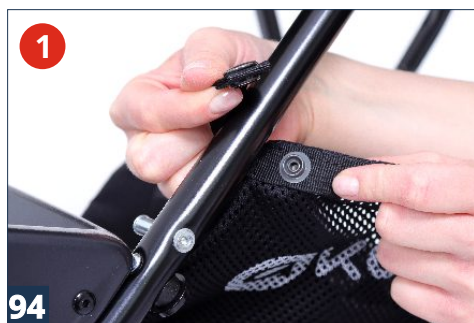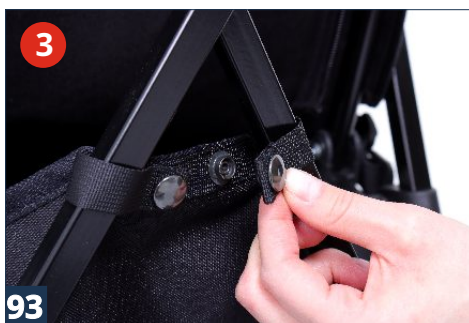

6.18 TTL_506 POKROWIEC DO PRZENOSZENIA WÓZKA ZŁOŻONEGO

i

Złożyć wózek zgodnie z instrukcją składania (**patrz str. 12, pkt. 5.2, zdj. 8 - 13**) oraz umieścić go w pokrowcu. Upewnij się, że jest on odpowiednio zamknięty.





7. UŻYTKOWANIE WÓZKA



Wózek **TATALU™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej w zakresie jego obsługi.

Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

7.1 PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem użytkowania wyrobu należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.



Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!





7.2 PRZYGOTOWANIE WÓZKA

1. Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania należy:
 - rozłożyć wózek;
 - ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wózka, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury;
 - upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należyście zamocowane i stabilne;
 - aktywować hamulce;
 - dopasować urządzenie do wymiarów użytkownika;
 - odpiąć pasy 5-punktowe lub kamizelkę tak, aby umożliwić swobodne ułożenie użytkownika w wózku;
 - umieścić użytkownika w wózku;
 - zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika np. pasy 5-punktowe, kamizelki, sandały stabilizujące stopy i stawy skokowe itp.;
 - zamontować dodatkowe wyposażenie wózka np. stolik.
2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.



Podczas pokonywania przeszkód (progi, krawężniki itp.) należy unieść przednie koła poprzez naciśnięcie rączek do dołu, a następnie unieść koła i umieścić je na stopniu, następnie umieścić na stopniu koła tylne poprzez podniesienie tylnej części wózka za rączki w górę.

Należy uważać, aby nie przechylić wózka zbyt do tyłu!

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawić wózek przodem do kierunku jazdy.

Podczas użytkowania wózek należy zawsze trzymać za rączkę, aby nie dopuścić do jego samoczynnego toczenia się.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

Urządzenie będzie prawidłowo spełniało swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowane do wymiarów ciała użytkownika. Główną zasadą przy dopasowywaniu urządzenia jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować jego dyskomfort. Nieumiejętne korzystanie z urządzenia może prowadzić do utrwalenia nieprawidłowych wzorców postawy.





7.3 INSTRUKCJA UŻYWANIA KAMIZELEK



Kamizelka zapewnia wsparcie postawy u użytkowników siedzących na wózkach inwalidzkich, fotelikach lub innych siedziiskach rehabilitacyjnych. Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala użytkownikowi przyjąć prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji i kształtowi, kamizelka pozwala na wykonywanie swobodnych ruchów kończynami górnymi, w miarę możliwości użytkownika.

Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika!

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

- 1) Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, to istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie - należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.
- 2) Użytkownik zsuwa się z siedziska, wówczas górny brzeg kamizelki obejmuje szyję użytkownika i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie - z kamizelką **ZAWSZE** należy stosować wyposażenie stabilizujące użytkownikowi miednicę tj. pas biodrowy.
- 3) Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę uciskają szyję użytkownika blokując tchawicę i utrudniając oddychanie. Może się tak zdarzyć, jeżeli ciało użytkownika zostało w niewłaściwy sposób zabezpieczone w foteliku/wózku - należy wówczas zastosować opcjonalne wyposażenie tych urządzeń i ustabilizować ciało użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie zawiera takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować ciała użytkownika należy wymienić to urządzenie na inne, posiadające taką funkcję.
- 4) Kamizelka jest zbyt ciasno dociągnięta do oparcia w wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać - w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę w taki sposób, aby pomiędzy kamizelką, a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć płasko wyprostowaną dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu ciała użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.





Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

- 1) Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji:
 - na środku siedziska,
 - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa użytkownika przylegał do oparcia.
- 2) Zabezpiecz miednicę użytkownika za pomocą np. pasa biodrowego.
- 3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy boczne ciała użytkownika, które mogą prowadzić do ucisku pasek kamizelki na szyję użytkownika.
- 4) Zabezpiecz kamizelkę:
 - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
 - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
 - zapnij pasy naramienne kamizelki,
 - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku.
- 5) Sprawdź pozycję użytkownika:
 - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
 - upewnij się, że możesz wsunąć płasko wyprostowaną dłoń między ciało użytkownika, a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki, należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Pozycja kamizelki **MUSI** zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka **MUSI** być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy użytkownika (np. za pomocą pasa biodrowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami tj. pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubekkowa i odchylane oparcie.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby cała stopa użytkownika miała stabilne podparcie. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.





- 4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływa na skuteczność pasów i podpór.
- 5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeżeli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku paszków kamizelki na szyję użytkownika.
- 6) Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
- 7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub wymiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
- 8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
- 9) Nie należy zostawiać użytkownika w urządzeniu bez opieki!
- 10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
- 11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami bezpiecznego stosowania kamizelki.

Dbanie o kamizelkę

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana jest w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- 1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
- 3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić jego wymianę na nowy.
- 5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost/utratę wagi.
- 6) Szelki kamizelki należy wyregulować tak, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
- 7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.





8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wózek **TATALU™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wózka **TATALU™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym doborze wózka oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami umieszczonymi w niniejszej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem wózka należy:

- sprawdzić wyrób pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wózka,
- upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należyście zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
- sprawdzić, czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.,
- sprawdzić sprawność hamulców,
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm,
- dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb użytkownika np. ustawienie podnóżka, regulacja zagłówka, pasów, kamizelki, ustawienie długości siedziska, czy oparcia itp.,
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane,
- zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wózka tj.: kamizelka, pasy 5-punktowe, pas biodrowy, pasy stabilizujące stopy, klin międzyudowy, zagłówek itp.. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m. in. przed wypadnięciem lub wysunięciem się z urządzenia. W przypadku występowania u użytkownika przykurczu przywiedzeniowego zalecane jest stosowanie pasów odwodzących uda w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn między kolanami (od strony przyśrodkowej).

2. Zabrania się użytkowania wózka, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
3. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wózku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
4. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.
5. Zabrania się pozostawiania wózka z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.
6. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.





7. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wózka zawsze powinno odbywać się przy aktywnych hamulcach.
8. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wózka użytkownik nie stawał na podnóżku.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wózka kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
10. Wózek należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wózek nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
11. Podczas transportu wózka bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wózka podczas transportu.
12. Przed użyciem wózka należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Zabrania się przewożenia użytkownika w wózku w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaniechać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie obciążenia zawieszone na rączce wózka mogą zaburzyć jego stabilność!

Nie należy przekraczać maksymalnej, dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 7 instrukcji.





9. WARUNKI GWARANCJI

- 1) **Akces-MED Sp. z o.o.** sprzedaje sprzęty sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- 2) Wózek **TATALU™** jest objęty **24 miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu zgodnie z kartą gwarancyjną.
- 3) Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że sprzęt jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację naprawy sprzętu wykonanej w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- 4) Producent określa czas użytkowania wyrobu na **48 miesięcy**. Po tym okresie użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonania przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- 5) W razie uszkodzenia sprzętu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy :
Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 70).

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wózek **TATALU™** będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wózka niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wózka:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tkaniny przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia.
4. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy opłukać przy użyciu letniej wody, osuszając ją później czystą ściereczką.
5. Tapicerki nie należy zamaczać!
6. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikami czy środkami żrącymi na bazie chloru.





9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wózka podczas korzystania z niego przez użytkownika.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych i plastikowych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczonego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnię płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.



Przed ponownym użyciem wózka, tapicerka zawsze musi być sucha!

Ze szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących firma Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń,
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo dokręcone, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koło,
- sprawdzić, czy konstrukcja wózka nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji,
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone,
- sprawdzić, czy paski pasów 5-punktowych, kamizelek, pasów tułowia, sandały stabilizujące stopy i stawy skokowe itp. nie są postrzępione, a sprzączki, rzepy i klamry działają prawidłowo.



Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).**





PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulec.	Sprawdzić: • unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, • czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, • czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególnie sprawdzić: • poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), • poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżki.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: • elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.





Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, sztybnosząca (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy osi, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może używać wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie **www.akces-med.com**, przy wybranym produkcie.






11. OZNACZENIA

11.1 SYMBOLE

	Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE
	Numer katalogowy
	Numer seryjny
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
	Uwaga!
	Wytwórca
	Data produkcji
	Wyrób nie zawiera lateksu
	Przechowywać w suchym miejscu
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających
	Chronić przed promieniami słonecznymi
	Ograniczenie temperatury przechowywania
	Wilgotność względna przechowywania
	Suszyć pionowo

	Nie chlorować
	Nie prasować
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Nie wybielać
	Nie chlorować
	Ostrożnie, delikatna zawartość
	Zakaz zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez
	Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
	Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami
	Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu
	Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie

11.2 PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA

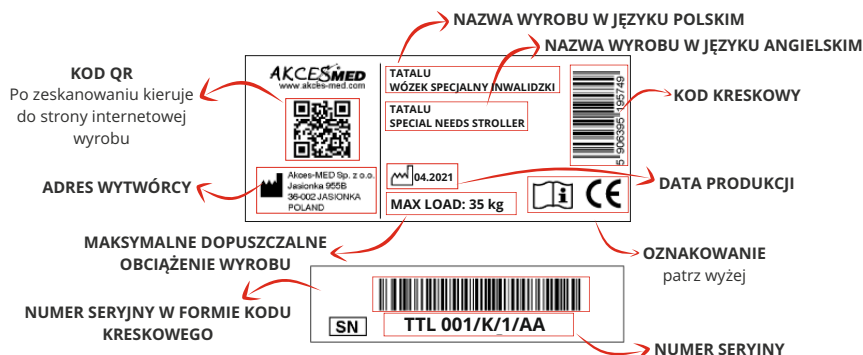


WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619



Autoryzowany Przedstawiciel



akces-med.com

Data wydania: 23.04.2021
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2021
© Sławomir Wroński 2021