



WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI **AURA**®



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.





Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **Akces-MED Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu.
System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

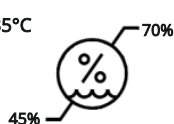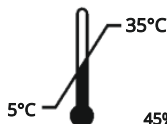

SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	5
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	5
3. Ogólna budowa wyrobu.....	6
3.1 Wyposażenie standardowe.....	6
3.2 Akcesoria.....	7
4. Tabele rozmiarowe.....	9
5. Opis obsługi wyrobu.....	10
5.1 Rozkładanie wyrobu.....	11
5.2 Składanie wyrobu.....	13
5.3 Oparcie z regulacją kąta pochylenia.....	14
5.4 Siedzisko z regulacją głębokości.....	15
5.5 Funkcja kubelkowa.....	16
5.6 Regulowane peloty piersiowe i biodrowe.....	16
5.7 Zagłówek HexagonPro™ / Regulowane stabilizatory głowy.....	17
5.8 Regulowane pasy 5-punktowe.....	18
5.9 Regulowany podnózek.....	21
5.9.1 Regulacja kąta pochylenia podnóżka.....	21
5.9.2 Regulacja wysokości i pochylenia płyty podnóżka.....	21
5.10 Hamulec centralny.....	22
5.11 Przednie koła skrętne.....	22
5.12 Koła tylne pełne.....	22
5.13 Tapicerka HYDRO™.....	23
6. Akcesoria.....	24
6.1 AUR_114 Kamizelka H / AUR_130 Kamizelka 4-punktowa.....	24
6.2 AUR_128 Regulowany klin międzyudowy.....	24
6.3 AUR_405 Daszek.....	25
6.4 AUR_444 Podłokietniki.....	26
6.5 AUR_607 Baza pokojowa HOME.....	27
7. Użytkowanie wyrobu.....	28
7.1 Przygotowanie użytkownika.....	28
7.2 Przygotowanie wyrobu.....	29
7.3 Instrukcja użytkowania kamizelek.....	30
8. Zasady bezpieczeństwa.....	33
9. Warunki gwarancji.....	35
10. Konserwacja i czyszczenie.....	35
11. Oznaczenia.....	39
11.1 Symbole.....	39
11.2 Przykładowa tabliczka znamionowa.....	39

WSTĘP

AURA® to wózek specjalny dedykowany dzieciom, których dysfunkcje ruchowe uniemożliwiają samodzielne poruszanie się. Posiada on wiele użytecznych rozwiązań, które ułatwiają opiekę nad użytkownikiem zapewniając mu bezpieczeństwo i komfort.

Regulacja wysokości oparcia, głębokości siedziska oraz długości podnóżka sprawiają, że wózek rośnie wraz z dzieckiem. Rozbudowany system pelot tułowia oraz bioder zapewnia właściwą stabilizację boczną. W połączeniu z 5-punktowymi pasami istotnie wpływa na utrzymanie poprawnej pozycji siedzącej. Oparcie wyposażone zostało w zagłówek, który można łatwo dopasować do kształtu głowy, zabezpieczając ją przed opadaniem na bok. Funkcja kubełkowa wraz z odchylanym oparciem i regulowanym kątem nachylenia podnóżka, łatwo i szybko zmienia wózek w leżankę. Pozwala to na zmianę pozycji z siedzącej na leżącą zależnie od aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia. Przekładane siedzisko umożliwia jazdę przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dziecko może eksplorować otoczenie podczas spacerów lub w razie potrzeby mieć bezpośredni kontakt wzrokowy z opiekunem, co zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa.

AURA® idealnie nadaje się na długie spacery. Koła pełne oraz amortyzatory tylne skutecznie tłumią drgania podczas jazdy. Centralny hamulec kół tylnych to bezpieczeństwo podczas postoju, jak i wkładania i wyjmowania dziecka z siedziska. Koła przednie wyposażone w system blokady kierunku jazdy, ułatwiają jazdę w trudniejszym terenie, np. po trawie, czy leśnych ścieżkach. Regulowana rączka do prowadzenia wózka pozwala na dopasowanie jej wysokości do wzrostu opiekuna. Konstrukcja wózka oraz demontowane koła, umożliwiają złożenie go do niewielkich rozmiarów, przez co zmieści się w niedużych bagażnikach. Całość wykonano z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują trwałość i niezawodność.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Znajdują się w niej informacje o produkcie oraz instrukcja, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

W przypadku jakichkolwiek pytań i uwag, prosimy o kontakt:

Konsultant medyczny: tel. kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik oraz osoby obsługujące wózek są zobowiązane do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.



1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania wózka przed użytkowaniem, użytkowania wózka, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących wózek.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **AURA®**, użytkownik (lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

2. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postacie;
- Przepuklinę oponowo - rdzeniową;
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów;
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów;
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA i inne);
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe);
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych;
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego;
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny użytkownika;
- Paraliż;
- Głęboka sedacja;
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa;
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich;
- Niestabilność hemodynamiczna;
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej;
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego;
- Zatorowość płucna;
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin;
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud;
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.









3. OGÓLNA BUDOWA WYROBU

3.1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ① Składany stelaż
- ② Ergonomiczny, regulowany uchwyt do prowadzenia wózka
- ③ Krótkie oparcie z regulacją kąta pochylenia + zagłówek HexagonPro™ + krótka tapicerka **lub**
długie oparcie z regulacją kąta pochylenia + regulowane stabilizatory głowy + długa tapicerka
- ④ 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- ⑤ Regulowane peloty biodrowe i piersiowe
- ⑥ Regulowany podnóżek z regulacją długości oraz kąta pochylenia
- ⑦ 5-punktowe paski stabilizujące stopy
- ⑧ Wypinane koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy
- ⑨ Wypinane koła tylne pełne z hamulcem centralnym
- ⑩ Tapicerka wodoodporna HYDRO™




3.2 AKCESORIA

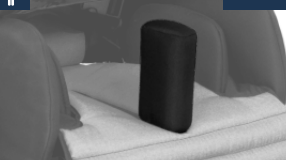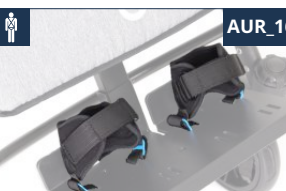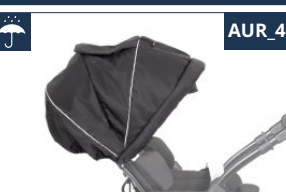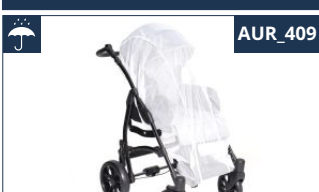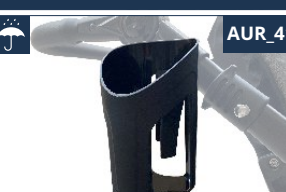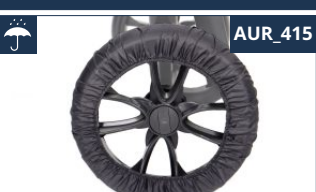 AUR_001 Światła LED	 AUR_013 Barierka	 AUR_102 Pas podtrzymujący głowę do zagłówka HexavonPro™ / VisoPro™
 AUR_114 Kamizelka H	 AUR_128 Regulowany klin międzyodowy	 AUR_130 Kamizelka 4-punktowa
 AUR_161 Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe	 AUR_162 Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22)	 AUR_168 Zagłówek VisoPro™
 AUR_403 Stolik	 AUR_405 Daszek	 AUR_408 Osłona przeciwdeszczowa
 AUR_409 Moskitiera	 AUR_411 Uchwyt na kubek	 AUR_415 Osłony na koła tylne

  AUR_442 Oslony na koła przednie	  AUR_444 Podłokietniki	  AUR_445 Śpiwór
  AUR_447 Mufki zimowe	  AUR_448 Stolik samopoziomujący	  AUR_452 Uchwyt na telefon
  AUR_501 Torba	  AUR_505 Kosz pod siedzisko	  AUR_506 Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego
  AUR_509 Organizer	  AUR_607 Baza pokojowa HOME	

4. TABELE ROZMIAROWE

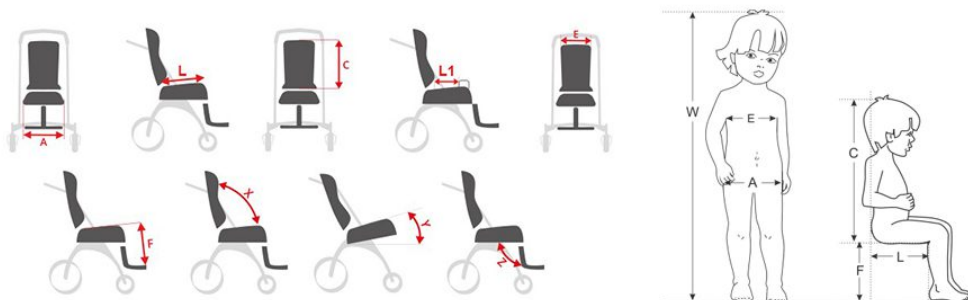

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	70 - 120	110 - 150
A	szerokość siedziska	[cm]	18 - 31	24 - 40
L	głębokość siedziska	[cm]	19 - 30	26 - 40
C	wysokość oparcia	[cm]	41 - 57	56 - 70
E	szerokość oparcia między pelotami piersiowymi	[cm]	19 - 26	22 - 30
F	długość podnóżka	[cm]	10 - 30	12 - 38
L ₁	głębokość siedziska do klina	[cm]	11 - 22	19 - 33
	długość stopki	[cm]	18	18
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	95 - 145	95 - 145
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	-30 - 25	-30 - 25
Z	kąt pochylenia podnóżka	[°]	100 - 155	100 - 155
	max. waga użytkownika	[kg]	35	50

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
szerokość	[cm]	60	70
długość	[cm]	104	105
wysokość	[cm]	80 - 120	80 - 125
szerokość po złożeniu	[cm]	60	70
długość po złożeniu	[cm]	91	93
wysokość po złożeniu	[cm]	50	60
waga	[kg]	20	24

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

UWAGA: W skrajnych położeniach uchwyty do prowadzenia wózka może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta pochylenia.

W takich przypadkach należy unieść uchwyt do prowadzenia wózka na czas regulacji kąta pochylenia oparcia.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

5. OPIS OBSŁUGI WYROBU

LEGENDA



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu.



Ikona informacyjna - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.



Ikona ostrzegawcza - pojawia się w instrukcji w momencie, kiedy należy zastosować szczególne środki ostrożności.

5.1 ROZKŁADANIE WYROBU



Podczas rozkładania wózka trzymaj użytkownika z dala od ruchomych części wózka, ponieważ istnieje poważne ryzyko powstania obrażeń.

Przed rozłożeniem wózka odbezpiecz blokadę przed rozłożeniem się wózka.







Po rozłożeniu ramy, zamontuj siedzisko wózka.

Przy prawidłowym zamontowaniu siedziska usłyszysz charakterystyczny "KLIK".





Siedzisko można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

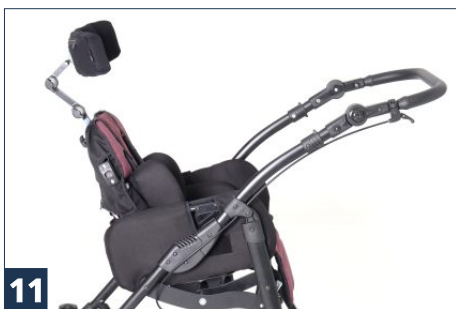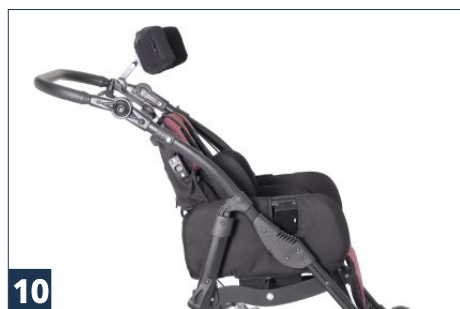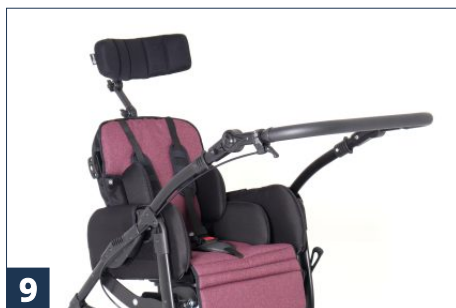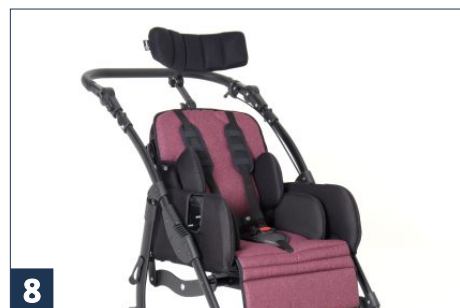


Przed rozpoczęciem użytkowania wózka upewnij się, że jest prawidłowo zamontowane, popychając je lekko do przodu i tyłu.


5.2 SKŁADANIE WYROBU




Przed złożeniem wózka należy zdemontować siedzisko.

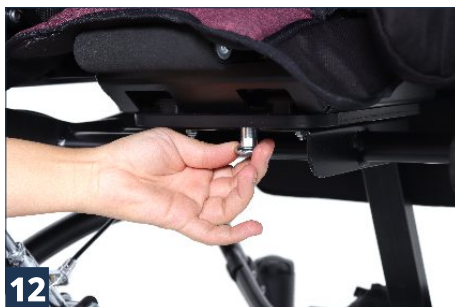

12

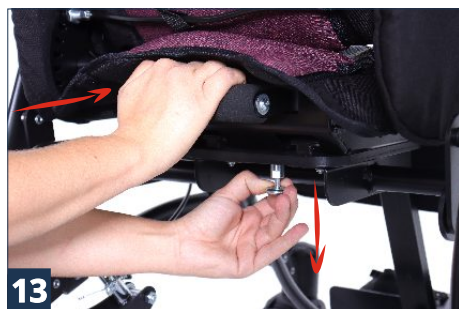

13

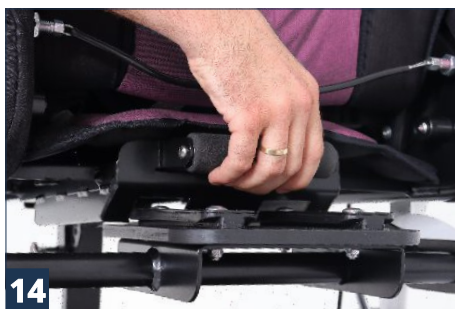

14



Zdemontuj koła przednie.

Jeżeli zachodzi konieczność demontażu kół tylnych, postępuj zgodnie z czynnościami wskazanymi na **str. 14, zdj. 17 - 18.**




15

PRESS



16

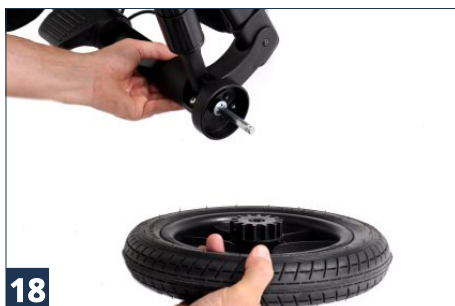


i

Po złożeniu wózka zabezpiecz go blokadą przed jego rozłożeniem się, znajdującą się na boku ramy wózka.

5.3 OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA



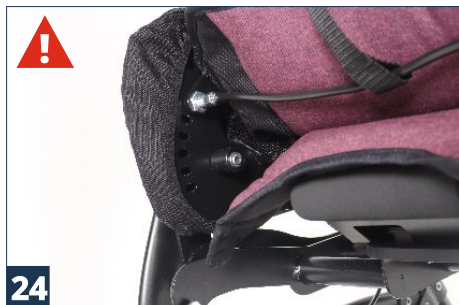

24



Należy upewnić się, że oparcie zostało zablokowane - trzpień powinny znajdować się w otworach po obu stronach wózka.

5.4 SIEDZISKO Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI



25



POTRZEBNE NARZĘDZIA

klucz imbusowy 3



Aby zmienić głębokość siedziska, należy odkręcić śruby pod siedziskiem oraz pokręćła pelot biodrowych po obu stronach siedziska.



Po ustawieniu żądanej głębokości należy dokręcić śruby i pokręćła pod siedziskiem wózka.

Podczas demontażu pelot biodrowych ważne, aby pozostawić długie blaszki mocujące na siedzisku oraz dokręcić śruby.



26




5.5 FUNKCJA KUBEŁKOWA




5.6 REGULOWANE PELOTY PIERSIOWE I BIODROWE



Peloty regulować można poprzez poluzowanie odpowiednich pokręteł za oparciem oraz pod siedziskiem wózka.



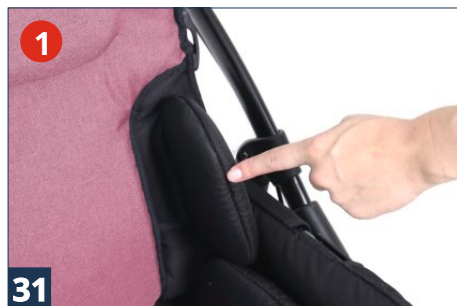


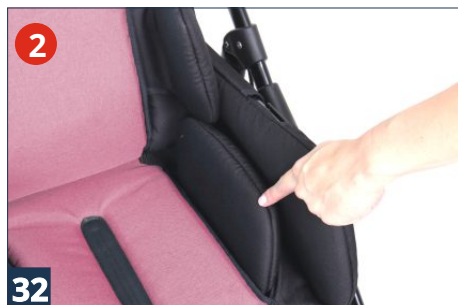


Podczas demontażu pelot biodrowych ważne, aby pozostawić w siedzisku długie płytki mocujące.


Uwaga! Odwrotne mocowanie pelot pozwala zmniejszyć minimalną szerokość między nimi.

5.7 ZAGŁÓWEK HEXAGONPRO™ / REGULOWANE STABILIZATORY GŁOWY


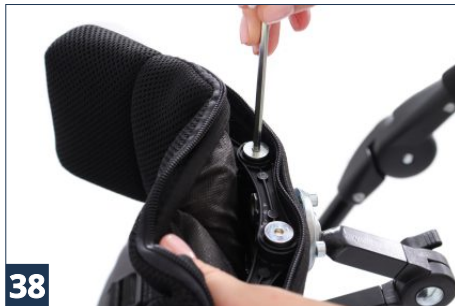
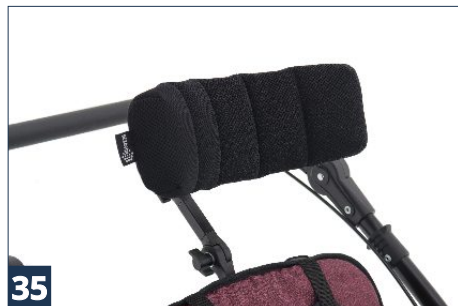
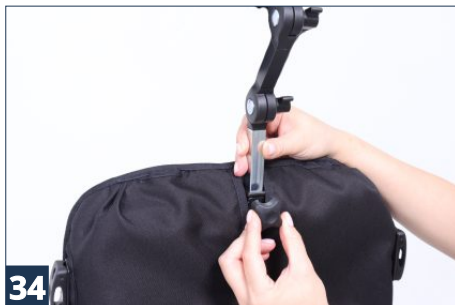


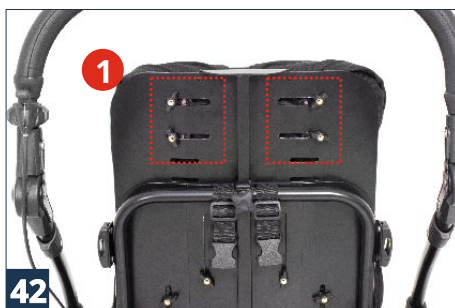


5.8 REGULOWANE PASY 5-PUNKTOWE

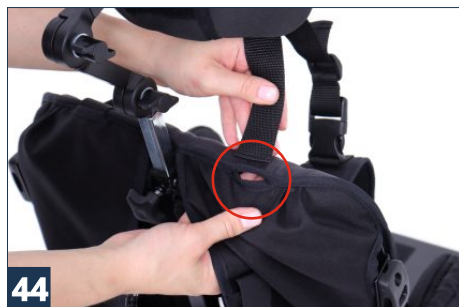



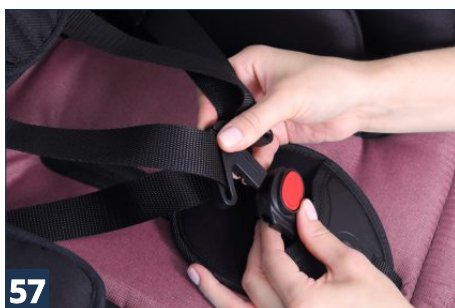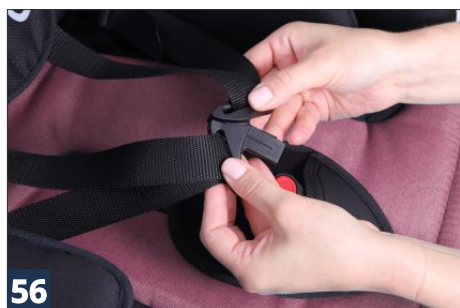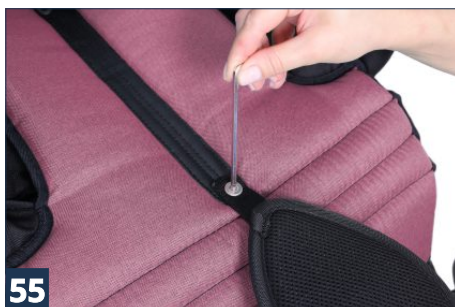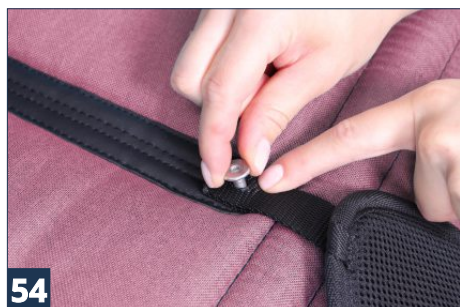

REGULOWANE PASY 5-PUNKOWE - DŁUGIE OPARCIE

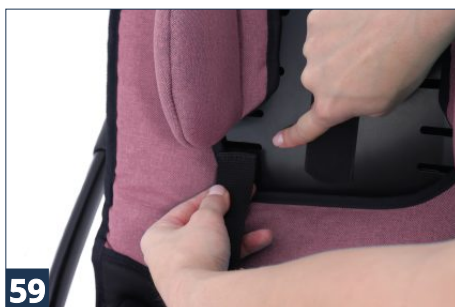

Montaż dolnych pasów - patrz **str. 19, zdj. 47 - 53.**

5.9 REGULOWANY PODNÓŻEK

5.9.1 REGULACJA KĄTA POCHYLENIA PODNÓŻKA




5.9.2 REGULACJA WYSOKOŚCI I POCHYLENIA PŁYTY PODNÓŻKA




Przez rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić poprawność mocowania.



5.10 HAMULEC CENTRALNY

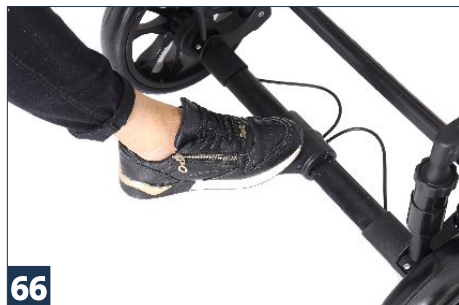

66

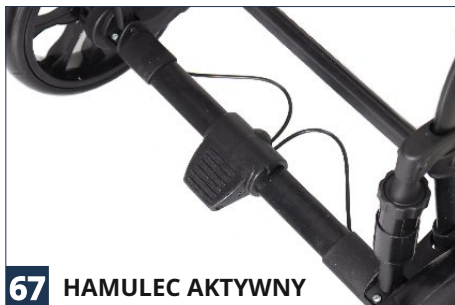

67

HAMULEC AKTYWNY

5.11 PRZEDNIE KOŁA SKRĘTNE



Demontaż kół przednich - patrz **str. 13, pkt. 5.2 Składanie wyrobu.**



- 1 Przekręcenie pokrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara - koła zablokowane.
- 2 Przekręcenie pokrętki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - koła odblokowane.



68

5.12 KOŁA TYLNE PEŁNE



Demontaż kół tylnych - patrz **str. 13, pkt. 5.2 Składanie wyrobu.**


5.13 TAPICERKA HYDRO™




69



70

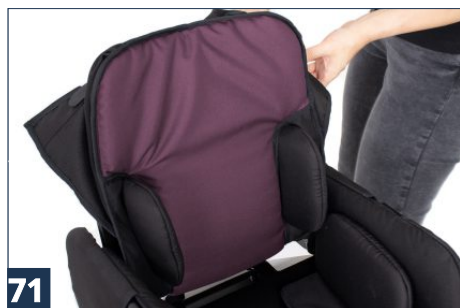


71

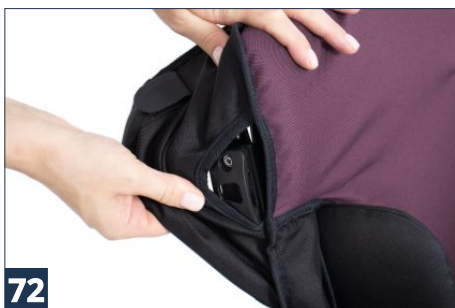

72




73

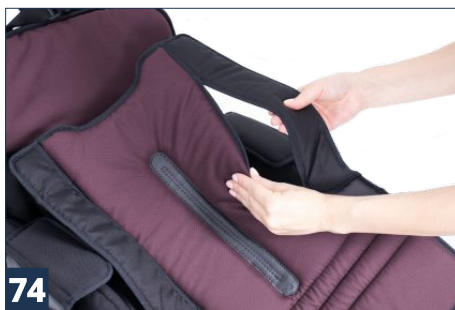

74



75

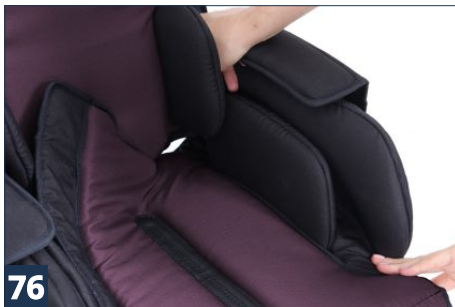

76

6. AKCESORIA

6.1 AUR_114 KAMIZELKA H / AUR_130 KAMIZELKA 4-PUNKTOWA



Podczas montażu kamizelki H oraz kamizelki 4-punktowej należy postępować zgodnie z instrukcją montażu pasów 5-punktowych - **patrz str. 18, pkt. 5.8 Regulowane pasy 5-punktowe.**




Przez rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić poprawność mocowania.

6.2 AUR_128 REGULOWANY KLIN MIĘDZYUDOWY



Siedzisko posiada dedykowane miejsca, które umożliwiają montaż klina międzyudowego.



Jeżeli istnieje konieczność montażu klina w miejscu przebiegania podłużnego otworu - konieczne jest użycie ostrego narzędzia w celu odślonienia frezu montażowego. Miejsca te można przygotować wyłącznie na elementach wskazanych na **zdj. 78.**

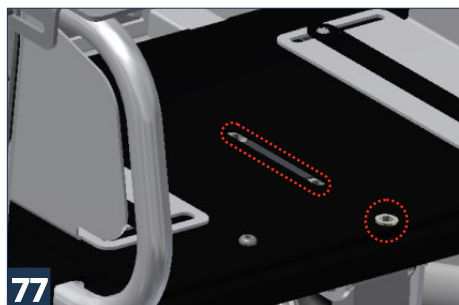



77






78

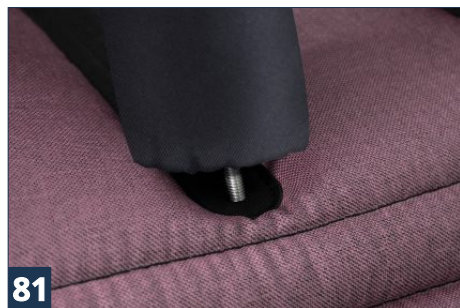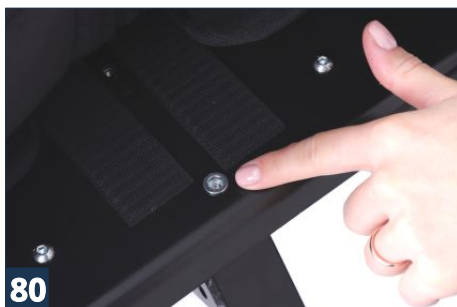

6.3 AUR_405 DASZEK

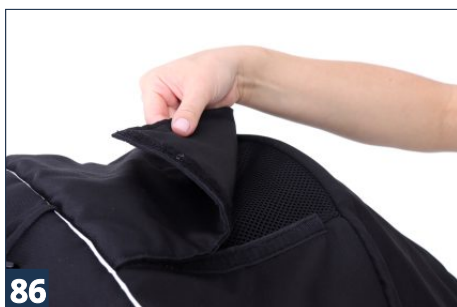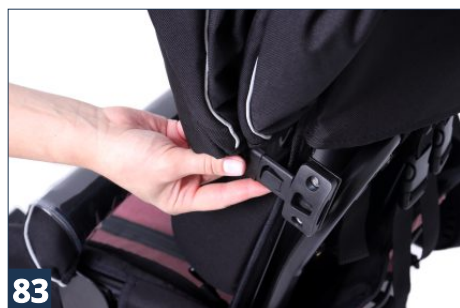

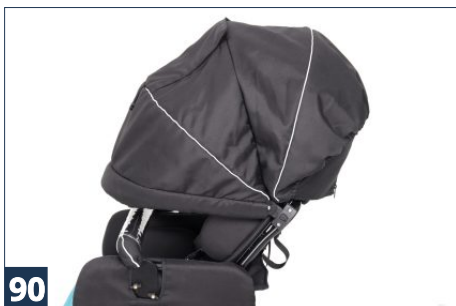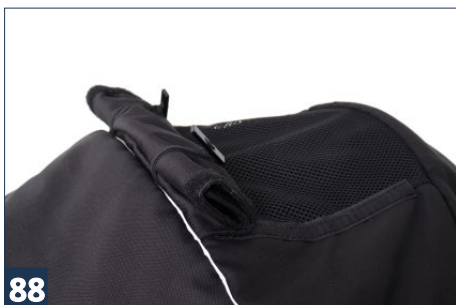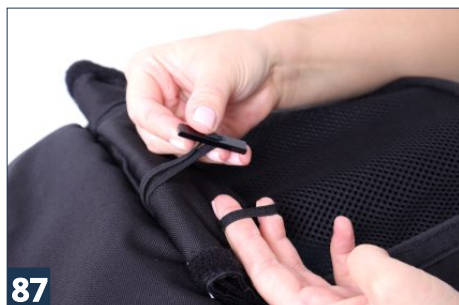

6.3 AUR_444 PODŁOKIETNIKI



Montaż podłokietników jest uniwersalny także dla stolika oraz barierki wózka.

6.4 AUR_607 BAZA POKOJOWA HOME



93



Zmianę bazy wózka należy poprzedzić demontażem siedziska poprzez pociągnięcie blokady (**zdj. 93**) i jednocześnie wysuwanie siedziska.




94



95



Siedzisko wózka należy ustawić przodem do kierunku jazdy.

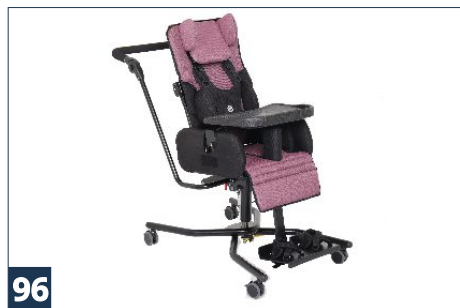

96



Podczas mocowania siedziska usłyszysz charakterystyczny "**KLIK**". Przed korzystaniem z wózka należy sprawdzić poprawność zamocowania siedziska poprzez pchnięcie lub pociągnięcie siedziska na bazie.

7. UŻYTKOWANIE WYROBU



Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **AURA®** należy zapoznać i stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.

Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

7.1 PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.



Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!

7.2 PRZYGOTOWANIE WYROBU

1. Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania należy:

- rozłożyć wózek,
- ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wózka, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury,
- upewnić się, że wszystkie części wózka są sprawne, należycie zamocowane i stabilne,
- aktywować hamulce,
- dopasować urządzenie do wymiarów użytkownika,
- odpiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, aby swobodnie umieścić użytkownika w wózku,
- zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika (jeżeli występują),
- ustawić klin międzyudowy (jeżeli występuje),
- zamontować stolik (jeżeli występuje).

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.



Podczas pokonywania przeszkód (progi, krawężniki itp.) należy unieść przednie koła poprzez naciśnięcie ręczki do dołu, umieścić je na stopniu, a następnie umieścić na nim koła tylne poprzez podniesienie tylnej części wózka za ręczkę w górę. Należy uważać, aby nie przechylić wózka zbyt do tyłu!

Podczas pokonywania wzniesień lub pojazdów zawsze należy ustawić wózek przodem do kierunku jazdy.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

Wózek będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowany do wymiarów i potrzeb użytkownika. Główną zasadą przy dopasowywaniu wózka jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować jego dyskomfort.

Nieumiejętne korzystanie z wózka może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.

7.3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KAMIZELEK



Kamizelka zapewni wsparcie postawy u osób siedzących na wózkach inwalidzkich, fotelikach lub innych siedzących rehabilitacyjnych.

Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala utrzymać prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji kamizelka nie ogranicza możliwości swobodnych ruchów kończyn górnych.

Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika!

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

- 1) **Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie** - należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.
- 2) **Użytkownik zsuwa się z siedziska, górny brzeg kamizelki obejmuje jego szyję i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie** - z kamizelką **ZAWSZE** należy stosować wyposażenie stabilizujące miednicę takie jak np. pas biodrowy, aby zapobiec zsuwaniu się z wózka.
- 3) **Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę będą uciskać szyję użytkownika utrudniając oddychanie w przypadku, gdy użytkownik został w niewłaściwy sposób zabezpieczony w wózku** - należy wówczas dodatkowo ustabilizować tułów użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować tułowia, należy wymienić je na urządzenie posiadające taką funkcję.
- 4) **Kamizelka jest zbyt mocno dociągnięta do oparcia, wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać** - w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę, aby pomiędzy kamizelką, a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.

Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

- 1) Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji:
 - na środku siedziska,
 - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa przylegał do oparcia.
- 2) Zabezpiecz miednicę użytkownika za pomocą np. pasa biodrowego.
- 3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy opadania tułowia na bok, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję.
- 4) Zamontuj i dopasuj kamizelkę:
 - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był okolicach podbrzusza użytkownika. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
 - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
 - zapnij pasy naramienne kamizelki,
 - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- 5) Sprawdź pozycję użytkownika:
 - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
 - upewnij się, że możesz wsunąć dłoń między ciało użytkownika, a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Pozycja kamizelki **MUSI** bezwzględnie zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka **MUSI** być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy użytkownika (np. za pomocą pasa biodrowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubekowa i odchylane oparcie.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby całe stopy użytkownika miały stabilne podparcie. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.
- 4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubekowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!

- 5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeśli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję użytkownika.
- 6) Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
- 7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub wymiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
- 8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
- 9) Nie należy zostawiać użytkownika w urządzeniu bez opieki!
- 10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
- 11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami jej bezpiecznego stosowania.

Dbanie o kamizelkę

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana jest w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- 1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
- 3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić jego wymianę na nowy.
- 5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost/utratę wagi.
- 6) Szelki kamizelki należy tak wyregulować, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
- 7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wózek **AURA®** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
Przed każdym użyciem należy przygotować podopiecznego i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wózka **AURA®** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym doborze wózka.

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1) Przed każdorazowym użyciem wózka należy:

- sprawdzić wózek pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wózka,
- upewnić się, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane, a wózek nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
- sprawdzić, czy nie zostały poluzowane śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.,
- sprawdzić stan tapicerki, czy nie posiada śladów uszkodzenia,
- sprawdzić sprawność hamulców,
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek,
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm,
- dopasować wózek do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie oparcia, siedziska, zagłówka, 5-punktowych pasów bezpieczeństwa, klina (jeśli dotyczy),
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień wózka są stabilne i zablokowane,
- zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wózka. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m. in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia,
- w przypadku występowania u użytkownika nadmiernego napięcia w obrębie przywodzicieli kończyn dolnych zalecane jest stosowanie wybranych pasów odprowadzających udę w celu zapobiegania powstawaniu odcisnięć i/lub odleżyn w okolicy stawów kolanowych od strony przyśrodkowej.

2. Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.

3. Zabrania się użytkowania wózka, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.

4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wózku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.

5. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.

6. Zabrania się pozostawiania wózka z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.

7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.

8. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wózka zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wózka użytkownik nie stawał na podnóżku.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wózka kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Wózek należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wózek nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu wózka bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wózka podczas transportu.
13. Przed użyciem wózka należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.



Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Zabrania się przewożenia użytkownika w wózku w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie obciążenia zawieszone na rączce wózka mogą zaburzyć jego stabilność!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 9 instrukcji.

9. WARUNKI GWARANCJI

- Akces-MED Sp. z o.o. sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Wózek **AURA®** jest objęty **24-miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że wózek jest przedmiotem refundacji. W takim przypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację na naprawę wózka w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- Producent określa czas użytkowania wózka na **48 miesięcy**. Po tym okresie użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia wózka należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** (tel. +48 17 864 04 73).

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wózek **AURA®** będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wózka są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wózka:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
4. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
5. Tapicerki nie należy zamaczać!
6. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tapicerki przed kolejnym czyszczeniem.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.

9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wózka podczas korzystania z niego przez użytkownika.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczonego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnię płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.



Przed ponownym użyciem wózka, tapicerka zawsze musi być sucha!
**Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących
 wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności!**

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń,
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo dokręcone, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koło,
- sprawdzić, czy konstrukcja wózka nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji,
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone,
- sprawdzić, czy paski kamizelki, pasów tułowia, stabilizacji stóp itp. nie są postrzępione, a sprzączki, rzepy i klamry działają prawidłowo,
- sprawdzić, czy tapicerka techniczna nie posiada oznak zniszczenia oraz czy jest poprawnie zapięta.



Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).**



PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: - cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, - czy wyrób jest kompletny, - czy wszystkie śruby, wkręty, pokręta, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulce.	Sprawdzić: - unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, - czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, - czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególnie sprawdzić: - poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), - poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), - poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), - czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, - poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzysiodłowy, podłokietniki, podnóżki.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: - elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, - czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, - czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, sztybnokółca (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy osi, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: oznaczenia i etykiety wyrobu pod kątem ich czytelności.	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może używać wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie
www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.

11. OZNACZENIA

11.1 SYMBOLE

	Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE		Nie chlorować
	Numer katalogowy		Nie prasować
	Numer seryjny		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi		Nie wybielać
	Uwaga!		Ostrożnie, delikatna zawartość
	Wytwórca		Zakaz zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez
	Data produkcji		Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
	Wyrób nie zawiera lateksu		Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.
	Przechowywać w suchym miejscu		Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu.
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających		Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.
	Chronić przed promieniami słonecznymi		
	Ograniczenie temperatury przechowywania		
	Wilgotność względna przechowywania		
	Suszyć pionowo		

11.2 PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA

KOD QR
Po zeskanowaniu kieruje do strony internetowej wyrobu

ADRES WYTWÓRCY
AKCES-MED Sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
POLAND

DATA PRODUKCJI
12.2021

NUMER SERYJNY W FORMIE KODU KRESKOWEGO
SN AUR 024/P/4/AF

NAZWA WYROBU W JĘZYKU POLSKIM
AURA 1
WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI

NAZWA WYROBU W JĘZYKU ANGIELSKIM
AURA 1
SPECIAL NEEDS STROLLER

KOD KRESKOWY WYROBU
506395 195661

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WYROBU
MAX LOAD: 35 kg

OZNAKOWANIE
patrz wyżej

NUMER SERYJNY




WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619



Autoryzowany Przedstawiciel



akces-med.com

Data wydania: 14.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2022
© Sławomir Wroński 2022