



INSTRUKCJA MONTAŻU AKCESORIÓW FLEXPPOINT®
JORDI, JORDI HOME





System **FlexPoint®** składa się z wielu elementów, pozwalających na poprawną i bezpieczną stabilizację tułowia, miednicy oraz kończyn dolnych. Dzięki uniwersalnym sposobom mocowania, doskonale sprawdza się w zdecydowanej większości wózków i fotelików oferowanych na rynku wyrobów medycznych. Wybrane produkty systemu **FlexPoint®** posiadają dodatkowe elementy pozwalające na łatwiejsze zapięcie pasów osobom z dysfunkcjami dłoni.

W zależności od indywidualnych potrzeb, użytkownik może wybrać rozwiązanie klasyczne lub zaawansowany produkt dynamiczny.

FlexPoint® jest systemem rekomendowanym szczególnie dla osób ze spastycznością. Dynamiczna konstrukcja wyrobów oparta jest na miękkich, sprężystych i rozciągliwych elementach odcciążających. Gwarantuje to najwyższy komfort użytkowania. Jednocześnie znacznie redukuje ryzyko uszkodzenia ciała m.in. poprzez nadmierny ucisk ze strony np. pasów nieelastycznych.

Poprawna pozycja siedząca wspomagana systemem **FlexPoint®** to bezpieczeństwo i komfort w czasie pracy, terapii i zabawy przez cały dzień.

Dlaczego FlexPoint®?



Uniwersalność

Poszczególne elementy mogą być z powodzeniem stosowane w wózkach inwalidzkich i innych siedzących używanych przez użytkowników.



Dynamika pionowa

Sprężysty materiał efektywniej rozkłada nacisk niż standardowe rozwiązania stabilizacji użytkownika.



Dynamika pozioma

Wyroby z tą funkcją są dedykowane dla osób ze zwiększonym napięciem mięśniowym. Znacznie redukują ilość i siłę napadów spastyki oraz podnoszą komfort użytkowania.



System Chwyc i Pociągnij™

Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D ułatwia użytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest także dla osób z dysfunkcjami dłoni.



Przyjazdy dla skóry

Zastosowane materiały nie wywołują podrażnień i są bezpieczne dla użytkownika.



Przed montażem wyrobu FlexPoint® należy zapoznać się z instrukcją obsługi „System Dynamicznej Stabilizacji Pacjenta FlexPoint®”!



FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA


FP-01/WZ KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM
FP-01/WB KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA
FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM
FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA



FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H



FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

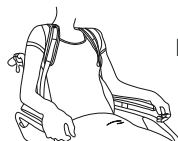

FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TUŁOWIA

MIEJSCA MONTAŻOWE:





MONTAŻ GÓRNYCH PASÓW KAMIZELEK:

i Odpiąć klamry znajdujące się na górnych pasach kamizelki, zdemontować trójkąty pozostawiając regulatory.




i Do montażu pasów górnych kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **A**, wskazane na str. 4 instrukcji.






MONTAŻ DOLNYCH PASÓW KAMIZELEK:

- i** Do montażu dolnych pasów kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **B**, wskazane na str. 4 instrukcji.
Przed przystąpieniem do montażu pasów należy uprzednio zdjąć trójkąty montażowe znajdujące się na ich końcach pozostawiając regulatory.

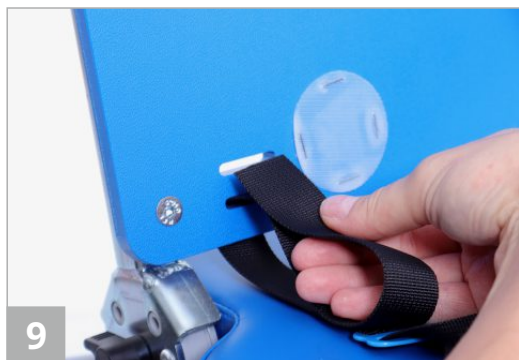

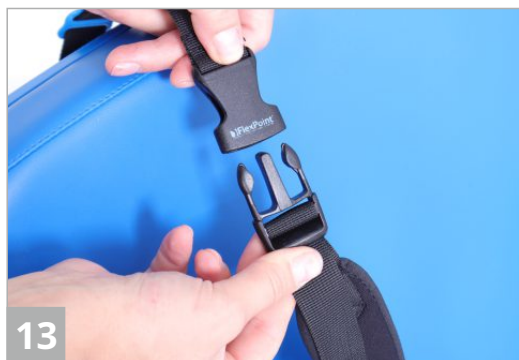



FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA

i Montaż dynamicznego 2-punktowego pasa tułowia możliwy jest wyłącznie w przypadku pasa zakończonych klamrą.

Montaż dynamicznego 2-punktowego pasa tułowia możliwy jest wyłącznie obwodowo, za oparciem fotelika.

MIEJSCA MONTAŻOWE:







**FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY
I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**




**FP-11 4-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY
I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**

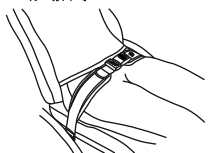

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

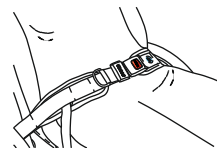

FP-13 4-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY


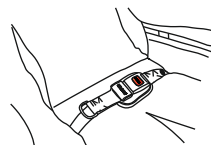


FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY



FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

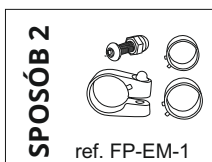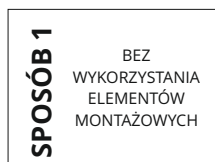



MIEJSCA MONTAŻOWE:



MONTAŻ PASÓW GŁÓWNYCH:

1 SPOSÓB - bez wykorzystania elementów montażowych

SPOSÓB MONTAŻU ZALECANY DLA WYROBÓW W ROZMIARACH:



FP-10 XS, S, M

FP-12 XS, S, M

FP-14 S, M

i Do montażu pasów należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **D**.

Przed montażem pasów zdemontować trójkąty montażowe pozostawiając regulatory.

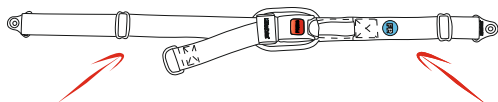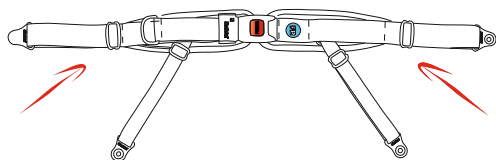



19



20

2 SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów montażowych FP-EM-1

SPOSÓB MONTAŻU ZALECANY DLA WYROBÓW W ROZMIARACH:

FP-10 L, XL

FP-12 L, XL

FP-14 L



Do montażu pasów należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **D**, wskazane na str. **10** instrukcji.



21



22



23



24








MONTAŻ PASÓW DODATKOWYCH:

2 SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów montażowych FP-EM-1

i Do montażu pasów należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **E**, wskazane na str. 10 instrukcji.

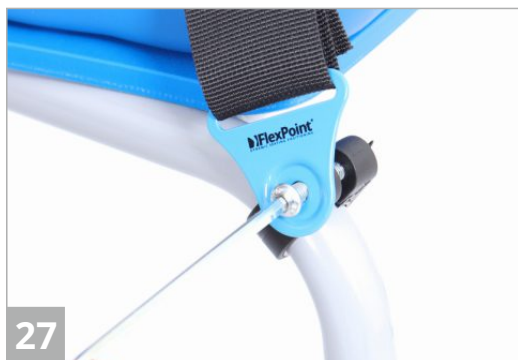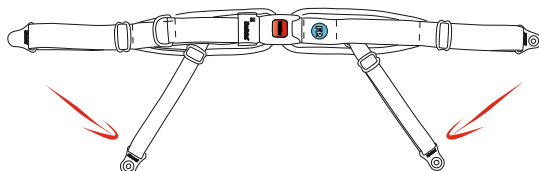

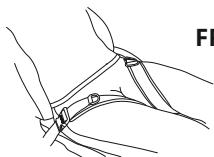


FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA

MIEJSCA MONTAŻOWE:



POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

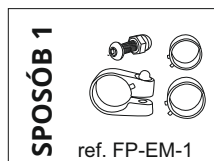


i

MONTAŻ PASÓW TYLNYCH

Przed montażem pasów odwodzących uda należy zdemontować trójkątę montażowe. Do montażu pasów tylnych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem **D**.

Podczas montażu pasów tylnych należy postępować zgodnie z instrukcją montażu pasów głównych stabilizacji miednicy (**patrz pkt. Montaż pasów głównych, str. 10**).

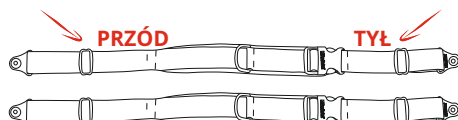




i

MONTAŻ PASÓW PRZEDNICH

Do montażu pasów przednich należy wykorzystać system montażowy FP-EM-1 oraz miejsce oznaczone symbolem **E**, wskazane na str. 13 instrukcji.



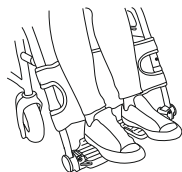

FP-21 DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI

FP-21/I - DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI SZEROKI

FP-21/II - DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI WĄSKI

MIEJSCA MONTAŻOWE:



i Montaż pasa łydkowego z funkcją wentylacji - szerokiego oraz wąskiego - należy montować w miejscu oznaczonym symbolem **F**.




35



36

i Dynamiczny pas łydkowy z funkcją wentylacji można wykorzystać zarówno do ograniczenia zgięcia w stawach kolanowych (montaż pod podudziami), jak i ograniczenia wyprostu (montaż ograniczający podudzia od przodu).

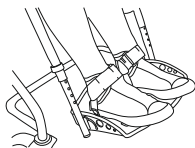

FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK


PODNÓŻEK DO FOTELIKA JORDI DOSTĘPNY W AKCESORIACH



i

Do montażu dynamicznych stabilizatorów kostek należy wykorzystać miejsce montażowe oznaczone symbolem **G**.



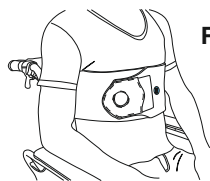

FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY



i

Uniwersalny pas stabilizujący można dowolnie przycinać na długość.

Pas montować można obwodowo w dowolnym miejscu za oparciem, pod siedziskiem czy wokół podudzi.

Istnieje możliwość dodatkowego przedłużenia pasa - przedłużacz **FP-A-1** - dostępny w ofercie systemu **FlexPoint**[®].

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

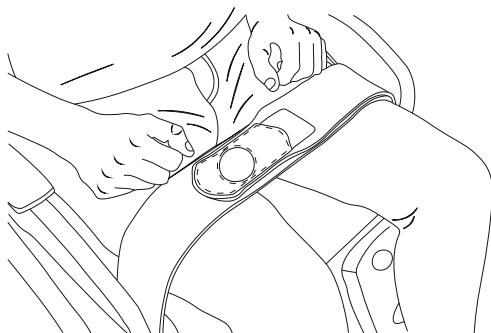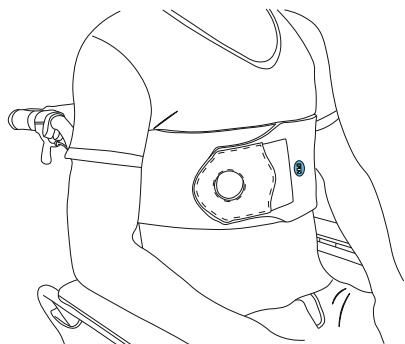



flex-point.pl