

DOMINATOR™

Wózek specjalny inwalidzki



DOMINATOR™



DOMINATOR EVO™

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opis produktu **DOMINATOR™**

Wózek specjalny **DOMINATOR™** powstał z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Zaawansowany system zabezpieczeń i regulacji sprawia, że z powodzeniem może być stosowany zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Doskonale sprawdzi się w domu użytkownika jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych lub podczas spacerów w plenerze. Stabilna konstrukcja wraz z system pelot piersiowych i biodrowych oraz pasów bezpieczeństwa sprawia, że użytkownik czuje się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie.

Regulacje wysokości oparcia, głębokości siedziska oraz długości podnóżków sprawiają, że wózek rośnie wraz z użytkownikiem, umożliwiając jego dopasowanie zależnie od budowy anatomicznej.

DOMINATOR™ posiada cztery duże koła dzięki czemu polecany jest do jazdy w trudnym terenie. Tam gdzie chodniki są nierówne, a krawężniki wysokie. **DOMINATOR™** jest szczególnie rekomendowany osobom, u których dysfunkcje narządu ruchu wymagają wysokiego poziomu wsparcia i komfortu i bezpieczeństwa w trakcie wielogodzinnego użytkowania wózka. Zarówno dla osób z obniżonym jak i podwyższonym napięciem mięśniowym. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.

Wózek został wykonany z trwałych i wytrzymałych materiałów, które pozwolą korzystać z niego przez wiele lat.

Dostępny w 2 Rozmiarach.

Wskazania do stosowania

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.



Szczególne zalety



Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



Elementy odbłaskowe

Wyrób posiada elementy odbłaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.



Niska waga

Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów.



Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.




Wyposażenie standardowe



+ Plecak Voyager



Istotne pomiary

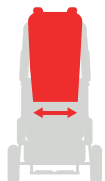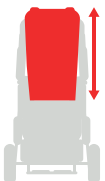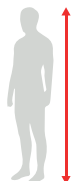Rozmiary	 Szerokość siedziska	 Głębokość siedziska	 Szerokość oparcia	 Wysokość oparcia z zagłówkiem	 Wysokość oparcia	 Kąt pochylenia siedziska	 Długość podnóżka	 Orientacyjny wzrost użytkownika*	 Max. Waga użytkownika
Rozmiar 2	24 - 40 cm	42 - 48 cm	20 - 35 cm	70 - 82 cm	82 cm	90 - 130°	37 - 45 cm	< 180 cm	75 kg
Rozmiar 3	30 - 46 cm	42 - 48 cm	24 - 40 cm	72 - 80 cm	82 cm	90 - 130°	37 - 45 cm	< 180 cm	90 kg

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar	Szerokość	Szerokość po złożeniu	Długość	Długość po złożeniu	Wysokość	Wysokość po złożeniu	Waga
Rozmiar 2	67 cm	67 cm	160 cm	125 cm	125 cm	58 cm	35 kg
Rozmiar 3	76 cm	76 cm	160 cm	125 cm	126 cm	58 cm	37 kg



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć pełną tabelę.

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Opis produktu **DOMINATOR EVO™**

Wózek specjalny **DOMINATOR EVO™** powstał z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Zaawansowany system zabezpieczeń i regulacji sprawia, że z powodzeniem może być stosowany zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Doskonale sprawdzi się w domu użytkownika jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych lub podczas spacerów w plenerze. Stabilna konstrukcja wraz z system pelot piersiowych i biodrowych oraz pasów bezpieczeństwa sprawia, że użytkownik czuje się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie.

Regulacje wysokości oparcia, głębokości siedziska oraz długości podnóżków sprawiają, że wózek rośnie wraz z użytkownikiem, umożliwiając jego dopasowanie zależnie od budowy anatomicznej.

DOMINATOR EVO™ jest szczególnie rekomendowany osobom, u których dysfunkcje narządu ruchu wymagają wysokiego poziomu wsparcia i komfortu i bezpieczeństwa w trakcie wielogodzinnego użytkowania wózka. Zarówno dla osób z obniżonym jak i podwyższonym napięciem mięśniowym. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.

Skrętne koła przednie **DOMINATORa EVO™** ułatwiają manewrowanie i w istotny sposób poprawiają komfort jazdy. Posiadają blokadę kierunku jazdy, umożliwiającą ich ustawienie do jazdy na wprost.

Wózek został wykonany z trwałych i wytrzymałych materiałów, które pozwolą korzystać z niego przez wiele lat.

Dostępny w 2 rozmiarach.

Wskazania do stosowania

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.



Szczególne zalety



Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



Elementy odbłaskowe

Wyrób posiada elementy odbłaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.



Niska waga

Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów.



Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.




Wyposażenie standardowe



+ Plecak Voyager



Istotne pomiary

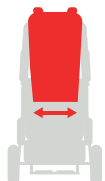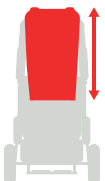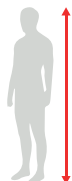Rozmiary	 Szerokość siedziska	 Głębokość siedziska	 Szerokość oparcia	 Wysokość oparcia z zagłówkiem	 Wysokość oparcia	 Kąt pochylenia siedziska	 Długość podnóżka	 Orientacyjny wzrost użytkownika*	 Max. Waga użytkownika
Rozmiar 2	24 - 40 cm	42 - 48 cm	20 - 35 cm	70 - 82 cm	82 cm	90 - 130°	37 - 45 cm	< 180 cm	75 kg
Rozmiar 3	30 - 46 cm	42 - 48 cm	24 - 40 cm	72 - 80 cm	82 cm	90 - 130°	37 - 45 cm	< 180 cm	90 kg

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar	Szerokość	Szerokość po złożeniu	Długość	Długość po złożeniu	Wysokość	Wysokość po złożeniu	Waga
Rozmiar 2	67 cm	67 cm	165 cm	125 cm	123 cm	58 cm	35 kg
Rozmiar 3	73 cm	73 cm	165 cm	125 cm	123 cm	58 cm	36 kg



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć pełną tabelę.

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Prosta i zrozumiała regulacja

Specjalnie zaprojektowana płyta oparcia z oznaczeniami i regulatorami pozwala na odpowiednie dopasowanie wózka do użytkownika bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Descriptiony i piktogramy znajdujące się na płycie informują o sposobie regulacji konkretnego elementu wyposażenia.



Funkcja kubełkowa

Wózek posiada możliwość płynnej zmiany kąta pochylenia siedziska wraz z oparciem. Taka zmiana pozycji ma duże znaczenie dla lepszego rozkładu nacisku na wrażliwe miejsca w profilaktyce przeciwoleżynowej.

Kompaktowe rozmiary

Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.






Pochylenie oparcia

Błyskawiczna regulacja oparcia - wystarczy jeden ruch, aby dopasować je do indywidualnych potrzeb użytkownika.


Gotowy do jazdy

Komfort i pewność w prowadzeniu wózka zapewniają amortyzowane koła tylne, które wyposażone są w hamulce bębnowe.

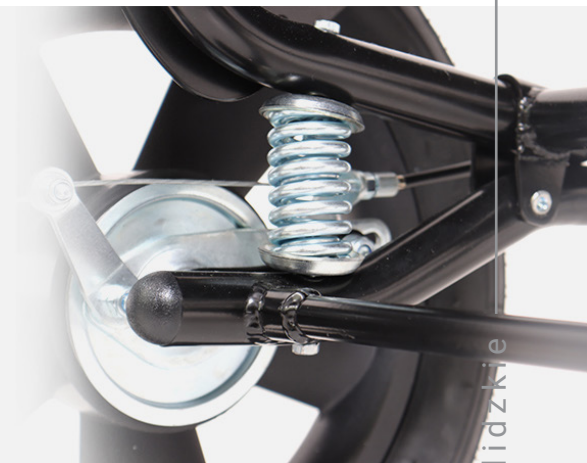


Zadbaliśmy o każdy detal


Dominator posiada liczne elementy odblaskowe które wpływają na bezpieczeństwo podczas spacerów o każdej porze dnia.

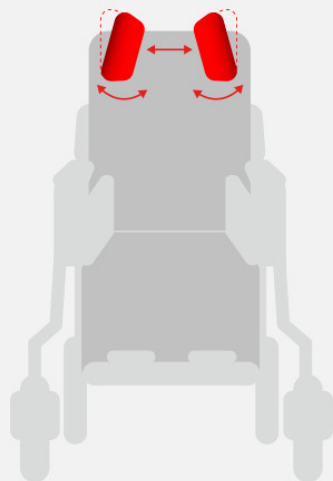


Niezależna regulacja pelot głowy

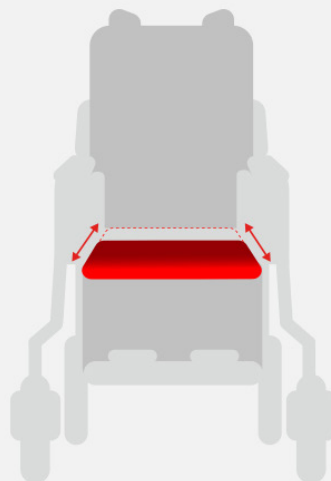


Regulacja głębokości siedziska

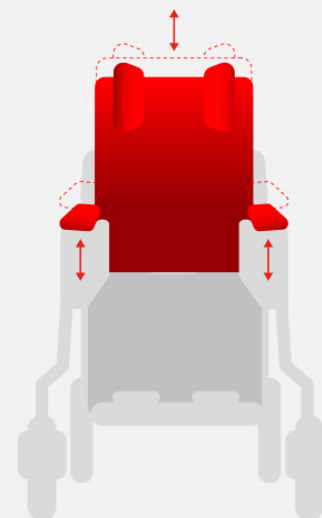

Regulacja długości oparcia
i wysokości podłokietników

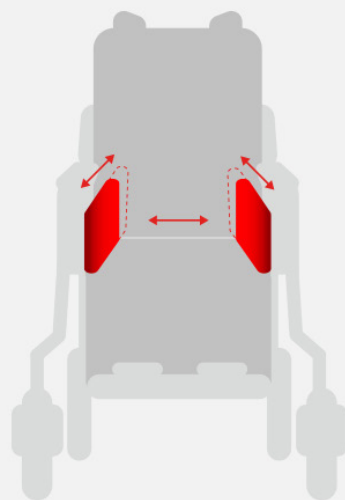

Niezależna regulacja pelot
biodrowych

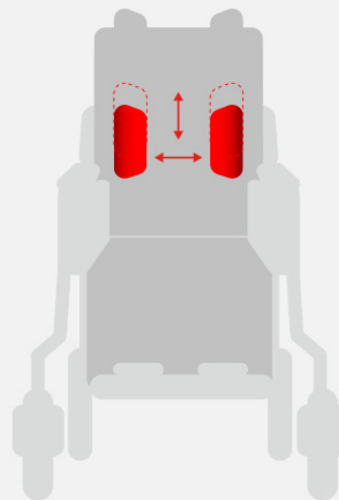

Niezależna regulacja pelot
piersiowych