

GLOXI™

Wózek specjalny inwalidzki



www.akces-med.com

Instrukcja obsługi



⚠ UWAGA!

Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.




Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma Akces-MED Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu.

System certyfikowany przez SGS.

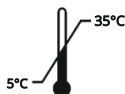

Spis treści

Wstęp.....	4
1. Przeznaczenie instrukcji.....	5
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	5
3. Ogólna budowa wyrobu.....	7
4. Tabela rozmiarowa.....	8
5. Opis obsługi wyrobu.....	9
5.1 Rozkładanie wyrobu.....	9
5.2 Składanie wyrobu.....	10
5.3 Oparcie z regulacją kąta pochylenia.....	12
5.4 Siedzisko z regulacją głębokości.....	13
5.5 Regulowany podnózek.....	13
5.6 Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka.....	15
5.7 Zagłówek.....	15
5.8 Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów.....	16
5.9 Regulowany klin międzyudowy.....	20
5.10 Barijerka.....	21
5.11 2-punktowe paski stabilizujące stopy.....	22
5.12 Hamulec centralny.....	22
5.13 Koła.....	23
5.14 Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami.....	25
6. Użytkowanie wyrobu.....	26
6.1 Przygotowanie użytkownika.....	26
6.2 Przygotowanie wyrobu.....	26
6.3 Przyjęcie pozycji siedzącej.....	27
6.4 Instrukcja użytkowania kamizelek.....	28
7. Zasady bezpieczeństwa.....	31
8. Warunki gwarancji.....	33
9. Konserwacja i czyszczenie.....	33
10. Oznakowanie.....	37

Wstęp

Wózek specjalny inwalidzki GLOXI™ to rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu i wsparcia dla użytkowników z ograniczoną mobilnością. Wózek poprzez szereg regulowanych elementów, można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Główne cechy wózka GLOXI™:

- regulowany kąt pochylenia oparcia - pozwala na zmianę pozycji siedzącej na bardziej leżącą, wspomagając odciążenie kręgosłupa redukując punkty nacisku,
- regulowana głębokość siedziska - zapewnia podparcie ud, stabilność oraz komfort podczas dłuższego użytkowania,
- zagłówek - wsparcie dla głowy i szyi,
- 5-punktowe pasy stabilizujące tułów - zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilizację tułowia, redukując ryzyko przesunięć i pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy,
- klin międzyudowy - zapobiega przesuwaniu się użytkownika do przodu w siedzisku oraz wspiera prawidłowe ułożenie nóg,
- wytrzymała i składana konstrukcja ułatwia transport i manewrowanie, zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

Dzięki swoim funkcjom wózek ten zapewnia wsparcie użytkownika w codziennych czynnościach zapewniając mu komfort i pełną funkcjonalność.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdują się w niej informacje o produkcie oraz instrukcja jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny: tel. kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. Przeznaczenie instrukcji

UWAGA!

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania wyrobu przed użytkowaniem, użytkowania wyrobu, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących wyrob.

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik (lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postacie,
- uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA i inne),
- przepuklinę oponowo - rdzeniową,
- choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe). Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- choroby wyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- po urazach, przebytych urazach czaszkowo - mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami cztero kończynowymi.

2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu

Przeciwwskazania:

- stan krytyczny użytkownika,
- paraliż,
- głęboka sedacja,
- niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- nieleczone zakrzepica żył głębokich,
- niestabilność hemodynamiczna,
- stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- zatorowość płucna,
- świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud,
- użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.

3. Ogólna budowa wyrobu



ORAZ:

- PODNÓŻEK Z PŁYNNĄ I BEZPUNKTOWĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI I KĄTEM POCHYLENIA PLATFORMY,
- 2-PUNKTOWE PASKI STABILIZUJĄCE STOPY
- DWUSTOPNIOWY UKŁAD JEZDNY Z AMORTYZATORAMI CITY / COMFORT

INFORMACJA!

Akcesoria dostępne dla tego wyrobu znajdziesz na stronie internetowej akces-med.com w zakładce wyrobu.

4. Tabela rozmiarowa



Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1
W	orientacyjny wzrost użytkownika *	[cm]	100 - 140
A	szerokość siedziska	[cm]	37
	szerokość siedziska z osłonami bocznymi **	[cm]	34
	szerokość siedziska z osłonami bocznymi i poduszkami zawężającymi siedzisko **	[cm]	28 (poduszki zawężające o 6 cm) 24 (poduszki zawężające o 10 cm)
L	głębokość siedziska (przy poluzowanym pasie za oparciem)	[cm]	26, 36 (28, 38)
L1	głębokość siedziska do klina (przy poluzowanym pasie za oparciem)	[cm]	10, 12 - 16, 18 (12, 14 - 18, 20)
C	wysokość oparcia	[cm]	65
	wysokość zagłówka	[cm]	57, 62
	wysokość pelot piersiowych **	[cm]	25 - 38
E	szerokość oparcia	[cm]	33
	szerokość między pelotami piersiowymi **	[cm]	17 - 25
F	długość podnóżka	[cm]	16 - 36
	kąt pochylenia platformy podnóżka	[°]	-5 - 10
	długość platformy podnóżka	[cm]	21
X	kąt pochylenia oparcia względem siedziska	[°]	105 - 120
Y	kąt pochylenia siedziska względem podłoża	[°]	25
	max. waga użytkownika	[kg]	50

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1
szerokość	[cm]	62
długość (uchwyt do prowadzenia w poziomie)	[cm]	121
wysokość (uchwyt do prowadzenia w poziomie)	[cm]	104
szerokość po złożeniu (z kołami)	[cm]	62
długość po złożeniu (z kołami)	[cm]	97
wysokość po złożeniu (z kołami)	[cm]	44
szerokość po złożeniu (koła zdemontowane ***)	[cm]	51
długość po złożeniu (koła zdemontowane ***)	[cm]	97
wysokość po złożeniu (koła zdemontowane ***)	[cm]	42
waga	[kg]	15

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

** Osłony boczne siedziska, poduszki zawężające siedzisko, peloty piersiowe nie są wyposażeniem standardowym wyrobu.

*** Koła zdemontowane wraz z osiami.

5. Opis obsługi wyrobu

5.1 Rozkładanie wyrobu



UWAGA!

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy upewnić się, że stelaż został poprawnie rozłożony (mechanizm składania wózka powinien nachodzić na siebie) - podczas rozkładania usłyszysz charakterystyczny "KLIK".

Należy zwrócić uwagę, aby zabezpieczenie ramy przed jej przypadkowym złożeniem się, zostało odpowiednio poprowadzone i nie blokowało mechanizmu składania się wózka.

5. Opis obsługi wyrobu

5.1 Rozkładanie wyrobu



UWAGA!

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy upewnić się, że wszystkie elementy stelaża oraz wyposażenia wózka zostały poprawnie zamocowane, koła są poprawnie zamocowane, a hamulec blokuje obracające się koło.

5.2 Składanie wyrobu



INFORMACJA!

Podczas składania wózka, ustawienie oparcia w pośredniej pozycji kąta pochylenia umożliwia zachowanie najmniejszych gabarytów po złożeniu.

5. Opis obsługi wyrobu

5.2 Składanie wyrobu



5. Opis obsługi wyrobu

5.2 Składanie wyrobu



INFORMACJA!

Podczas składania wyrobu można dodatkowo zdemontować koła. Pozwala to zaoszczędzić dodatkowe miejsce podczas przechowywania wyrobu lub jego przewożenia w bagażniku samochodowym.

Instrukcja demontażu kół - patrz rozdział 5.13 **Koła** w niniejszej instrukcji.

5.3 Oparcie z regulacją kąta pochylenia



UWAGA!

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy upewnić się, że oparcie zostało poprawnie zablokowane i nie zmienia swojego położenia pod wpływem przyłożonej siły.

5. Opis obsługi wyrobu

5.4 Siedzisko z regulacją głębokości



INFORMACJA!

Dodatkowej regulacji można dokonać poprzez dostosowanie stopnia napięcia pasów mocujących 5-punktowe pasy stabilizujące tułów, za oparciem wyrobu.



5.5 Regulowany podnóżek



INFORMACJA!

Podczas zmiany długości podnóżka, dostosować można długość osłony łydek. Podnosząc jej dolną część, należy ją zawinąć pod spód oraz szczepić z drugim elementem.

Osłonę można również całkowicie zdemonstrować - mocowana jest do stelaża za pomocą taśm szczepnych.

5. Opis obsługi wyrobu

5.5 Regulowany podnóżek

REGULACJA DŁUGOŚCI



REGULACJA KĄTA POCHYLENIA PŁYTY PODNÓŻKA



i INFORMACJA!

Regulując dwie śruby pod płytą podnóżka, dostosowujemy jej kąt pochylenia.

i POTRZEBNE NARZĘDZIA

klucz imbusowy 4




5. Opis obsługi wyrobu

5.6 Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka



5.7 Zagłówek

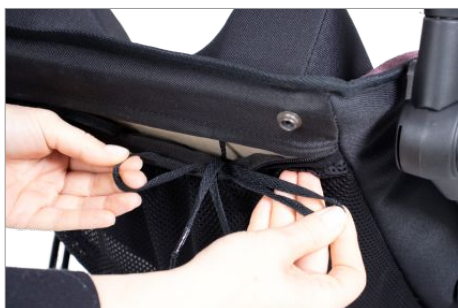

5. Opis obsługi wyrobu

5.8 Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów



INFORMACJA!

Górne pasy po wprowadzeniu elementów mocujących w otwory, należy zamocować dedykowanymi nakrętkami za oparciem wózka. W tym celu należy rozsunąć kieszeń za oparciem wyrobu.




INFORMACJA!

Dolne mocowanie pasów 5-punktowych posiada dwa zakończenia - jedno z nich, zakończone półkółkiem należy poprowadzić przez otwory tapicerki ku siedzisku wózka.




5. Opis obsługi wyrobu

5.8 Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów

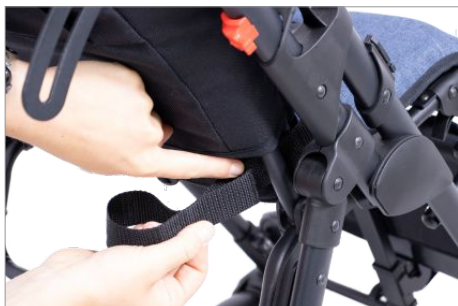


i INFORMACJA!

Schemat poniżej przedstawia sposób, w jaki należy przeplatać paski przez regulatory.

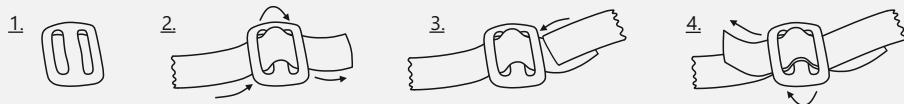

5. Opis obsługi wyrobu

5.8 Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów

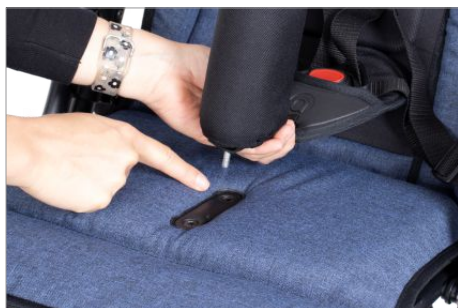

5. Opis obsługi wyrobu

5.8 Pasy 5-punktowe stabilizujące tułów




INFORMACJA!

W przypadku braku stosowania klina międzyudowego razem z pasami - do mocowania należy użyć śruby dołączonej do zestawu oraz dokręcić ją pod siedziskiem tak, jak w przypadku klina międzyudowego. Podczas dokręcania śruby zalecamy dodatkowe użycie klucza imbusowego 4.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

klucz imbusowy 4

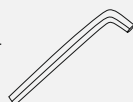

5. Opis obsługi wyrobu

5.9 Regulowany klin międzyudowy

INFORMACJA!

Klin międzyudowy mocowany jest podobnie jak pasy 5-punktowe. Klin wprowadzić należy w jeden z dwóch otworów na siedzisku wyrobu oraz dokręcić go od spodu za pomocą pokrętła.

Z uwagi na wspólne mocowanie klina międzyudowego i pasów 5-punktowych, w przypadku korzystania z wyposażenia innego niż pasy 5-punktowe, należy je zdemonstrować oraz zamocować klin ponownie.

Klin poza mocowaniem w dwóch miejscach, posiada również możliwość obrócenia go, co dodatkowo zwiększa lub zmniejsza głębokość siedziska do klina.



5. Opis obsługi wyrobu

5.10 Barierka



INFORMACJA!


Barierka posiada możliwość jednostronnego wypięcia.

UWAGA!

Podczas zakładania barierki należy zwrócić uwagę, aby skóra użytkownika oraz jego kończyny nie znalazły się w miejscach mocowań.

5. Opis obsługi wyrobu

5.11 2-punktowe paski stabilizujące stopy

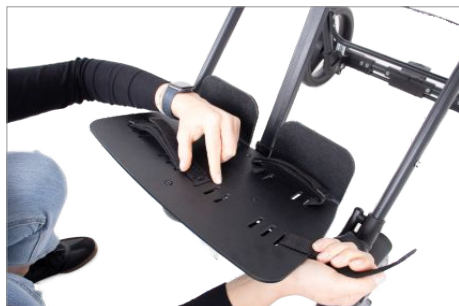

INFORMACJA!


Paski można montować w wybranych otworach w podnóżku, dostosowując ich szerokość do potrzeb użytkownika.

Paski należy przepleść pod płytą podnóżka oraz wyprowadzone ku górze szczeplić stabilizując stopy użytkownika.

5.12 Hamulec centralny



HAMULEC AKTYWNY

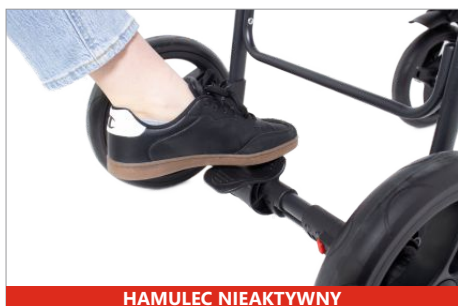


HAMULEC NIEAKTYWNY


5. Opis obsługi wyrobu

5.13 Koła

PRZEDNIE KOŁA SKRĘTNE Z BLOKADĄ KIERUNKU JAZDY

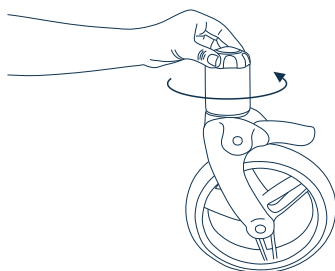

OBRÓT POKRĘTEŁ
PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA -
MIMOWOLNY OBRÓT KÓŁ PRZEDNICH

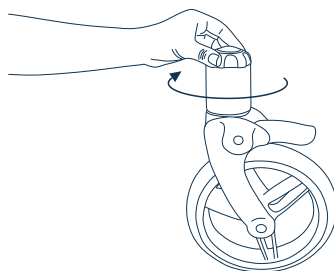

OBRÓT POKRĘTEŁ
ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA -
ZABLOKOWANIE OBRÓTU KÓŁ PRZEDNICH

INFORMACJA!

Koła można wypinać - jest to pomocne podczas składania, aby zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca podczas przechowywania wyrobu.



5. Opis obsługi wyrobu

5.13 Koła

KOŁA TYLNE

INFORMACJA!

Koła tylne posiadają możliwość demontażu na dwa sposoby:
pierwszy z nich pozwala zdemontować wyłącznie koła, nie demontując osi,
drugi sposób umożliwia zdemontowanie zarówno kół, jak i osi - jest to sposób, dzięki któremu można maksymalnie zmniejszyć szerokość złożonego wyrobu.

I SPOSÓB




II SPOSÓB




5. Opis obsługi wyrobu

5.14 Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami

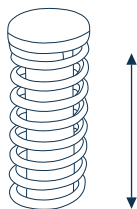

TRYB COMFORT

OZNACZA ZWIĘKSZONĄ AMORTYZACJĘ
- DO JAZDY W TRUDNYM TERENIE

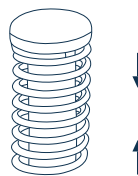

TRYB CITY

ZMNIJSZONY STOPIEŃ AMORTYZACJI
- DO JAZDY NA PŁASKIEJ DRODZE

6. Użytkowanie wyrobu

UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do informacji w niej zawartych.

Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie.

6.1 Przygotowanie użytkownika

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, niekrępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w wyrobie bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.

UWAGA!

Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!

6.2 Przygotowanie wyrobu

1. Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania wyrobu należy:

- rozłożyć wyrób,
- ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wyrobu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury,
- upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należyście zamocowane i stabilne,
- aktywować hamulce,
- dopasować wyrób do wymiarów użytkownika,
- odpiąć elementy stabilizujące, aby umożliwić swobodne ułożenie użytkownika w wyrobie,
- umieścić użytkownika w wyrobie,
- zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika,
- dopasować elementy podtrzymujące oraz pozycjonujące użytkownika,
- zamontować akcesoria (jeżeli występują).

6. Użytkowanie wyrobu

6.2 Przygotowanie wyrobu

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy upewnić się, że wszystkie pasy, kamizelka i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone.

Wyrób będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowany do wymiarów ciała użytkownika.

Główną zasadą przy dopasowywaniu wyrobu jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika - może to powodować jego dyskomfort.

Nieumiejętne korzystanie z wyrobu może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.

6.3 Przyjęcie pozycji siedzącej

Pierwsze przyjęcie przez użytkownika pozycji siedzącej następuje zwykle w warunkach ośrodków rehabilitacji, neurologii, neurochirurgii lub ortopedii. Istotne jest prawidłowe dopasowanie poszczególnych elementów wyposażenia wyrobu do stanu użytkownika z uwzględnieniem istniejących przykurczów i deformacji. Sadzanie w warunkach domowych wykonuje wykwalifikowany personel po uprzednim przeszkoleniu (fizjoterapeuta, pielęgniarka środowiskowa, osoby przeszkolone z rodziny) po uprzednim zapoznaniu się z instrukcją obsługi wyrobu.

UWAGA!

Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do skutków ubocznych takich jak omdlenia, deformacja ciała, przeciążenia stawów itp.

W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie, wyjąć użytkownika z wyrobu i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiastowo skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Decyzję o zastosowaniu wyrobu zawsze podejmuje lekarz prowadzący.

Dopasowanie wyrobu do użytkownika powinno zostać przeprowadzone wyłącznie przez osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi i zapoznały się z instrukcją obsługi.

6. Użytkowanie wyrobu

6.4 Instrukcja użytkowania kamizelek

UWAGA!

Kamizelka zapewnia wsparcie postawy u osób siedzących na wózkach specjalnych, fotelikach lub innych siedziiskach rehabilitacyjnych. Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala utrzymać prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji, kamizelka nie ogranicza możliwości swobodnych ruchów kończyn górnych.

Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika!

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

- 1) Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie - należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.
- 2) Użytkownik zsuwa się z siedziska, górny brzeg kamizelki obejmuje jego szyję i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie - z kamizelką **ZAWSZE** należy stosować wyposażenie takie jak np. pas biodrowy lub klin międzyudowy, aby zapobiec zsuwaniu się z wyrobu.
- 3) Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę będą uciskać szyję użytkownika utrudniając oddychanie w przypadku, gdy użytkownik został w niewłaściwy sposób zabezpieczony w wyrobie - należy wówczas dodatkowo ustabilizować tułów użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować tułowia, należy wymienić je na urządzenie posiadające taką funkcję.
- 4) Kamizelka jest zbyt mocno dociągnięta do oparcia, w wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać - w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę, aby pomiędzy kamizelką, a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej np. kamizelki Flex-Point®, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.

Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

- 1) Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji:
 - na środku siedziska,
 - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa przylegał do oparcia.
- 2) Zabezpiecz miednicę użytkownika.
- 3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy opadania tułowia na bok, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję.

6. Użytkowanie wyrobu

6.4 Instrukcja użytkowania kamizelek

- 4) Zamontuj i dopasuj kamizelkę:
 - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
 - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
 - zapnij pasy naramienne kamizelki,
 - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku.
- 5) Sprawdź pozycję użytkownika:
 - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
 - upewnij się, że możesz wsunąć dłoń między ciało użytkownika, a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Pozycja kamizelki MUSI bezwzględnie zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka MUSI być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy użytkownika (np. za pomocą pasa biodrowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubełkowa i odchylane oparcie.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby całe stopy użytkownika miały stabilne podparcie. Jeżeli wyrób nie jest wyposażony w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.
- 4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!
- 5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeżeli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję użytkownika.
- 6) Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
- 7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub zmiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
- 8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
- 9) Nie należy zostawiać użytkownika w wyrobie bez opieki!
- 10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
- 11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami jej bezpiecznego stosowania.

6. Użytkowanie wyrobu

6.4 Instrukcja użytkowania kamizelek

Dbanie o kamizelkę:

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana jest w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- 1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
- 3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić jego wymianę na nowy.
- 5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost lub utratę wagi.
- 6) Szelki kamizelki należy tak wyregulować, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
- 7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

7. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

GLOXI™ należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wózka specjalnego GLOXI™ należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym doborze wyrobu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1) Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy:

- sprawdzić wyrób pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wyrobu,
- upewnić się, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane, a wyrób nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
- sprawdzić, czy nie zostały poluzowane śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.,
- sprawdzić stan tapicerki, czy nie posiada śladów uszkodzenia,
- sprawdzić sprawność hamulców,
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek,
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm,
- dopasować wyrób do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie regulowanych elementów wyrobu,
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień wyrobu są stabilne i zablokowane,
- zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wyrobu. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m. in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia,
- w przypadku występowania u użytkownika nadmiernego napięcia w obrębie przywodzicieli kończyn dolnych zalecane jest stosowanie wybranych pasów odwodzących uda w celu zapobiegania powstawaniu odcisnięć i/lub odleżyn w okolicy stawów kolanowych od strony przyśrodkowej.

2. Zabrania się użytkowania wyrobu w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.

3. Zabrania się użytkowania wyrobu, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.

4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wyrobie bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.

5. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.

6. Zabrania się pozostawiania wyrobu z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.

7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wyrobem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.

7. Zasady bezpieczeństwa

8. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wyrobu zawsze powinno odbywać się przy aktywnych hamulcach.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wyrobu użytkownik nie stawał na podnóżku.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wyrobu, kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Wyrób należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wyrób nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu wyrobu bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
13. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe.

UWAGA!

Nieprawidłowa konfiguracja wyrobu może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Zabrania się przewożenia użytkownika w wyrobie w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

Wyrób zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 8 instrukcji.

8. Warunki gwarancji

- Akces-MED Sp. z o.o. sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Wyrób jest objęty 24 miesięczną gwarancją, licząc od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie 24 miesięcy mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że wyrób jest przedmiotem refundacji. W takim przypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację na naprawę wyrobu w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- Producent określa czas użytkowania wyrobu na 48 miesięcy. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia wyrobu należy skontaktować się z dealerm, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy: Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).

9. Konserwacja i czyszczenie

GLOXI™ będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wyrobu są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wyrobu:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą, wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
4. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
5. Tapicerki nie należy zamaczać.
6. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tapicerki przed kolejnym czyszczeniem.
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.
9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wyrobu podczas korzystania z niego przez użytkownika.

9. Konserwacja i czyszczenie

10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerowanych elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczonego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnię płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.

UWAGA!

Przed ponownym użyciem wyrobu, tapicerka zawsze musi być sucha!

Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić koła z wszelkich zanieczyszczeń,
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koła,
- sprawdzić, czy konstrukcja wyrobu nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji,
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone,
- sprawdzić, czy paski elementów stabilizujących itp. nie są postrzępione, a sprzączki, rzepy i klamry działają prawidłowo.

UWAGA!

Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wyrobu spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).



9. Konserwacja i czyszczenie

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO NALEŻY SKONTROLOWAĆ?	CZYNNOŚCI	UWAGI
PRZED KAŻDYM UŻYCIEM			
Stan ogólny wyrobu.			
Sprawdzić:			
• cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokręta, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.			
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.			
Koła i hamulce.			
Sprawdzić:			
• unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, • czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, • czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń.			
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.			
Mocowania elementów konstrukcyjnych.			
Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, w szczególności sprawdzić:			
• poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), • poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżki.			
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.			
Elementy tapicerskie.			
Sprawdzić:			
• elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skrócone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.			
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.			
RAZ NA TYDZIEŃ			
Czyszczenie wyrobu.			
Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki pokarmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.			
Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.			

9. Konserwacja i czyszczenie

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO NALEŻY SKONTROLOWAĆ?	CZYNNOŚCI	UWAGI
---------------	-------------------------	-----------	-------

RAZ W MIESIĄCU

Osie kół, szybkozłącza (jeśli dotyczy).

Sprawdzić:

- czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy oś, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.

W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).

Sprawdzić:

- stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Opony, dętki (jeśli dotyczy).

Sprawdzić:

- stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).

W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

RAZ NA 6 MIESIĘCY

Ruchome elementy konstrukcji.

Sprawdzić:

- ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Oznakowanie wyrobu.

Sprawdzić:

- oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

PO ZAKOŃCZENIU CZASU UŻYTKOWANIA WYROBU

Szczegółowy przegląd wyrobu.

Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu.

W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

10. Oznakowanie

	Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Numer katalogowy		Suszyć pionowo
	Numer seryjny		Nie chlorować
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi		Nie prasować
	Uwaga!		Nie czyścić chemicznie
	Wytwórca		Nie wybielać
	Data produkcji		Ostrożnie, delikatna zawartość
	Produkt nie zawiera lateksu		Zakaz zjeżdżania po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez
	Przechowywać w suchym miejscu		Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających		Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami
	Chronić przed promieniami słonecznymi		Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu
	Ograniczenie temperatury przechowywania		Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie
	Wilgotność względna przechowywania		Wyrób medyczny

Przykładowa tabliczka znamionowa

NAZWA WYROBU PL NAZWA WYROBU EN

KOD QR
PO ZESKANOWANIU KIERUJE
DO STRONY INTERNETOWEJ
WYROBU

ADRES WYTWÓRCY

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE
OBCIĄŻENIE WYROBU

NUMER SERYJNY W FORMIE
KODU KRESKOWEGO

AKCES-MED
www.akces-med.com

AKCES-MED Sp. z o.o.
Jasionka 6505
35-032 JASIONKA
POLAND

GLOXI 1
WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI

GLOXI 1
SPECIAL NEEDS STROLLER

MAX LOAD: 50 kg

06.2024

MD

CE

KOD KRESKOWY

OZNAKOWANIE
PATRZ WYŻEJ

DATA PRODUKCJI

GLX 007/K/1/BD

NUMER SERYJNY

WYTWÓRCA

 Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619

Autoryzowany Przedstawiciel