



EDITION 2025/04



KING RAISED TOILET SEATS


WITH LATERAL LOCKING SYSTEM

SL NAVODILA ZA UPORABO
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO MANUAL DE UTILIZARE
UA ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
SK POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
EE KASUTUSJUHEND
LT VARTOTOJO VADOVAS



MAX
250 kg
550 lbs

KING-5-KN
KING-10-KN
KING-15-KN

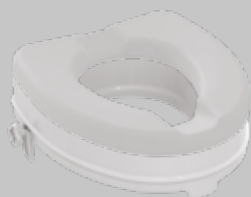

MAX
250 kg
550 lbs

KING-5S02-KN
KING-5S04-KN
KING-10S02-KN
KING-10S04-KN
KING-15S02-KN
KING-15S04-KN




MAX
250 kg
550 lbs

KING-5L-KN
KING-10L-KN
KING-15L-KN



MAX
250 kg
550 lbs

KING-5LS02-KN
KING-5LS04-KN
KING-10LS02-KN
KING-10LS04-KN
KING-15LS02-KN
KING-15LS04-KN

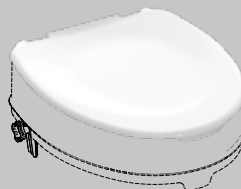

KING-L-KN
KING-LS-KN



KING-BDT-KN



KING-CRTS2-KN
KING-CRTS4-KN

MADE IN ITALY

SL	NAVODILA ZA UPORABO	5
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK	6
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS	7
RO	MANUAL DE UTILIZARE	8
UA	ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА	9
SK	POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	10
CZ	UŽIVATELSKÝ MANUÁL	11
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	12
LV	LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	12
EE	KASUTUSJUHEND	13
LT	VARTOTOJO VADOVAS	14

OPIS - OPIS - LEÍRÁS - DESCRIERE - ОПИС - POPIS - POPIS - OPIS - APRAKSTS - KIRJELDUS - APIBŪDINIMAS

MADE IN ITALY

SL Izdelano v Italiji - **HR** Proizvedeno u Italiji - **HU** Olaszországban készült
RO Fabricat în Italia - **UA** Зроблено в Італії - **SK** Vyrobené v Taliansku
CZ Vyrobeno v Itálii - **PL** Wyprodukowane we Włoszech - **LV** Ražots Itālijā
EE Tehtud Itaalias - **LT** Pagaminta Italijoje

SL Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana, in se posvetujte z navodili za uporabo - **HR** Nemojte koristiti ako je pakiranje oštećeno i konzultirajte upute za upotrebu - **HU** Ne használja, ha a csomagolás sérült, és konzultáljon a használati utasítással - **RO** Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare - **UA** Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена, і зверніться до інструкцій з використання - **SK** Nepoužívajte, ak je obal poškodený, a konzultujte pokyny na použitie - **CZ** Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a konzultujte návod k použití - **PL** Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone, i poznaj się z instrukcją użytkowania - **LV** Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts, un konsultējieties ar lietošanas instrukcijām - **EE** Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud, ja tutvuge kasutusjuhendiga - **LT** Nenaudokite, jei pakuotė yra pažeista, ir susipažinkite su naudojimo instrukcijomis
ISO 7000-2626 2004-01-15

SL Brezplačne montaža orodij - **HR** Montaža bez alata - **HU** Szerszámok Ingyenes összeszerelés - **RO** Asamblare fără scule - **UA** Інструменти Безкоштовна збірка
SK Náradie Volná montáž - **CZ** Nástroje Montáž zdarma - **PL** Beznarzędziowy montaż - **LV** Instrumenti Bez maksas montāža - **EE** Tööriistad Tasuta kokkupanek
LT Įrankiai nemokamai

SL Primerno za pomivalni stroj - **HR** Može se prati u perilici posuđa
HU Mosogatógépbarát - **RO** Prietenos cu mașina de spălat vase - **UA** Можна мити в посудомийній машині - **SK** Vhodné do umývačky riadu - **CZ** Vhodné do myčky - **PL** Można myć w zmywarce - **LV** Draudzīgs trauku mazgājamajā mašīnā
EE Nõudepesumasinasõbralik - **LT** Tinka plauti indaplovėje

SL Največja teža uporabnika - **HR** Maksimalna težina korisnika - **HU** Max felhasználói súly - **RO** Greutatea maximă a utilizatorului - **UA** Максимальна вага користувача - **SK** Maximální hmotnost uživatele - **CZ** Maximální hmotnost uživatele - **PL** Maksymalna waga użytkownika - **LV** Maksimālais lietotāja svars
EE Maksimaalne kasutaja kaal - **LT** Maksimalus vartotojo svoris

SL 5 leti garancije - **HR** 5 godine jamstva - **HU** 5 év garancia - **RO** 5 ani garanție
UA 5 роки гарантії - **SK** 5 roky záruka - **CZ** 5 roky záruka - **PL** 5 lata gwarancji
LV 5 gadu garantija - **EE** Garantii 5 aastat - **LT** 5 metų garantija



SL Skenirajte kodo QR za video sestavljanja - **HR** Skenirajte QR KOD za video montaže - **HU** Olvassa be a QR-KÓDOT az összeszerelési videóhoz - **RO** Scanati COD QR pentru videoclipul de asamblare - **UA** Відскануйте QR-КОД, щоб переглянути відео монтажу - **SK** Naskenujte QR KOD pre montážne video
CZ Naskenujte QR KOD pro montážní video - **PL** Zeskanuj KOD QR, aby zobaczył film montażowy - **LV** Skenējiet QR KODU, lai redzētu montāžas video
EE Skannige kokkupanekuvideo jaoks QR-KOOD - **LT** Nuskaitykite QR KODĄ, kad pamatytumėte surinkimo vaizdo įrašą

ŠIFRA ARTIKLA ŠIFRA ARTIKLA TERMÉKKÓD CODUL PRODUSULUI KOD TOBARY KOD POLOŽKY KOD POLOŽKY KOD PRODUKTU LIETAS KODS ESEME KODD PREKĖS KODAS	OPIS OPIS LEÍRÁS DESCRIERE ОПИС POPIS POPIS OPIS APRAKSTS KIRJELDUS APIBŪDINIMAS	STRAN STRANICA OLDAL PAGINA СТОРІНКА PAGE STRANA STRONA LAPPUSE LAPPUSE LEHT PUSLAPIS
KING-5-KN	SL Dvignjen sedež za školjko 5 cm/2" King - HR WC povišenje 5 cm/2in King - HU King WC magasító ülőke 5 cm/2in King - RO Înălțător WC fără capac 5 cm/2in King - UA Насадка на унітаз King 5 cm/2 дюйма - SK Vyuššená záchodová doska 5 cm/2 palce King - CZ Zvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce King - PL Nasadka toaletowa, wys. 5 Cm - LV King paaugstināts tualetes poda sēdekis 5 cm/2 collas - EE Potikõrgendus 5 cm/2in King LT Paaukštinta klozeto sėdynė 5 cm/2 colių King	16
KING-5L-KN	SL Dvignjen sedež za školjko 5 cm/2" s pokrovom King - HR WC povišenje 5 cm/2in s poklopcem King - HU King WC magasító ülőke 5 cm/2in fedéllel - RO Înălțător wc cu capac 5 cm/2in cu capac King - UA Насадка на унітаз King 5 cm/2 дюйма з кришкою - SK Vyuššená záchodová doska 5 cm/2 palce s poklopom King - CZ Zvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce s víkrem King - PL Nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 5 Cm - LV King paaugstināts tualetes poda sēdekis 5 cm/2 collas ar vāku - EE Potikõrgendus 5 cm/2in koos kaanega King LT Paaukštinta klozeto sėdynė 5 cm/2 colių su dangčiu King	16
KING-10-KN	SL Dvignjen sedež za školjko 10 cm/4" King - HR WC povišenje 10 cm/4in King - HU King WC magasító ülőke 10 cm/4in - RO Înălțător wc fără capac 10 cm/4in King - UA Насадка на унітаз King 10 cm/4 дюйма - SK Vyuššená záchodová doska 10 cm/4 palce King - CZ Zvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce King - PL Nasadka toaletowa, wys. 10 Cm - LV King paaugstināts tualetes poda sēdekis 10 cm/4 collas - EE Potikõrgendus 10 cm/4in King - LT Paaukštinta klozeto sėdynė 10 cm/4 colių King	16
KING-10L-KN	SL Dvignjen sedež za školjko 10 cm/4" s pokrovom King - HR WC povišenje 10 cm/4in s poklopcem King - HU King WC magasító ülőke 10 cm/4in fedéllel - RO Înălțător wc cu capac 10 cm/4in cu capac King - UA Насадка на унітаз King 10 cm/4 дюйма з кришкою - SK Vyuššená záchodová doska 10 cm/4 palce King - CZ Zvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce s poklopem King - PL Nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 10 Cm - LV King paaugstināts tualetes poda sēdekis 10 cm/4 collas ar vāku - EE Potikõrgendus 10 cm/4in koos kaanega King - LT Paaukštinta klozeto sėdynė 10 cm/4 colių su dangčiu King	16
KING-15-KN	SL Dvignjen sedež za školjko 15 cm/6" King - HR WC povišenje 15 cm/6in King - HU King WC magasító ülőke 15 cm/6in - RO Înălțător wc fără capac 15 cm/6in King - UA Насадка на унітаз King 15 cm/6 дюймів - SK Vyuššená záchodová doska 15 cm/6 palcov King - CZ Zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců King - PL Nasadka toaletowa, wys. 15 Cm - LV King paaugstināts tualetes poda sēdekis 15 cm/6 collas - EE Potikõrgendus 15 cm/6in King - LT Paaukštinta klozeto sėdynė 15 cm/6 colių King	16
KING-15L-KN	SL Dvignjen sedež za školjko 15 cm/6" s pokrovom King - HR WC povišenje 15 cm/6in s poklopcem King - HU King WC magasító ülőke 15 cm/6in fedéllel - RO Înălțător wc cu capac 15 cm/6in cu capac King - UA Насадка на унітаз King 15 cm/6 дюймів з кришкою - SK Vyuššená záchodová doska 15 cm/6 palcov s poklopom King - CZ Zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců s víkrem King PL Nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 15 Cm - LV King paaugstināts	16

	tualetes poda sêdeklis 15 cm/6 collas ar vâku - EE Potikörgendus 15 cm/6in koos kaanega King - LT Paaukštinta klozeto sêdynê 15 cm/6 coliq su dangčiu King	
KING-5S02-KN KING-5S04-KN	SL Mehek dvignjen sedež za školjko 5 cm/2" svetlo modra/siva King HR Mekano WC povišenje 5 cm/2in svijetlo plava/siva King HU King puha, WC magasító ülőke 5 cm/2in világoskék/szürke RO Înălțător wc fără capac și colac moale 5 cm/2in albastru deschis/gri King - UA М'яка Насадка На Унітаз King 5 cm/2 дюйма світло-блакитна/сіра - SK Mäkká vyvýšená záchodová doska 5 cm/2 palce svetlomodrá/sivá King - CZ Měkké zvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce světle modré/šedé King - PL Miękka nasadka toaletowa, wys. 5 Cm, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts paaugstināts tualetes poda sêdeklis 5 cm/2 collas gaiši zils/pelēks EE Pehme potikörgendus 5 cm/2in helesinine/hall King - LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 5 cm/2 coliq šviesiai mėlyna/pilka King	17
KING-5LS02-KN KING-5LS04-KN	SL Mehek dvignjen sedež za školjko 5 cm/2" s pokrovom svetlo modra/siva king - HR Mekano WC povišenje 5 cm/2in with lid svijetlo plava/siva King - HU King puha WC magasító ülőke 5 cm/2in fedéllel világoskék/szürke - RO Înălțător wc cu capac și colac moale 5 cm/2in cu capac albastru deschis/gri King - UA М'яка Насадка На Унітаз King 5 cm/2 дюйма з кришкою світло- блакитна/сіра - SK Mäkká vyvýšená záchodová doskao 5 cm/2 palce s poklopom svetlomodrá/sivá King - CZ Měkké vyvýšené záchodové prkénko 5 cm/2 palce s poklopem světle modré/šedé King - PL Miękka nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 5 Cm, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts paaugstināts tualetes poda sêdeklis 5 cm/2 collas ar vâku gaiši zils/pelēks - EE Pehme potikörgendus 5 cm/2in kaanega helesinine/hall King - LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 5 cm/2 col. Su dangčiu šviesiai mėlyna/pilka King	17
KING-10S02-KN KING-10S04-KN	SL Mehek dvignjen sedež za školjko 10 cm/4" svetlo modra/siva King HR Mekano WC povišenje 10 cm/4in svijetlo plava/siva King HU King puha WC magasító ülőke 10 cm/4in világoskék/szürke RO Înălțător wc fără capac și colac moale 10 cm/4in albastru deschis/gri King - UA М'яка Насадка На Унітаз King 10 cm/4 дюйма світло-блакитна/сіра - SK Mäkká vyvýšená záchodová doska 10 cm/4 palce svetlomodrá/sivá King - CZ Měkké vyvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce světle modré/šedé King - PL Miękka nasadka toaletowa, wys. 10 Cm, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts paaugstināts tualetes poda sêdeklis 10 cm/4 collas gaiši zils/pelēks - EE Pehme potikörgendus 10 cm/4in helesinine/hall King - LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 10 cm/4 coliq šviesiai mėlyna/pilka King	17
KING-10LS02-KN KING-10LS04-KN	SL Mehek dvignjen sedež za školjko 10 cm/4" s pokrovom svetlo modra/siva king - HR Mekano WC povišenje 10 cm/4in with lid svijetlo plava/siva King - HU King puha WC magasító ülőke 10 cm/4in fedéllel világoskék/szürke - RO Înălțător wc cu capac și colac moale 10 cm/4in cu capac albastru deschis/gri King - UA М'яка Насадка На Унітаз King 10 cm/4 дюйма з кришкою світло- блакитна/сіра - SK Mäkká vyvýšená záchodová doska 10 cm/4 palce s poklopom svetlomodrá/sivá King - CZ Měkké zvýšené záchodové prkénko 10 cm/4 palce s poklopem světle modré/šedé King - PL Miękka nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 10 Cm, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts paaugstināts tualetes poda sêdeklis 10 cm/4 collas ar vâku gaiši zils/pelēks - EE Pehme potikörgendus 10 cm/4in kaanega helesinine/hall King - LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 10 cm/4 coliq su dangčiu šviesiai mėlyna/pilka King	17
KING-15S02-KN KING-15S04-KN	SL Mehek dvignjen sedež za školjko 15 cm/6" svetlo modra/siva King HR Mekano WC povišenje 15 cm/6in svijetlo plava/siva King HU King puha, WC magasító ülőke 15 cm/6in világoskék/szürke RO Înălțător wc fără capac și colac moale 15 cm/6in albastru deschis/gri King - UA М'яка Насадка На Унітаз King 15 cm/6 дюйма з кришкою світло-блакитна/сіра - SK Mäkká vyvýšená záchodová doska 15 cm/6 palcov svetlomodrá/sivá King - CZ Měkké zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců světle modré/šedé King - PL Miękka nasadka toaletowa, wys. 15 Cm, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts paaugstināts tualetes poda sêdeklis 15 cm/6 collas gaiši zils/pelēks EE Pehme potikörgendus 15 cm/6in helesinine/hall King - LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 15 cm/6 coliq šviesiai mėlyna/pilka King	17

	LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 15 cm/6 coliq šviesiai mėlyna/pilka King	
KING-15LS02-KN KING-15LS04-KN	SL Mehek dvignjen sedež za školjko 15 cm/6" s pokrovom svetlo modra/siva king - HR Mekano WC povišenje 15 cm/6in with lid svijetlo plava/siva King - HU King puha WC magasító ülőke 15 cm/6in fedéllel világoskék/szürke - RO Înălțător wc cu capac și colac moale 15 cm/6in cu capac albastru deschis/gri King - UA М'яка Насадка На Унітаз King 15 cm / 6 дюйма з кришкою світло-блакитна/сіра - SK Mäkká vyvýšená záchodová doska 15 cm/6 palcov s poklopom svetlomodrá/sivá King - CZ Měkké zvýšené záchodové prkénko 15 cm/6 palců s poklopem světle modré/šedé King - PL Miękka nasadka toaletowa z pokrywą, wys. 15 Cm, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts paaugstināts tualetes poda sêdeklis 15 cm/6 collas ar vâku gaiši zils/pelēks - EE Pehme potikörgendus 15 cm/6in koos kaanega helesinine/hall King - LT Minkšta pakeliama klozeto sêdynê 15 cm/6 coliq su dangčiu šviesiai mėlyna/pilka King	17
KING-L-KN	SL Pokrov za dvignjen sedež za školjko 5/10/15 cm king - HR Poklopac za WC povišenje 5/10/15 cm King - HU King fedél WC magasító ülőkéhez 5/10/15 cm - RO Capac pentru înălțător wc 5/10/15 cm King - UA Кришка Для Насадки На Унітаз King 5/10/15 cm - SK Poklop na vyvýšenú záchodovú dosku 5/10/15 cm King - CZ Poklop pro zvýšené záchodové prkénko 5/10/15 cm King - PL Pokrywa do nasadki toaletowej, wys. 5/10/15 Cm - LV King vāks paceltam tualetes poda sêdeklim 5/10/15 cm - EE Potikaan potikörgendusele 5/10/15 cm King - LT Pakeliama klozeto dangtis 5/10/15 cm King	18
KING-LS-KN	SL Pokrov za mehek dvignjen sedež za školjko 5/10/15 cm King HR Poklopac za mekano WC povišenje 5/10/15 cm King HU King fedél puha, WC magasító ülőkéhez 5/10/15 cm - RO Capac pentru înălțător wc cu colac moale 5/10/15 cm King - UA Кришка Для М'якої Насадки На Унітаз King 5/10/15 cm - SK Poklop na mäkkú vyvýšenú záchodovú dosku 5/10/15 cm King - CZ Víko pro měkké zvýšené záchodové prkénko 5/10/15 cm King - PL Pokrywa do miękkiej nasadki toaletowej, wys. 5/10/15 Cm - LV King vāks mikstam paaugstinātam tualetes poda sêdeklim 5/10/15 cm EE Potikaan pehmele potikörgendusele 5/10/15 cm King - LT Minkšto pakeliama klozeto dangtis 5/10/15 cm King	18
KING-BDT-KN	SL Bide za dvignjen sedež za školjko 5/5L/10/10L/15/15L King HR Bide za WC povišenje 5/5L/10/10L/15/15L King - HU King bidé WC magasító ülőkéhez 5/5L/10/10L/15/15L - RO Bideu pentru înălțător wc 5/5L/10/10L/15/15L King - UA Біде Для Насадки На Унітаз King 5/5Л/10/10Л/15/15Л - SK Bidet na vyvýšenú záchodovú dosku 5/5L/10/10L/15/15L King - CZ Bidet pro zvýšené záchodové sedátko 5/5L/10/10L/15/15L King - PL Bidet do nasadki toaletowej z/bez pokrywą, wys. 5/10/15 Cm - LV King bidé paaugstinātam tualetes poda sêdeklim 5/5L/10/10L/15/15L - EE Bidee potikörgendusele 5/5L/10/10L/15/15L King - LT Bidé pakeltam klozetui 5/5L/10/10L/15/15L King	19
KING-CRTS2-KN KING-CRTS4-KN	SL Mehka blazina za dvignjen sedež za školjko svetlo modra/siva king - HR Mekani jastuci za WC povišenje svijetlo plava/siva King HU King puha párna WC magasító ülőkéhez világoskék/szürke RO Colac moale pentru înălțător wc -albastru deschis/grey King - UA М'яка подушка для насадки на унітаз king світло-блакитна/сіра - SK Mäkký vankúš na vyvýšenú záchodovú dosku svetlomodrá/sivý King - CZ Měkký sedák pro zvýšené záchodové prkénko světle modré/šedý King - PL Miękka poduszka do nasadki toaletowej, kolor jasno niebieski/szary - LV King miksts spilvens paaugstinātam tualetes poda sêdeklim gaiši zils/pelēks EE Pehmendus potikörgendusele helesinine/hall King - LT Minkšta pagalvėlė pakeltai klozeto sêdynei šviesiai mėlyna/pilka king	18

KING DVIGNJENI SEDEŽI ZA ŠKOLJKO S STRANSKIM SISTEMOM ZA ZAKLEPANJE

PREDVIDENA UPORABA:

Izdelki iz linije *dvignjeni sedeži za školjko s stranskim sistemom za zaklepanje* KING so namenjeni povečanju višine straniščne školjke za lažje sedenje in vstajanje, obenem pa spodbujajo neodvisnost

SL

in udobje. Modeli z mehko blazino nudijo izboljšano udobje sedeža, ki je mehak in prijeten. Nagubana površina blazine prav tako zagotavlja večje trenje in stabilnost. Izdelek je na voljo v različnih konfiguracijah, z mehko blazino ali brez nje ter s pokrovom ali brez njega. Mehke blazine so na voljo v različnih barvah. Pokrov, bide in mehke blazine so na voljo tudi ločeno kot dodatna oprema.

INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE:

Izdelki iz linije dvignjen sedež za školjko s stranskim sistemom za zaklepanje KING so namenjeni starejšim ljudem, uporabnikom invalidskih vozičkov, ljudem z omejeno gibljivostjo ledvenega, kolenskega ali kolčnega dela ter vsem, ki imajo težave pri sedenju in vstajanju s straniščne školjke. Modeli z mehko blazino se med sedenjem deformirajo, kar poveča podporno površino uporabnika in omogoča boljše porazdelitev teže. Zato so te različice še posebej primerne, če ima uporabnik preležanine ali bolezni, ki bi jih lahko povzročile, kot je sladkorna bolezen. Med uporabo mora biti uporabnik sposoben samostojno sedeti. Uporaba izdelka v primeru motenj zaznavanja ali težav z ravnotežjem med sedenjem ni priporočljiva.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA:

- Največja dovoljena teža uporabnika, navedena v navodilih za montažo, ne sme biti presežena.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je izdelek stabilno nameščen na straniščno školjko in pravilno pritrjen s priloženim sistemom za zaklepanje.
- Prepričajte se, da je mehka blazina (če je bila kupljena) pravilno nameščena na sedežu.
- Pred namestitvijo mehke blazine preverite, ali je sedež čist in suh.
- Med montažo dosledno upoštevajte navodila iz Uporabniškega priročnika.
- Ne spreminjajte izdelka ali njegovih sestavnih delov na kakršen koli način.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan ali kakor koli spremenjen.
- Prepričajte se, da višina izdelka omogoča enostavno in varno uporabo.
- Med uporabo se izogibajte položajem, pri katerih je telesna teža preveč nagnjena naprej.
- Nepravilna drža lahko povzroči nestabilnost in prevrnitev izdelka.
- Izdelka in dodatkov ne smete shranjevati na prostem.
- Med montažo obstaja večje tveganje za poškodbe prstov.
- Izdelka ne uporabljajte v druge namene, kot je predvideno.
- Da bi preprečili okužbo, se izogibajte neposrednemu stiku z odprtimi ranami ali poškodovano kožo.

INFORMACIJE O VZDRŽEVANJU:

Vzdrževanje izdelkov je sestavljeno iz postopkov čiščenja in zagotavljanja higienske ustreznosti. Za zagotovitev varne uporabe in ustreznega higienskega standarda mora uporabnik pred vsako uporabo opraviti te postopke. Uporabnik se mora prepričati o strukturni celovitosti naprave in njenih sestavnih delov ter preveriti tesnost vijakov. Pri postopkih čiščenja in zagotavljanja higienske ustreznosti sledite spodnjim korakom:

1. Nositi je treba rokavice.
2. Preden nadaljujete z najbolj natančnim razkuževanjem, odstranite vidno umazanijo.
3. Za čiščenje uporabite vodo ali neagresivno čistilno sredstvo.
4. Obrišite s suho in čisto krpo.

Izdelek lahko čistite tudi v gospodinjskih pomivalnih strojih pri najvišji temperaturi. Mehko blazino je treba čistiti izključno ročno.

ZAHTEVJE ZA PONOVO UPORABO:

Izdelek je primeren, da ga ponovno uporabijo drugi uporabniki. Preden izdelek ponovno uporabijo drugi, ga je treba pravilno očistiti in razkužiti. Pred prenosom izdelka na druge osebe morajo izdelek preveriti usposobljeni prodajalci.

PRAVILEN POSTOPEK ODSTRANJEVANJA:

Izdelka ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Za pravilen in okolju prijazen način odstranjevanja se predhodno pozanimajte pri organih lokalne oblasti.

POROČANJE O INCIDENTIH:

Če pride do resnega incidenta v zvezi s to napravo, pišite proizvajalcu tega izdelka na info@kingbathrooms.com in stopite v stik s pristojnim organom v vaši državi.

KING WC POVIŠENJA
S BOČNIM SUSTAVOM ZAKLJUČAVANJA

PREDVIDENA NAMJENA

Proizvodi iz linije WC povišenja s bočnim sustavom zaključavanja KING dizajnirani su za povećanje visine WC školjke radi olakšavanja sjedenja i ustajanja te promicanja neovisnosti i udobnosti. Modeli s mehanim jastukom pružaju poboljšanu udobnost sjedenja, čineći ih mehanima i ugodnima. Osim toga, naborana površina jastuka pruža više trenja i stabilnosti. Proizvod dolazi u različitim konfiguracijama: s mehanim jastukom ili bez mekanog jastuka, s poklopcem ili bez poklopca. Mekani jastuci dostupni su u različitim bojama. Poklopac, bide i mekani jastuci također su dostupni zasebno kao dodaci proizvodu.

INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE

Proizvodi iz linije WC povišenja s bočnim sustavom zaključavanja KING namijenjeni su starijim osobama, korisnicima invalidskih kolica, osobama s reduciranom pokretljivošću lumbalnog dijela,

koljena ili kukova te svima koji imaju poteškoće pri sjedenju i ustajanju s WC školjke. Modeli opremljeni mehanim jastucima lako su prilagodljivi. Tijekom sjedenja njihova se površina povećava što omogućuje bolju raspodjelu težine. To ih čini posebno pogodnima ako korisnik pati od dekubitusa ili bolesti koje ih mogu uzrokovati, poput dijabetesa. Tijekom upotrebe potrebna je sposobnost samostalnog sjedenja. Ne preporučuje se korištenje proizvoda u slučaju poremećaja percepcije ili problema s ravnotežom.

SIGURNOSNA UPOZORENJA I INDIKACIJE:

- Maksimalna nosivost navedena u uputama za montažu ne smije biti prekoračena.
- Prije svake upotrebe provjerite je li proizvod stabilno postavljen na WC školjku i ispravno pričvršćen priloženim sustavom za zaključavanje.
- Provjerite je li mekani jastuk (ako je kupljen) ispravno postavljen na sjedalo.
- Prije postavljanja mekanog jastuka provjerite je li sjedalo čisto i suho.
- Tijekom montaže strogo se pridržavajte uputa iz Korisničkog priručnika.
- Ne mijenjajte proizvod niti njegove dijelove ni na koji način.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen ili izmijenjen na bilo koji način.
- Provjerite je li visina proizvoda odgovarajuća kako bi korisniku omogućila jednostavnu i sigurnu upotrebu.
- Tijekom korištenja izbjegavajte položaje u kojima je težina tijela previše nagnuta prema naprijed. Nepravilni položaji mogu dovesti do nestabilnosti i prevrtanja proizvoda.
- Proizvod i dodaci ne smiju se skladištiti na otvorenom.
- Tijekom montaže može doći do povećanog rizika od ozljeda prstiju.
- Ne koristite proizvod u svrhe koje nisu predviđene.
- Izbjegavajte izravan kontakt s otvorenim ranama ili oštećenom kožom kako biste spriječili infekciju.

INFORMACIJE O ODRŽAVANJU

Održavanje proizvoda sastoji se od postupaka čišćenja i dezinfekcije. Kako bi se zajamčila sigurna uporaba i adekvatna higijena, korisnik bi trebao obaviti ove postupke prije svake uporabe. Korisnik mora provjeriti sigurnost proizvoda i njegovih komponenti, te zategnutost vijaka. Za postupke čišćenja i dezinfekcije slijedite korake u nastavku:

1. Treba nositi rukavice.
2. Uklonite vidljivu prljavštinu prije dezinficiranja.
3. Za čišćenje koristite vodu ili neagresivni deterdžent.
4. Obrišite suhom i čistom krpom.

Alternativno, proizvod se može oprati u kućanskim perilicama posuđa na maksimalnoj temperaturi. Mekane jastuke obavezno čistite ručno.

PONOVA UPORABA

Proizvod je pogodan za ponovnu uporabu od strane drugih korisnika. Prije ponovne uporabe od strane drugih, proizvod se mora ispravno očistiti i dezinficirati te biti pregledan od strane ovlaštenih prodavatelja.

ISPRAVNI POSTUPAK ODLAGANJA

Proizvod nije pogodan za odlaganje u redovni kućni otpad. Prije odlaganja provjerite ispravan i ekološki prihvatljiv način odlaganja s nadležnom lokalnom vlasti.

PRIJAVA INCIDENTA

Ako se dogodi ozbiljan incident u vezi s ovim proizvodom, obratite se proizvođaču na info@kingbathrooms.com ili ovlaštenom distributertu.

KING WC MAGASÍTÓ ÜLŐKE
RÖGZÍTETT VAGY ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A *KING Raised Toilet Seat with Lateral Locking System* termékcsalád termékeit úgy tervezték, hogy megnöveljék a WC-csésze magasságát, hogy megkönnyítsék a leülést és a felkelést, valamint elősegítsék a függetlenséget és a kényelmet. A puha párnával ellátott modellek jobb ülés komfortot kínálnak. A puha párna által biztosított extra párnázás még az érzékeny bőrűek számára is kényelmessé teszi az ülést. Innovatív, szabadalmaztatott anyagból készült, amely bizonyítottan antibakteriális és penészesedés gátló tulajdonságokkal rendelkezik, és maximális higiéniát garantál nedves környezetben. A termék különböző konfigurációkban kapható, puha párnával vagy anélkül, valamint fedéllel vagy fedél nélkül. A puha párnák különböző színekben kaphatók. A fedél, a bide és a puha párnák tartozékként külön is kaphatók.

JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK:

A KING oldalsó rögzítő rendszerrel ellátott magasított WC-ülőke termékcsalád termékei az idősek, a kerekesszéket használók, mozgáskorlátozottak, valamint mindazok számára készültek, akiknek nehézséget okozhat a WC-re való leülés és az onnan való felállás. A használat során önállóan kell tudni ülni. A termék használatára ülés közben fellépő érzékelési zavarok vagy egyensúlyi problémák esetén nem ajánlott.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK:

- A szerelési útmutatóban megadott maximális felhasználói súly nem léphető túl.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék stabilan van-e rögzítve a WC-re, és megfelelően rögzítve van-e a mellékelt rögzítőszerrel.
- Győződjön meg róla, hogy a puha párna (ha megvásárolta) megfelelően illeszkedik az ülésre.

- A puha párna helye­yezése elő­tt ellenőrizze, hogy az ülés tiszta és száraz-e.
- Az összer­ze­re­lés so­rán szigorúan tartsa be a Használati Útmutató előírásait.
- A terméket és annak alkatrészeit semmilyen módon ne módosítsa.
- Ne használja a terméket, ha az sérült vagy bármilyen módon megváltozott.
- Győződjön meg arról, hogy a termék magassága megfelelő ahhoz, hogy a felhasználó biztonságosan és kényelmesen használhassa.
- Használat közben kerülje az olyan testhelyzeteket, amelyek túlzott előredőlést eredményeznek. A helytelen testtartás instabilitást és a termék felborulását okozhatja.
- A terméket és tartozékait nem szabad kültéren tárolni.
- Az összer­ze­re­lés so­rán megnövekedhet az ujjak sérülésének kockázata.
- A terméket csak az eredeti rendeltetésének megfelelően használja.
- A fertőzés elkerülése érdekében kerülje a közvetlen érintkezést nyílt sebekkel vagy sérült bőrrel.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK:

A termék karbantartása tisztítási és fertőtlenítési eljárásokból áll. A biztonságos használat és a megfelelő higiéniai színvonal garantálása érdekében a felhasználónak minden használat előtt el kell végeznie ezeket az eljárásokat. A felhasználónak meg kell győződnie a készülék és alkatrészeinek szerkezeti épségéről, és ellenőrizni kell a csavarok szorosságát. A tisztítási és fertőtlenítési eljárásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Vegyen fel kesztyűt
2. A legpontosabb fertőtlenítés megkezdése előtt távolítsa el a nyilvánvaló szennyeződéseket.
3. A tisztításhoz használjon vizet vagy nem agresszív tisztítószer.
4. Száraz és tiszta ruhával törölje le.

Alternatív megoldásként a termék háztartási mosogatógépben is tisztítható a maximális hőmérsékleten. A puha párnát szigorúan kézzel kell tisztítani.

ÚJRAFELHASZNÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK:

A termék alkalmas más felhasználók általi újrafelhasználásra. Mielőtt mások újra felhasználnák, a terméket megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. A termék másnak történő átadása előtt a terméket szakképzett kereskedőknek ellenőrizniük kell.

HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS:

Ne dobja a terméket a szokásos háztartási hulladékba. Előzetesen érdeklődjön a helyi hatóságnál a helyes és környezetbarát ártalmatlanítási módról.

INCIDENSEK JELENTÉSE:

Ha a készülékkel kapcsolatban súlyos incidens történik, forduljon a termék gyártójához a következő címen info@kingbathrooms.com és az országában illetékes hatósághoz.

KING ÎNĂLTĂTOR WC
CU SISTEM DE BLOCĂRE LATERALĂ



MOD DE UTILIZARE:

Produsele din gama *Înăltător wc cu Sistem de Blocare Laterală KING* sunt concepute pentru a crește înălțimea vasului de toaletă pentru a facilita procedurile de așezare și de ridicare și pentru a promova independența și confortul. Modelele prevăzute cu colac moale oferă un confort sporit al scaunelor, făcându-le moi și confortabile. În plus, suprafața cu striatii al colacului oferă mai multă fricțiune și stabilitate. Produsul este disponibil în diferite configurații, cu sau fără colac moale și cu sau fără capac. Colacele moi sunt disponibile în diferite culori. Capacul, bideul și colacele moi sunt, de asemenea, disponibile separat ca accesorii.

INDICAȚII ȘI CONTRAINDICAȚII:

Produsele din linia cu Înăltător wc cu Sistem de Blocare Laterală KING se adresează persoanelor în vârstă, utilizatorilor de scaune cu rotile, persoanelor cu mobilitate redusă a zonei lombare, a genunchilor sau a soldurilor, precum și tuturor celor care ar putea avea dificultăți în a se așeza și a se ridica de pe vasul de toaletă. Modelele prevăzute cu colac moale își schimbă forma în timpul șezutului, mărind suprafața de sprijin a utilizatorului și permitând o mai bună distribuție a greutății. Acest lucru face ca aceste versiuni să fie deosebit de potrivite în cazul în care utilizatorul suferă de răni de decubit sau de boli care le-ar putea provoca, cum ar fi diabetul. În timpul utilizării, este necesară capacitatea de a sta jos în mod independent. Nu se recomandă utilizarea produsului în cazul tulburărilor de percepție sau al problemelor de echilibru în timpul șederii.

AVERTISMENTE ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ:

- Greutatea maximă a utilizatorului indicată în instrucțiunile de montare nu trebuie depășită.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că produsul se află într-o poziție stabilă pe WC și că este fixat corect pe acesta cu ajutorul sistemului de blocare furnizat.
- Asigurați-vă că colacul moale (dacă a fost achiziționată) aderă corect pe înăltător.
- Înainte de a pune colacul moale, asigurați-vă că înăltătorul este curat și uscat.
- În timpul asamblării, respectați cu strictețe indicațiile din manualul de utilizare.
- Nu modificați produsul și componentele acestuia în niciun fel.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau modificat în vreun fel.
- Asigurați-vă că înălțimea produsului este de așa natură încât să fie ușor și sigur pentru utilizator.
- În timpul utilizării, evitați pozițiile care mențin greutatea corpului prea mult în față. Pozițiile greșite pot duce la instabilitatea și răsturnarea produsului.
- Produsul și accesoriiile nu trebuie să fie depozitate în aer liber.

- Riscul de leziuni la nivelul degetelor poate crește în timpul procesului de asamblare.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
- Evitați contactul direct cu răni deschise sau piele deteriorată pentru a preveni infecțiile.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA:

Întreținerea produsului constă în proceduri de curățare și igienizare. Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare. Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale și trebuie verificată etanșeitatea șuruburilor. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați următorii pași:

1. Trebuie să se poarte mănuși.
2. Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a trece la dezinfectia riguroasă.
3. Utilizați apă sau detergent neagresiv pentru procedura de curățare.
4. Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.

Alternativ, produsul poate fi spălat în mașinile de spălat vase de uz casnic la temperatura maximă. Colacul moale trebuie curățat strict manual.

CERINȚELE PENTRU REFOLOSIRE:

Produsul poate fi refolosit de alți utilizatori. Înainte de a fi refolosit de alte persoane, produsul trebuie spălat și dezinfectat corect. Înainte de transferul produsului către alte persoane, produsul trebuie verificat de către distribuitorii calificați.

PROCEDURA CORECTĂ DE ELIMINARE:

Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite. Adresați-vă în prealabil autorităților locale pentru a afla care este modalitatea corectă și ecologică de a le elimina.

RAPORTAREA INCIDENTELOR:

Raportați orice fel de neconformitate a produsului, contactați producătorul produsului la adresa de e-mail info@kingbathrooms.com și autoritatea responsabilă din țara dumneavoastră.

KING НАСАДКА НА УНИТАЗ
З БІКОВОЮ СИСТЕМОЮ БЛОКУВАННЯ



ПРИЗНАЧЕННЯ.

Вироби серії *Raised Toilet Seat with Lateral Locking System KING* призначені для збільшення висоти унітазу, щоб полегшити процедуру сидіння та вставання, а також сприяти незалежності та комфорту. Моделі з м'якою подушкою підвищують комфорт під час сидіння, додаючи затишку. Крім того, зморшкувата поверхня подушки забезпечує більше тертя і стабільність. Виріб поставляється в різних конфігураціях, з м'якою подушкою або без неї, з кришкою або без неї. М'які подушки доступні в різних кольорах. Кришка, біде та м'які подушки також доступні окремо як аксесуари.

ПОКАЗАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ.

Вироби серії *Raised Toilet Seat with Lateral Locking System KING* призначені для людей похилого віку, людей на інвалідних візках, людей з обмеженою рухливістю поперекового, колінного або тазостегнового суглобів, а також для всіх тих, кому важко сидіти і вставати з унітазу. Моделі з м'якою подушкою деформуються під час сидіння, збільшуючи поверхню опори для користувача і забезпечуючи кращий розподіл ваги. Це робить ці моделі найбільш вдалим варіантом для тих, хто страждає від пролежнів або захворювань, які можуть їх викликати, наприклад, діабету. Під час використання необхідна здатність самостійно сидіти. Не рекомендується використовувати виріб у разі порушень сприйняття або проблем з рівновагою в положенні сидячи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ІНСТРУКЦІЇ:

- Максимальна вага користувача, зазначена в інструкціях з монтажу, не повинна перевищуватися.
- Перед кожним використанням переконайтеся, що виріб стабільно розташований на унітазі та правильно зафіксований за допомогою наданої системи блокування.
- Переконайтеся, що м'яка подушка (якщо придбана) правильно встановлена на сидінні.
- Перед встановленням м'якої подушки переконайтеся, що сидіння чисте та сухе.
- Під час монтажу строго дотримуйтесь інструкцій, наведених у Керівництві користувача.
- Не змінюйте виріб і його компоненти будь-яким чином.
- Не використовуйте виріб, якщо він пошкоджений або змінений будь-яким способом.
- Переконайтеся, що висота виробу дозволяє його зручне та безпечне використання.
- Під час використання уникайте положень, при яких вага тіла надмірно нахилиється вперед. Неправильне положення може спричинити нестабільність і перекидання виробу.
- Виріб та аксесуари не можна зберігати на відкритому повітрі.
- Під час монтажу може підвищуватися ризик травмування пальців.
- Не використовуйте виріб для інших цілей, крім передбачених.
- Щоб уникнути інфекцій, уникайте прямого контакту з відкритими ранами або пошкодженою шкірою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Технічне обслуговування виробу складається з процедур очищення й санітарної обробки. Для забезпечення безпечного використання й належного рівня гігієни, користувач повинен виконувати ці процедури перед кожним використанням. Користувач повинен переконатися в структурній цілісності виробу і його компонентів, а також перевірити затягування гвинтів. Для

очищення й санітарної обробки виконайте наведені нижче дії.
1. Вдягніть рукавички.
2. Перш ніж приступати до повної дезінфекції, видаліть видимі забруднення.
3. Для очищення використовуйте воду або неагресивний миючий засіб.
4. Протріть сухою і чистою ганчіркою.
Крім того, виріб можна мити в побутових посудомийних машинах при максимальній температурі. М'яку подушку потрібно чистити виключно вручну.

ВИМОГИ ДО ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Виріб придатний для повторного використання іншими користувачами. Перед повторним використанням виріб необхідно належним чином очистити й продезінфікувати. Перед передачею виробу іншим особам, виріб повинен бути перевірений кваліфікованими дилерами.

ПРАВИЛЬНА ПРОЦЕДУРА УТИЛІЗАЦІЇ.
Забороняється викидати виріб разом зі звичайними побутовими відходами. Заздалегідь поцікавтеся у місцевому органі влади про правильний та екологічно безпечний спосіб утилізації.

ЗВІТУВАННЯ ПРО ІНЦИДЕНТИ.
У разі серйозного інциденту, пов'язаного з цим виробом, зверніться до виробника за адресою info@kingbathrooms.com та до відповідального органу у вашій країні.

KING ZVÝŠENOU ZÁCHODOVOU DOSKOU S BOČNÝM UZAMYKACÍM SYSTÉMOM

URČENÉ POUŽITIE:
Výrobky z radu *KING* so *Zvýšenou Záchodovou Doskou s Bočným Uzamykacím Systémom* sú navrhnuté tak, aby zvýšili výšku záchodovej misy, uľahčili sedenie a vstávanie a podporili nezávislosť a pohodlie. Modely s mäkkým vankúšom poskytujú vyšší komfort sedenia, vďaka čomu sú mäkké a príjemné. Okrem toho zvrásnený povrch vankúša poskytuje väčšie trenie a stabilitu. Výrobok sa dodáva v rôznych konfiguráciách, s mäkkým vankúšom alebo bez neho a s poklopom alebo bez. Mäkké vankúše sú k dispozícii v rôznych farbách. Poklop, bidet a mäkké vankúše sú k dispozícii aj samostatne ako príslušenstvo.

INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE:
Výrobky z radu *KING* so *Zvýšenou Záchodovou Doskou s Bočným Uzamykacím Systémom* sú určené starším ľuďom, osobám na invalidnom vozíku, ľuďom so zníženou pohyblivosťou bedrovej, kolennej alebo bedrovej oblasti a všetkým, ktorí môžu mať ťažkosti pri sedení a vstávaní z toaletnej misy. Modely s mäkkým vankúšom sa počas sedenia deformujú, čím zväčšujú opornú plochu používateľa a umožňujú lepšie rozloženie hmotnosti. Vďaka tomu sú tieto verzie obzvlášť vhodné, ak používateľ trpí preležaninami alebo chorobami, ktoré by ich mohli spôsobiť, napríklad cukrovkou. Počas používania sa vyžaduje schopnosť samostatne sedieť. Používanie výrobku v prípade porúch vnímania alebo problémov s rovnováhou pri sedení sa neodporúča.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY:
• Maximálna hmotnosť používateľa uvedená v montážnych pokynoch nesmie byť prekročená.
• Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok stabilne umiestnený na toalete a správne upevnený dodaným uzamykacím systémom.
• Uistite sa, že mäkký vankúš (ak bol zakúpený) je správne umiestnený na sedadle.
• Pred aplikáciou mäkkého vankúša sa uistite, že sedadlo je čisté a suché.
• Počas montáže dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v Používateľskej príručke.
• Výrobok ani jeho súčasti nijako neupravujte.
• Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo akýmkoľvek spôsobom zmenený.
• Uistite sa, že výška výrobku umožňuje používateľovi jednoduché a bezpečné používanie.
• Počas používania sa vyhýbajte polohám, pri ktorých je telesná hmotnosť príliš naklonená dopredu. Nesprávne držanie tela môže spôsobiť nestabilitu a prevrátenie výrobku.
• Výrobok a príslušenstvo nesmú byť skladované vo vonkajšom prostredí.
• Počas montáže môže byť zvýšené riziko poranenia prstov.
• Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
• Aby ste predišli infekcii, vyhýbajte sa priamemu kontaktu s otvorenými ranami alebo poškodenou pokožkou.

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE:
Údržba výrobku pozostáva z čistiaciach a hygienických postupov. Aby sa zaručilo bezpečné používanie a primeraný hygienický štandard, používateľ by mal tieto postupy vykonať pred každým použitím. Používateľ sa musí presvedčiť o konštrukčnej celistvosti zariadenia a jeho komponentov a musí skontrolovať tesnosť skrutiek. Pri čistení a sanitácii postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Mali by ste mať na rukách rukavice.
 2. Odstráňte zjavné nečistoty skôr, ako prístupíte k čo najpresnejšej dezinfekcii.
 3. Na čistenie používajte vodu alebo neaгресивný čistiaci prostriedok.
 4. Utierajte suchou a čistou handričkou.
- Prípadne je možné výrobok umývať v domácich umývačkách riadu pri maximálnej teplote. Mäkký vankúš sa musí čistiť výhradne ručne.**

POŽIADAVKY NA OPĀTOVNÉ POUŽITIE:
Výrobok je vhodný na opätovné použitie inými používateľmi. Pred opätovným použitím inými osobami

musí byť výrobok správne vyčistený a dezinfikovaný. Pred odovzdaním výrobku iným osobám musí byť výrobok skontrolovaný kvalifikovanými predajcami.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDÁCIE:
Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Vopred sa informujte na miestnom úrade o správnom a ekologickom spôsobe likvidácie.

NAHLASOVANIE INCIDENTOV:
Ak dôjde k závažnej udalosti týkajúcej sa tohto zariadenia, kontaktujte výrobcu tohto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a príslušný orgán vo vašej krajine.

KING ZVÝŠENÝCH ZÁCHODOVÝCH PRKÉNEK S BOČNÍM UZAMYKACÍM SYSTÉMEM

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
Výrobky řady *zvýšených záchodových prkének s bočním uzamykacím systémem KING* jsou navrženy tak, aby zvyšovaly výšku záchodové mísy, usnadňovaly sezení a vstávání a podporovaly nezávislost a pohodlí. Modely s měkkým sedákem nabízejí větší pohodlí prkénka, které je měkké a komfortní. Kromě toho zvrásněný povrch sedáku zajišťuje větší tření a stabilitu. Výrobek se dodává v různých konfiguracích, s měkkým sedákem nebo bez něj a s poklopem nebo bez něj. Měkké sedáky jsou k dispozici v různých barvách. Víko, bidet a měkké sedáky jsou k dispozici také samostatně jako příslušenství.

INDIKACE A KONTRAINDIKACE:
Výrobky řady *zvýšených záchodových prkének s bočním uzamykacím systémem KING* jsou určeny starším lidem, vozíčkářům, lidem se sníženou pohyblivostí bederní, kolenní nebo kyčelní oblasti a všem, kteří mohou mít potíže se sezením a vstáváním z toaletní mísy. Modely s měkkým sedákem se při sezení deformují, čímž se zvětšuje opěrná plocha pro uživatele a umožňuje lepší rozložení hmotnosti. Díky tomu jsou tyto verze vhodné zejména v případě, že uživatel trpí proleženinami nebo nemocemi, které by je mohly způsobit, jako je například cukrovka. Během používání je vyžadována schopnost samostatného sezení. Používání výrobku v případě poruch vnímání nebo problémů s rovnováhou při sezení se nedoporučuje.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INDIKACE:
• Maximální hmotnost uživatele uvedená v montážních pokynech nesmí být překročena.
• Před každým použitím se ujistěte, že je výrobek stabilně umístěn na toaletě a správně upevněn dodaným upevňovacím systémem.
• Ujistěte se, že měkký polštář (pokud byl zakoupen) správně obepíná sedátko.
• Před nasazením měkkého polštáře se ujistěte, že je sedátko čisté a suché.
• Při montáži se důsledně řiďte pokyny uvedenými v Uživatelské příručce.
• Neměňte výrobek ani jeho součásti žádným způsobem.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo jakkoli upravený.
• Ujistěte se, že výška výrobku je vhodná pro snadné a bezpečné používání uživatelem.
• Při používání se vyhněte polohám, při kterých je tělesná hmotnost příliš nakloněna dopředu. Nesprávné držení těla může vést k nestabilitě a převrácení výrobku.
• Výrobek a příslušenství nesmí být skladovány venku.
• Během montáže může být zvýšené riziko poranění prstů.
• Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
• Vyhněte se přímému kontaktu s otevřenými ranami nebo porušenou kůží, aby se zabránilo infekci.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ:
Údržba výrobku spočívá v čištění a sanitaci. Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by uživatel před každým použitím provést tyto kroky. Uživatel se musí ujistit o konstrukční celistvosti zařízení a jeho součástí a musí zkontrolovat těsnost šroubů. Při čištění a sanitaci postupujte podle následujících pokynů:

1. Používejte rukavice.
 2. Před zahájením co nejdůkladnější dezinfekce odstraňte viditelné nečistoty.
 3. K čištění používejte vodu nebo neaгресивní čisticí prostředky.
 4. Otřete je suchým a čistým hadříkem.
- Prípadně lze výrobek čistiť v domácich myčkách nádobí při maximální teplotě. Měkký sedák se musí čistiť výhradne ručně.**

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ:
Výrobek je vhodný pro opakované použití jinými uživateli. Před dalším použitím musí být výrobek řádně vyčištěn a vydezinfikován. Před předáním výrobku jiným osobám musí být výrobek zkontrolován kvalifikovanými prodejci.

SPRÁVNÝ POSTUP LIKVIDACE:
Výrobek nevyhadzujte do běžného domovního odpadu. Informujte se předem na místním úřadě o správném a ekologickém způsobu likvidace.

HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:
Dojde-li u tohoto zařízení k závažnému incidentu, kontaktujte výrobce tohoto výrobku na adrese info@kingbathrooms.com a příslušný úřad ve vaší zemi.

KING NASADEK TOALETOWYCH

Z BOCZNYM SYSTEMEM BLOKOWANIA

PL

PRZEZNACZENIE:

Produkty z linii *nasadek toaletowych KING z bocznym systemem blokowania* zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wysokości muszli klozetowej, aby ułatwić siadanie i wstawanie oraz promować niezależność i wygodę. Modele wyposażone w miękką poduszkę zapewniają lepszy komfort siedzenia, dzięki czemu są miękkie i przytulne. Ponadto chropowata powierzchnia poduszki zapewnia większe tarcie i stabilność. Produkt jest dostępny w różnych konfiguracjach, z miękką poduszką lub bez oraz z pokrywą lub bez. Miękkie poduszki są dostępne w różnych kolorach. Pokrywa, bidet i miękkie poduszki są również dostępne osobno jako akcesoria.

WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA:

Produkty z linii *nasadek toaletowych KING z bocznym systemem blokowania* przeznaczone są dla osób starszych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z ograniczoną ruchomością odcinka lędźwiowego kręgosłupa, kolan lub bioder, a także dla wszystkich tych, którzy mogą mieć trudności z siadaniem i wstawaniem z muszli klozetowej. Modele wyposażone w miękką poduszkę odkształcają się podczas siedzenia, zwiększając powierzchnię podparcia użytkownika i umożliwiając lepsze rozłożenie ciężaru. Sprawia to, że wersje te są szczególnie odpowiednie, jeśli użytkownik cierpi na odleżyny lub choroby, które mogą je powodować, takie jak cukrzyca. Podczas użytkowania wymagana jest zdolność do samodzielnego siedzenia. Nie zaleca się korzystania z produktu w przypadku zaburzeń percepcji lub problemów z równowagą podczas siedzenia.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I WSKAZÓWKI:

- Maksymalna waga użytkownika podana w instrukcji montażu nie może zostać przekroczona.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że produkt jest stabilnie umieszczony na toalecie i prawidłowo zamocowany za pomocą dołączonego systemu blokującego.
- Upewnij się, że miękką poduszkę (jeśli została zakupiona) jest prawidłowo umieszczona na siedzeniu.
- Przed założeniem miękkiej poduszki upewnij się, że siedzisko jest czyste i suche.
- Podczas montażu ściśle przestrzegaj instrukcji zawartych w Podręczniku Użytkownika.
- Nie modyfikuj produktu ani jego części w żaden sposób.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub w jakikolwiek sposób zmieniony.
- Upewnij się, że wysokość produktu umożliwia bezpieczne i wygodne użytkowanie.
- Podczas użytkowania unikaj pozycji, w których ciężar ciała jest zbyt mocno pochylony do przodu. Nieprawidłowa postawa może prowadzić do niestabilności i przewrócenia się produktu.
- Produkt i akcesoria nie mogą być przechowywane na zewnątrz.
- Podczas montażu istnieje zwiększone ryzyko urazów palców.
- Nie używaj produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Aby zapobiec infekcjom, unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą.

INFORMACJE O KONSERWACJI:

Konserwacja produktu obejmuje procedury czyszczenia i odkażania. Aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie i odpowiedni standard higieny, użytkownik powinien wykonać te procedury przed każdym użyciem. Użytkownik musi upewnić się co do integralności strukturalnej urządzenia i jego komponentów, a także sprawdzić dokręcenie śrub. W przypadku procedur czyszczenia i odkażania należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Należy założyć rękawice ochronne.
2. Przed przystąpieniem do dokładniejszej dezynfekcji, najpierw należy usunąć widoczne zabrudzenia.
3. Do czyszczenia należy używać wody lub nieagresywnego detergentu.
4. Przetrzeć suchą i czystą szmatką.

Alternatywnie, produkt może być czyszczony w domowych zmywarkach w maksymalnej temperaturze. Miękką poduszkę należy czyścić wyłącznie ręcznie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO UŻYCIA:

Produkt nadaje się do ponownego użycia przez innych użytkowników. Przed ponownym użyciem przez inne osoby produkt musi zostać prawidłowo wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed przekazaniem produktu innym osobom produkt musi zostać sprawdzony przez wykwalifikowanych sprzedawców.

PRAWIDŁOWA PROCEDURA UTYLIZACJI:

Nie wyrzucać produktu do zwykłych odpadów domowych. Należy wcześniej zapytać lokalne władze o prawidłowy i przyjazny dla środowiska sposób utylizacji

ZGŁASZANIE INCYDENTÓW:

W przypadku poważnego incydentu związanego z użytkowaniem tego produktu należy skontaktować się z producentem tego produktu pod adresem info@kingbathrooms.com oraz odpowiedzialnym organem w danym kraju.

KING TABUREŠU

FIKSĒTS VAI REGULĒJAMS AUGSTUMS

LV

PAREDŽĒTAIS LIETOJUMS:

Produkty no KING Paaugstināto tualetes poda sēdekļu ar sānu fiksācijas sistēmu līnijas ir paredzēti

tualetes poda augstuma palielināšanai, lai atvieglotu apsēšanās un piecelšanās procedūras un veicinātu neatkarību un komfortu. Modeļi ar mikstu spilvenu nodrošina uzlabotu sēdekļa komfortu, padarot tos mikstus un omulīgus. Turklāt spilvena rievainā virsma nodrošina lielāku berzi un stabilitāti. Produkts pieejams dažādās konfigurācijās - ar mikstu spilvenu vai bez tā, kā arī ar vāku vai bez tā. Mikstie spilveni ir pieejami dažādās krāsās. Vāks, bidē un mikstie spilveni ir pieejami arī atsevišķi kā aksesuāri.

INDIKĀCIJAS UN KONTRINDIKĀCIJAS:

Produkty no KING Paaugstināto tualetes poda sēdekļu ar sānu blokēšanas sistēmu līnijas ir paredzēti vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ratināties, cilvēkiem ar ierobežotām kustībām jostas, cēlgali vai gužu rajonā, kā arī visiem tiem, kam varētu būt grūtības apsēties uz un piecelties no tualetes poda. Modeļi ar miksto spilvenu sēdēšanas laikā deformējas, palielinot lietotāja atbalsta virsmu un ļaujot labāk sadalīt svaru. Tāpēc šīs versijas ir īpaši piemērotas, ja lietotājs cieš no izglējumiem vai slimībām, kas var tādus izraisīt, piemēram, diabēts. Lietotājam ir jāspēj patstāvīgi saglabāt sēdus pozīciju. Produktu nav ieteicams lietot, ja ir uztveres traucējumi vai līdzsvara problēmas sēdus pozīcijā.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI UN NORĀDĪJUMI:

- Montāžas instrukcijā norādītais maksimālais lietotāja svars nedrīkst tikt pārsniegts.
- Pirms katras lietošanas pārlicinieties, ka produkts ir stabili novietots uz tualetes poda un pareizi piestiprināts ar pievienoto blokēšanas sistēmu.
- Pārlicinieties, ka mikstais spilvens (ja iegādāts) ir pareizi novietots uz sēdekļa.
- Pirms mikstā spilvena uzlikšanas pārlicinieties, ka sēdekļi ir tīrs un sauss.
- Montāžas laikā stingri ievērojiet Lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Nekādā veidā nemainiet produktu un tā komponentus.
- Nelietojiet produktu, ja tas ir bojāts vai mainīts jebkāda veidā.
- Pārlicinieties, ka produkta augstums ir piemērots lietotājam ērtai un drošai lietošanai.
- Lietošanas laikā izvairieties no pozīcijām, kurās ķermeņa svars tiek pārāk virzīts uz priekšu. Nepareizas pozas var izraisīt nestabilitāti un produkta apgāšanos.
- Produkts un tā piederumi nedrīkst tikt glabāti ārpus telpām.
- Montāžas laikā var palielināties pirkstu trauma risks.
- Nelietojiet produktu citiem mērķiem, nekā tas paredzēts.
- Lai novērstu infekcijas risku, izvairieties no tieša kontakta ar atvērtām brūcēm vai bojātu ādu.

INFORMĀCIJA PAR APKOPI:

Izstrādājuma apkope sastāv no tīrīšanas un sanitārām procedūrām. Lai garantētu drošu lietošanu un atbilstošus higiēnas standartus, lietotājam šīs procedūras jāveic pirms katras lietošanas reizes. Lietotājam jāpārlicinās par ierīces un tās sastāvdaļu konstrukcijas integritāti, kā arī jāpārbauda skrūvju pievilkuma ciešums. Lai veiktu tīrīšanas un sanitārās procedūras, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Lietojiet cimdus.
2. Notīriet redzamos netīrumus pirms sīkākas dezinfekcijas veikšanas.
3. Tīrīšanas procedūrai izmantojiet ūdeni vai saudzējošu mazgāšanas līdzekli.
4. Noslaukiet ar sausu un tīru drānu.

Izstrādājumu var mazgāt arī sadzīves trauku mazgājamajās mašīnās, pie maksimālās temperatūras. Mikstais spilvens jātīra tikai ar rokām.

PRASĪBAS ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI:

Izstrādājums ir piemērots tam, lai to atkārtoti izmantotu citi lietotāji. Pirms izstrādājuma atkārtoti izmantot citi, tas ir pareizi jānotīra un jādezinficē. Pirms produkta nodošanas citiem, produkts jāpārbauda kvalificētiem izplatītājiem.

PAREIZA NODOŠANAS ATKRITUMOS PROCEDŪRA:

Neizmetiet produktu parastajos sadzīves atkritumos. Pirms izmešanas, noskaidrojiet vietējās pašvaldības iestādēs, kā atbrīvoties no tā pareizā un videi draudzīgā veidā.

ZIŅOŠANA PAR NEGADĪJUMIEM:

Ja noticis nopietns, ar šo ierīci saistīts negadījums, sazinieties ar šī produkta ražotāju pa tālruni info@kingbathrooms.com un atbildīgo iestādi savā valstī.

KING POTIKÖRGENDUSED

KÜLGMISE LUKUSTUSSÜSTEEMIGA

EE

ETTENÄHTUD KASUTUSVIIS:

KING sarja külgmise lukustussüsteemiga potikõrgendused on mõeldud tualetipoti kõrguse suurendamiseks, et hõlbustada istumise ja püsti tõusmise protseduure ning edendada iseseisvust ja mugavust. Pehmendusega varustatud mudelid pakuvad paremat istumemugavust, muutes need pehmeks ja mõnusamaks. Lisaks sellele tagab padja kortsuline pind suurema hõõrdumise ja stabiilsuse. Toode on saadaval erinevates konfiguratsioonides, pehmendusega või ilma ning kaanega või ilma. Pehmendused on saadaval erinevates värvitoonides. Kaaned, bideed ja pehmendused on saadaval ka eraldi lisatarvikutena.

NÄIDUSTUSED JA VASTUNÄIDUSTUSED:

KING tootesarja külgmise lukustussüsteemiga potikõrgendused on suunatud eakatele inimestele, ratastooli kasutajatele, inimestele, kellel on piiratud liikumisvõime nimmel, põlvedel või puusadel, ja kõigile neile, kellel võib olla raskusi tualetipotile istumise ja üles tõusmisega. Istumise ajal pehmendusega varustatud mudelid deformeeruvad, suurendades seeläbi kasutaja toetuspinna ja

võimaldades paremat kehakaalu jaotumist. See muudab need mudelid eriti sobivaks kasutajatele, kes kannatavad haavandite või neid põhjustada võivate haiguste, näiteks diabeedi all. Toote kasutamiseks on vaja iseseisvat istumisvõimet. Toodet ei soovitata kasutada istumise ajal esinevate tajuhäirete või tasakaaluprobleemide korral.

OHUTUSHOIATUSED JA KASUTUSJUHISED:

- Paigaldusjuhistes märgitud maksimaalselt kasutaja kaalu ei tohi ületada.
- Enne igat kasutamist veenduge, et toode on tualetil stabiilselt paigaldatud ja kinnitatud kaasasoleva lukustussüsteemiga.
- Veenduge, et pehme padi (kui ostetud) on õigesti paigaldatud istmele.
- Enne pehme padi paigaldamist veenduge, et iste on puhas ja kuiv.
- Järgige kokkupaneku ajal rangelt kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- Ärge muutke toodet ega selle komponente mingil viisil.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või muudetud.
- Veenduge, et toote kõrgus võimaldab lihtsat ja ohutut kasutamist.
- Kasutamise ajal vältige kehahoide, kus keharaskus on liiga palju ettepoole suunatud.
- Vale asend võib põhjustada toote ebastabiilsust ja ümberkukkumist.
- Toodet ja selle tarvikuid ei tohi hoiustada välitingimustes.
- Kokku panemisel võib sõrmede vigastamise oht suureneda.
- Ärge kasutage toodet muul otstarbel kui ettenähtud kasutuseks.
- Infektsiooni vältimiseks vältige otsest kokkupuudet avatud haavade või kahjustatud nahaga.

HOOLDUSINFO:

Toote hooldus koosneb puhastus- ja sanitaarprotseduuridest. Ohutu kasutamise ja piisava hügieenistandardi tagamiseks peaks kasutaja neid protseduure läbi viima enne igat kasutuskorda. Kasutaja peab veenduma seadme ja selle komponentide konstruktsiooni terviklikkuses ning kontrollima, et kruvid oleks tihedasti kinni. Puhastus- ja sanitaarprotseduuride puhul järgige alljärgnevat samme:

1. Kandke kindaid.
2. Enne desinfitseerimise jätkamist eemaldage kõigepealt ilmne mustus.
3. Kasutage puhastamiseks vett või mitteagressiivset puhastusvahendit.
4. Pühkige kuiva ja puhta lapiga.

Alternatiivina võib toodet puhastada kodumajapidamises kasutatavas nõudepesumasinas maksimaalsel temperatuuril. Pehmendust tuleb rangelt puhastada käsitsi.

KORDUVKASUTUSE NÕUDED:

Toode sobib korduvkasutamiseks teistele kasutajatele. Enne taaskasutamist tuleb toode nõuetekohaselt puhastada ja desinfitseerida. Enne toote üleandmist teistele peab toode olema kontrollitud kvalifitseeritud edasimüüjate poolt.

ÕIGE JÄÄTMEKÄITLUS:

Ärge visake toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Küsige oma kohalikult omavalitsuselt, kuidas see õigesti ja keskkonnasõbralikult kõrvaldada.

VAHEJUHTUMITEST TEATAMINE:

Kui selle seadmega on toimunud tõsine vahejuhtum, võtke ühendust toote tootjaga aadressil info@kingbathrooms.com ja oma riigi vastutava asutusega.

KING TABURETÈS

FIKSUOTAS ARBA REGULIUOJAMAS AUKŠTIS



NAUDOJIMO PASKIRTIS:

„KING“ linijos pakeliama klozeto sėdynė su šonine fiksavimo sistema gaminiai skirti padidinti klozeto aukštį, kad būtų lengviau atsisėsti ir atsikelti, taip pat skatinti savarankiškumą ir patogumą. Modeliuose su minkšta pagalvėle užtikrinamas geresnis sėdėjimo komfortas, todėl jie yra minkšti ir jaukūs. Be to, raukšlėtas pagalvėlės paviršius užtikrina didesnę trintį ir stabilumą. Gaminys gali būti įvairių konfigūracijų: su minkšta pagalvėle arba be jos, su dangčiu arba be jo. Minkštos pagalvėlės yra įvairių spalvų. Dangtį, bidė ir minkštas pagalvėles taip pat galima įsigyti atskirai kaip priedus.

INDIKACIJOS IR KONTRAIKACIJOS:

„KING“ linijos pakeliama klozeto sėdynė su priekine fiksavimo sistema“ gaminiai skirti pagyvenusiems žmonėms, neįgaliųjų vežimėlių naudotojams, žmonėms, kurių juosmens, kelių ar klubų sąnarių judrumas yra ribotas, ir visiems tiems, kuriems gali būti sunku atsisėsti ir pakilti nuo klozeto. Modeliai su minkštomis pagalvėlėmis deformuojasi sėdint, todėl padidėja naudotojo atramos paviršius ir geriau pasiskirsto svoris. Dėl to šios versijos ypač tinka, jei naudotojas turi pragulų atsiradimo riziką arba ligų, kurios gali jas sukelti, pavyzdžiui, diabeto. Naudojimo metu reikia gebėti savarankiškai sėdėti. Nerekomenduojama naudoti gaminio esant suvokimo sutrikimams ar pusiausvyros sutrikimams sėdint.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR NURODYMAI:

- Negalima viršyti montavimo instrukcijose nurodyto didžiausio naudotojo svorio.
- Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad gaminys stabiliai pritvirtintas prie klozeto ir tinkamai

užfiksuotas pridedama užrakto sistema.

- Įsitikinkite, kad minkšta pagalvėlė (jei įsigyta) yra tinkamai uždėta ant sėdynės.
- Prieš uždedant minkštą pagalvėlę, įsitikinkite, kad sėdynė yra švari ir sausa.
- Montavimo metu griežtai laikykitės Naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
- Nekeiskite gaminio ir jo sudedamųjų dalių jokia būdu.
- Nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas arba pakeistas bet koku būdu.
- Įsitikinkite, kad gaminio aukštis leidžia jį naudoti patogiai ir saugiai.
- Naudojimo metu venkite pozicijų, kuriose kūno svoris yra per daug palenktas į priekį. Netinkama laikysena gali sukelti nestabilumą ir gaminio apvirtimą.
- Gaminį ir jų priedų negalima laikyti lauke.
- Surinkimo metu gali padidėti pirštų susižalojimo rizika.
- Nenaudokite gaminio kitiems tikslams, nei numatyta.
- Siekiant išvengti infekcijos, venkite tiesioginio kontakto su atviromis žaizdomis ar pažeista oda.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA:

Produkto priežiūrą sudaro valymo ir sanitarijos procedūros. Kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir tinkamas higienos standartas, naudotojas turėtų atlikti šias procedūras prieš kiekvieną naudojimą. Naudotojas turi įsitikinti prietaiso ir jo sudedamųjų dalių konstrukcijos vientisumu ir patikrinti varžtų priveržimą. Valymo ir sanitarinio valymo procedūros atliekamos taip, kaip nurodyta toliau:

1. Reikėtų mūvėti pirštines.
2. Prieš atlikdami tiksliausią dezinfekciją, pašalinkite akivaizdžius nešvarumus.
3. Valymui naudokite vandenį arba neagresyvių ploviklių.
4. Nuvalykite sausa ir švaria šluoste.

Produktą galima plauti ir buitinėse indaplovėse, naudojant maksimalią temperatūrą. Minkštą pagalvėlę reikia valyti tik rankomis.

PAKARTOTINIO NAUDOJIMO REIKALAVIMAI:

Produktą galima pakartotinai naudoti kitiems naudotojams. Prieš pakartotinai panaudojant kitiems asmenims, gaminį reikia tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti. Prieš perduodant gaminį kitiems asmenims, gaminį turi patikrinti kvalifikuoti pardavėjai.


TEISINGA ŠALINIMO PROCEDŪRA:

Neišmeskite gaminio į įprastas buitines atliekas. Iš anksto pasiteiraukite vietos valdžios institucijos, kaip teisingai ir ekologiškai jį išmesti.


Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus

Jei įvyko rimtas incidentas, susijęs su šiuo prietaisu, kreipkitės į šio gaminio gamintoją adresu info@kingbathrooms.com ir su savo šalies atsakinga atstovą.

KING-5-KN
KING-10-KN
KING-15-KN

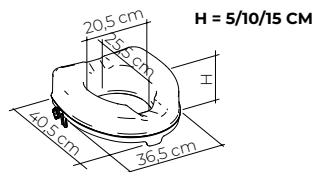

KING-5L-KN
KING-10L-KN
KING-15L-KN

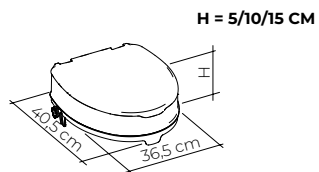

1



2



3




4



5



KING-5S02-KN
KING-10S02-KN
KING-15S02-KN

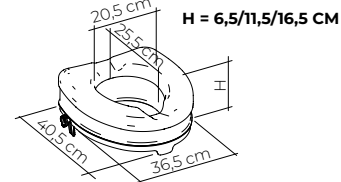


KING-5S04-KN
KING-10S04-KN
KING-15S04-KN

1



KING-5LS02-KN
KING-10LS02-KN
KING-15LS02-KN

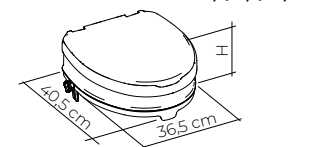

KING-5LS04-KN
KING-10LS04-KN
KING-15LS04-KN



2



3



4



5



6



7



MADE IN ITALY


CE MD



MADE IN ITALY

CE MD

KING-L-KN
KING-LS-KN

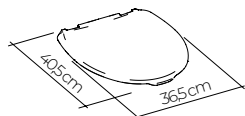

1




KING-L-KN




KING-LS-KN

2

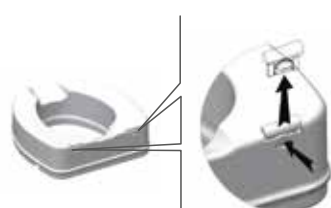


3

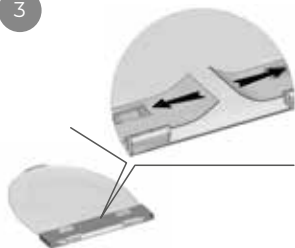

KING-L-KN

4

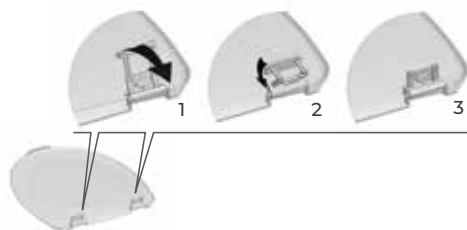

KING-LS-KN

5



KING-L-KN

KING-LS-KN

6



KING-L-KN


KING-LS-KN



MADE IN ITALY

CE MD

KING-BDT-KN

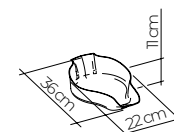

1



2




3



MADE IN ITALY

CE MD

KING-CRTS2-KN
KING-CRTS4-KN

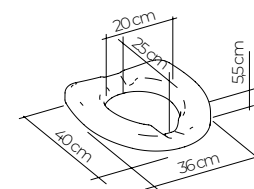

1



2







3



MADE IN ITALY

CE MD

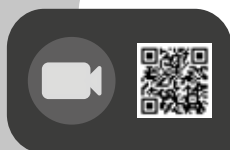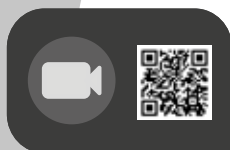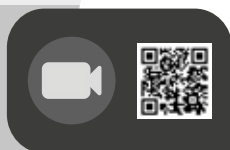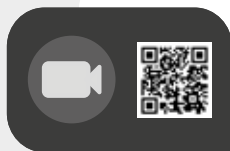

MANUFACTURED BY:



LM Global Design Limited
Suite 123, The Capel Building,
Mary's Abbey,
Dublin 7, D07 VY68, Ireland

KING DISTRIBUTORS:



www.kingbathrooms.com