

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę taboretu/stopnia pod kątem wszelkich uszkodzeń i widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
 - d. dolne nasadki nie uległy zużyciu - jeżeli tak, należy je wymienić;
 - e. żadne inne części ławki nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie taboretu/stopnia do wanny miękką szmatką i wodą z mydłem. Taboret/stopień po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
3. Do obowiązku użytkownika należy dbanie o stan techniczny taboretu/stopień i dokręcanie luzujących się śrub i nakrętek podczas normalnego użytkowania.



UWAGA! Do czyszczenia taboretu/stopnia nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

XI. PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

Taboret/stopień należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu unikać nadmiernej wilgoci, miejsc bardzo chłodnych lub bardzo gorących. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami i szybkim ich wahaniami oraz przed działaniem substancji chemicznych żrących - kwasów, zasad, które mogą uszkodzić elementy ramy lub regulacji.

TRANSPORT:

Taboret/stopień powinien być transportowany w oryginalnym opakowaniu producenta. Należy unikać układania ciężkich przedmiotów na taborecie. Elementy ruchome taboretu powinny być zabezpieczone przed samoistnym przemieszczaniem. Temperatura transportowania powinna wynosić od -10°C do +50°C, zaś wilgotność względna do 80%.

Po długim transporcie w niskiej temperaturze przed użyciem należy odczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową, by uniknąć kondensacji wilgoci.

XII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta, patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania wyrobu to 3 lata. Ten czas może być dłuższy lub krótszy zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu. Wyrób należy natychmiast wymienić w przypadku

- zauważalnych uszkodzeń mechanicznych,
- pogorszenia stabilności lub nośności,
- zużycia powierzchni użytkowej,
- braku zgodności z aktualnymi potrzebami użytkownika.

XIV. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.

Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).

Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
	Wyrób medyczny		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/RF-823/2/06.05.2026
Data wydania instrukcji używania: 05.2026 v.2



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA TABORET I STOPIEŃ DO WANNY 2W1 JOHN 823

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.




II. CHARAKTERYSTYKA

Nr katalogowy:	RF-823
Max. bezpieczne obciążenie:	120 kg
Waga:	1,5 kg
Regulacja wysokości siedziska:	20,2 - 25,2 cm
Szerokość siedziska:	41,6 cm
Głębokość siedziska:	22,6 cm
Rozstaw nóg wzdłuż:	47,8 cm
Rozstaw nóg w poprzek:	31,6 cm
Kąt nachylenia nóg wzdłuż:	107 stopni
Kąt nachylenia nóg w poprzek:	100 stopni
Kolor siedziska:	biały

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	HD-PE (polietylen dużej gęstości)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)

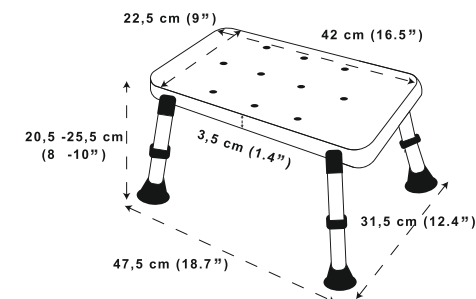

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Taboret/stopień do wanny pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Dzięki niemu zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada. Taboret/stopień ułatwia wchodzenie i wychodzenie z wanny osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Może służyć także jako stabilne podparcie w czasie kąpieli w wannie.

IV. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową dla produktu taboret/stopień są przede wszystkim osoby z ograniczoną sprawnością ruchową oraz te, które potrzebują wsparcia przy kąpieli:

- Osoby starsze, które mają problemy z utrzymaniem równowagi lub zmęczeniem podczas stania pod prysznicem.
- Osoby po urazach lub zabiegach operacyjnych (np. kończyn dolnych, bioder, kręgosłupa), dla których stanie podczas kąpieli może być utrudnione.
- Osoby z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu, które potrzebują przygotowanego miejsca do siedzenia w trakcie kąpieli.
- Osoby, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo w łazience - np. uniknąć poślizgnięcia się lub upadku podczas kąpieli.

V. PRZECIWWSKAZANIA

- Brak możliwości utrzymania stabilnej pozycji siedzącej - jeżeli użytkownik nie ma odpowiedniej kontroli tułowia lub mięśni brzucha/pleców, wtedy korzystanie może być niebezpieczne.
- Znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej lub równowagi - np. choroby błędniaka, zawroty głowy, niesamodzielność w siadaniu lub wstawaniu.
- Użytkownicy, którzy nie powinni przyjmować pozycji siedzącej z przyczyn medycznych - np. pewne stany pooperacyjne, zakrzepy, czy inne wskazania lekarza mogą wykluczać siedzenie na taborecie.
- Osoby z poważnymi zaburzeniami percepcji lub znacznie ograniczoną sprawnością intelektualną - gdy nie mogą samodzielnie lub pod nadzorem korzystać z urządzenia bez ryzyka upadku.
- Nieodpowiednie warunki łazienki – np. bardzo śliska lub pochyla powierzchnia, niewłaściwe dopasowanie wysokości lub ustawienia nóg mogą uczynić taboret niebezpiecznym.

VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Upadek lub poślizgnięcie się użytkownika, jest to najczęstsze działanie niepożądane przy korzystaniu z taboretu/stopnia. Może wystąpić, jeśli:
 - taboret/stopień stoi na śliskiej, nierównej lub nachylonej powierzchni,
 - gumowe nasadki na nóżkach są zużyte lub zabrudzone mydłem,
 - użytkownik gwałtownie siada, przemieszcza się lub próbuje się podciągnąć bez asekuracji.
- Długotrwałe siedzenie na twardym, plastikowym siedzisku (zwłaszcza u osób szczupłych lub z chorobami skóry) może prowadzić do: otarć, odleżyn, uczucia chłodu lub dyskomfortu w kontakcie z mokrym materiałem.
- Jeśli taboret/ stopień jest ustawiony na niewłaściwej wysokości, może wymuszać nienaturalną pozycję podczas kąpieli, co prowadzi do napięcia mięśni nóg, bioder lub kręgosłupa.
- W przypadku złego montażu lub uszkodzenia konstrukcji (np. pęknięcie siedziska, poluzowanie śrub), może dojść do uszkodzeń mechanicznych tj: osunięcia się siedziska, zakleszczenia palców, upadku z wysokości ok. 40-60 cm.
- Jeśli wyrób nie jest regularnie czyszczony i osuszany, może stać się miejscem namnażania bakterii lub pleśni - co może prowadzić do podrażnień skóry lub infekcji grzybiczych.

VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem
 - Upewnij się, że taboret/stopień został prawidłowo zmontowany i ustawiony zgodnie z instrukcją.
 - Sprawdź, czy powierzchnia, na której zostanie ustawiona, jest czysta, sucha i stabilna.
 - Zmierz dostępną przestrzeń prysznicza/wanny, aby upewnić się, że taboret mieści się i może być ustawiony stabilnie.
 - Upewnij się, że użytkownik ma zdolność do samodzielnego siadania i wstawania lub że będzie odpowiednio asekurowany.
- Nie przekraczać maksymalnego bezpiecznego obciążenia - 120kg.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby, mocowania są mocne i nieuszkodzone (np. aluminiowa konstrukcja może korodować lub ulegać zmęczeniu materiału).
- Sprawdzaj stan antypoślizgowych nasadek - jeśli są zużyte lub uszkodzone należy je wymienić.
- Osoby z bardzo ograniczoną mobilnością, zaburzeniami równowagi lub silnym bólem powinny korzystać z taboretu pod nadzorem asystenta.


VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed korzystaniem z taboretu/stopnia upewnij się, że:
 - wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
 - przyciski blokujące działają poprawnie;
 - gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie taboretu/stopnia w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia taboretu/stopnia.
- Nie przechowywać w temperaturze poniżej 0°C.
- Przed użyciem upewnij się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
- Nie próbuj przesuwając taboretu w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
- Taboret/stopień musi być stosowany na płaskiej powierzchni.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.


IX. SPOSÓB UŻYWANIA

- Przygotuj wszystkie elementy do montażu (rys. 1).
- Połącz wszystkie elementy ramy (rys. 2).
- Przykręć ramę do siedziska (rys. 3).
- Zamontuj nóżki na ramie (rys.4).
- Sprawdź, czy stopień/taboret jest prawidłowo zmontowany (rys. 5).

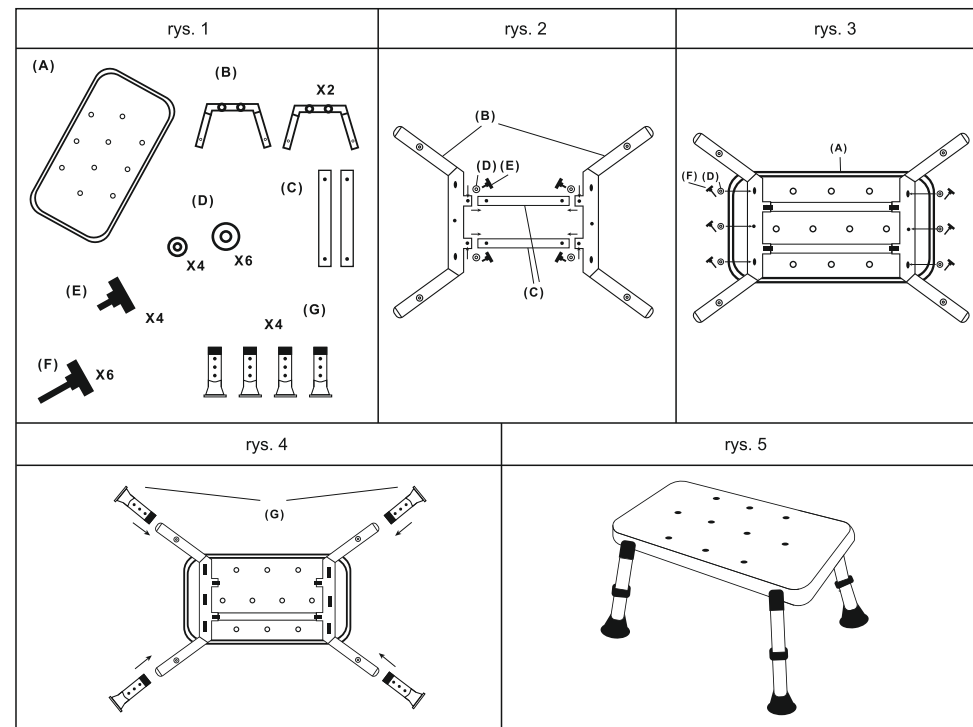

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce taboretu/stopnia i obróć ją delikatnie, jak na rysunku obok.
- Ustaw odpowiednią wysokość.
- Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
- Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

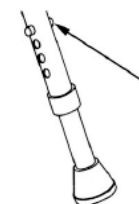

UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.

SIADANIE, WSTAWANIE, WCHODZENIE DO WANNY I WYCHODZENIE Z WANNY

	Funkcja: taboret do wanny	Funkcja: stopień do wanny
1.	Upewnij się, że taboret/stopień stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.	Upewnij się, że taboret/stopień stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2.	Stań tyłem do taboretu/stopnia tak, aby dotykać jego przodu tylną stroną kolan.	Wejść na taboret/stopień.
3.	Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.	Ostrożnie przełóż pierwszą nogę do wanny.
4.	Powoli siadaj na taborecie/stopniu, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe, kolana oraz biodra.	Ostrożnie przełóż drugą nogę do wanny.
5.	Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.	W przypadku funkcji stopień do wanny: Wejść do wanny. Wychodzenie z wanny jest czynnością odwrotną do wchodzenia do wanny.