Instrukcja obsługi

Czwórnóg inwalidzki aluminiowy typ na wysokich/niskich nogach

Kod produktu: JMC-C 2670SL / JMC-C 2660SL

Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.


W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie

Czwórnóg inwalidzki wykonany jest z aluminiowo-stalowej ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość, zakończoną malowaną proszkowo podstawą z czterema punktami podparcia. Występuje w wersji z wysoką podstawą i uchwytem piankowym (JMC-C 2670SL) oraz niską podstawą i uchwytem z tworzywa sztucznego (JMC-C 2660SL).

JMC-C 2660 JMC-C 2670

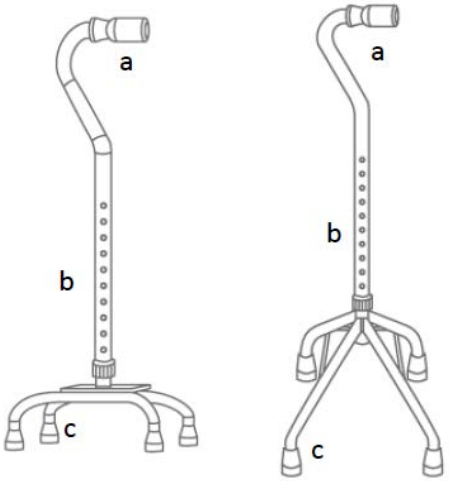

a) uchwyt
b) regulacja wysokości – sztyft blokujący
c) gumowa nasadka

3. Zastosowanie

Czwórnóg inwalidzki jest sprzętem pomocniczym przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi. Konstrukcja z czterema punktami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski.

Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na czwórnogu.

4. Regulacja i główne zalecenia użycia

Uwaga! Podczas regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

Uwaga! Nie należy używać czwórnogu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie), ponieważ grozi to wypadkiem.

Uwaga! Podczas dopasowywania długości czwórnogu należy pamiętać, by pacjent miał założone buty, w których będzie chodził. Zbyt wysoki jak i zbyt niski czwórnóg jest niewłaściwy, ponieważ będzie powodować unoszenie barków lub pochylanie tułowia do przodu.

- Aby wyregulować czwórnóg, należy wcisnąć metalowy sztyft i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy metalowego sztyftu. Czwórnóg jest regulowany skokowo co 2,5 cm.
- Długość czwórnogu dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym pod kątem 20°.
- Czwórnóg powinien być indywidualnie dostosowany do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt znajdował się na wysokości stawu biodrowego.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie sztyftu i upewnić się, że czwórnóg jest stabilny.

UWAGA! W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się za pomocą czwórnogu, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje.

Technika poruszania się za pomocą czwórnogu:

- Czwórnóg inwalidzki należy trzymać po stronie nogi zdrowej. Podczas fazy przenoszenia nogi zdrowej ciężar ciała przenosi się na czwórnóg i odciąża chorą nogę. Zdarzają się odstępstwa od tej zasady np. gdy ręka po stronie zdrowej nogi jest

niesprawna lub w przypadku niestabilności stawu biodrowego lub kolanowego czy dolegliwości bólowych.

Chodzenie po schodach:

- W czasie poruszania się po schodach w górę należy najpierw postawić nogę zdrową, a następnie chorą wraz z czwórnogiem.
- W przypadku schodzenia w dół należy postępować odwrotnie, tzn. najpierw stawiać nogę chorą wraz z czwórnogiem, a następnie nogę zdrową.
- Należy pamiętać, aby poruszać się przy poręczy i wspomagać się nią trzymając ręką. W czasie zwrotu należy obracać się przez ramię po stronie nogi zdrowej.

Siadanie:

- Należy stanąć tyłem do fotela lub krzesła, następnie przełożyć czwórnóg do ręki po stronie chorej nogi. Ręką po stronie zdrowej należy podeprzeć się na podłokietniku fotela bądź krzesła, a ręką po stronie chorej podeprzeć się na uchwycie czwórnogu. Podczas siadania należy wysunąć chorą nogę do przodu, można również podeprzeć się na nodze zdrowej, jeżeli użytkownik jest na tyle sprawny.

Wstawanie:

- Należy przesunąć się na brzeg fotela lub krzesła, należy wysunąć chorą nogę do przodu, następnie ręką po stronie zdrowej wesprzeć się na podłokietniku fotela bądź krzesła, a ręką po stronie chorej na uchwycie czwórnogu. Można również podeprzeć się podczas wstawania na nodze zdrowej, jeżeli użytkownik jest na tyle sprawny.

W domu:

- Należy usunąć możliwe przeszkody, podwinięte dywany, wysokie progi. Należy wyłożyć śliskie podłogi np. w łazience, kuchni matami antypoślizgowymi. Zaleca się chodzenie w płaskim, wygodnym obuwiu.

Na zewnątrz:

- Należy uważać podczas poruszania się po nierównych oraz śliskich powierzchniach. Należy poruszać się niewielkimi krokami i pamiętać o obuwiu odpowiednim do warunków atmosferycznych.

5. Specyfikacja techniczna

TYP: regulowany

Kolor trzonu: srebrny

JMC-C 2670SL

Uchwyt: czarny, piankowy

Kolor podstawy: czarny

Wymiary podstawy: 26 cm (25,5 cm) x 23 cm

Regulacja wysokości: 77-101 cm

Waga: 1 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

JMC-C 2660SL

Uchwyt: szary, tworzywo sztuczne

Kolor podstawy: szary

Wymiary podstawy: 15 cm x 21 cm

Regulacja wysokości: 78-101 cm

Waga: 1 kg

Maksymalne obciążenie: 100 kg

6. Uwagi i zalecenia

- **Nie należy** dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych, wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi Wytwórcy.
- Ze względu na ryzyko upadku nie należy używać czwórnogu na podłożu nie dającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym.
- Nie wolno zawieszać żadnych przedmiotów na rękojeści czwórnogu, ponieważ może być to przyczyną upadku.
- Nie należy przechowywać czwórnogu na wolnym powietrzu, w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, a także w ujemnej temperaturze powietrza.

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Konserwacja i czyszczenie

- Czwórnóg należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Zaleca się regularną kontrolę gumowej nasadki. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Wytwórca
LOT	Numer partii		Data produkcji
SN	Numer seryjny	EC REP	Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

10. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdą Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na **www.timago.com**



Wytwórca:
Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.07.2016