KOTEK I™

PIONIZATOR

CE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Our passion – your independence!

AKCES MED



5 903240 632428

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy Akces-MED sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

UWAGA! AKCES-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą 93/42/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych oraz z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r, Nr 876 ze zm.). Na wyrób producent wystawił stosowaną deklarację zgodności.

Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION ISO 13485 DNV

SPIS TREŚCI

1.Przeznaczenie instrukcji.....5
2.Wskazania do stosowania.....5
3.Ogólna budowa pionizatora 6
3.1 Wyposażenie standardowe.....6
3.2 Wyposażenie ponadstandardowe.....6
4. Tabela wymiarowa.....7
5. Szczegółowy opis obsługi.....8
5.1 Regulacja wysokości stabilizatora tułowia i pelot.....8
5.2 Regulacja szerokości pelot.....9
5.3 Regulacja pasów stabilizujących.....10
5.4 Regulacja klina odwodzącego uda.....11
5.5 Regulacja stabilizatora stóp.....11
5.6 Ustawienie kąta pochylenia.....12
5.7 Regulacja stolika i montaż poduszki.....13
6. Montaż wyposażenia ponadstandardowego.....14
6.1 Pas podtrzymujący głowę.....14
6.2 Stolik do terapii manualnej.....14
6.3 Stopki z regulacją.....14
7. Użytkowanie pionizatora 15
7.1 Przygotowanie pacjenta.....15
7.2 Instrukcja użytkowania fotelika.....16
7.3 Pionizacja.....17
8. Zasady bezpieczeństwa.....19
9. Konserwacja i czyszczenie 22
10. Oznaczenie 24

WSTĘP

Pionizator **KOTEK I™** został zaprojektowany z myślą o małych pacjentach ze schorzeniami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi im samodzielne przyjęcie pozycji stojącej (z niedowładami kończyn dolnych, tułowia i z niedowładami czterokończynowymi różnego pochodzenia).Szeroki zakres regulacji w tym urządzeniu umożliwia pionizację dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Zastosowanie naturalnego surowca w postaci drewna, wzornictwa bliskiego dziecku oraz kolorowej tapicerki o żywych kolorach dodatkowo pobudza zmysły: dotyku i wzroku, dzięki czemu staje się przyjaznym narzędziem terapeutycznym dla dziecka i jego najbliższego otoczenia.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:
Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883
Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania pionizatora **KOTEK I™**, przygotowania urządzenia do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania pionizatora **KOTEK I™** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

2 WSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób zalecany jest dla osób u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i neurologiczne
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

3 OGÓLNA BUDOWA PIONIZATORA

3.1. Wyposażenie standardowe

1.Stelaż z kółkami jezdnymi wyposażonymi w hamulce
2.Podest ze stopkami i pasami stabilizującymi stopy
3. Peloty biodrowe z poduszkami i pasami bezpieczeństwa
4. Peloty piersiowe z poduszkami i pasami bezpieczeństwa
5. Klin odwodzący uda
6. Stolik
7. Poduszka na stolik
8. Sprężyna pneumatyczna





3.2. Wyposażenie ponadstandardowe



KTK_015
KTK_020
KTK_016

Koło Tango 75/100/125 mm



KTK_102

Pas podtrzymujący głowę



KTK_103

Stopki z regulacją 3D



KTK_401


Stolik do terapii manualnej




KTK_425

Stolik z pojemnikiem na zabawki

4 TABELA POMIAROWA

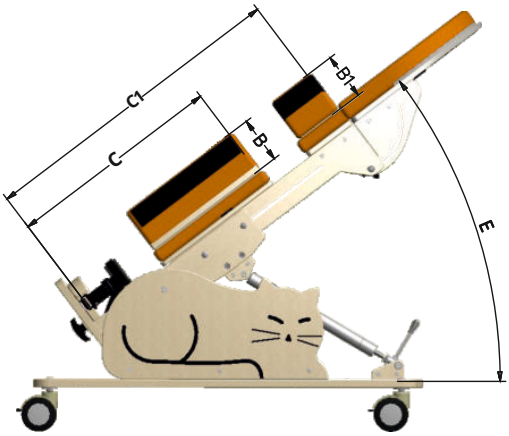

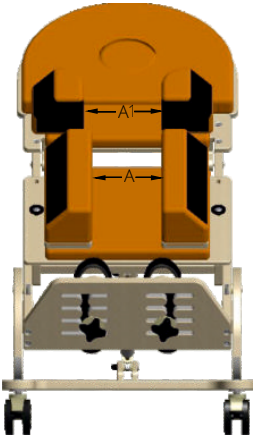

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1
A	Rozstaw pelot biodrowych	[cm]	12-23
B	Głębokość pelot biodrowych	[cm]	12
C	Regulacja wysokości pelot biodrowych	[cm]	39-60
A1	Rozstaw pelot piersiowych	[cm]	12-21
B1	Głębokość pelot piersiowych	[cm]	12
C1	Regulacja wysokości pelot piersiowych	[cm]	50-72
	Długość stopki	[cm]	17
E	Kąt pochylenia pionizatora	[°]	25-85
	Max. waga użytkownika	[kg]	25

	Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1
	Szerokość	[cm]	54
	Długość	[cm]	100
	Wysokość	[cm]	73
	Waga	[kg]	17

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

5 OPIS OBSŁUGI PIONIZATORA


5.1 Regulacja wysokości stabilizatora tułowia

Ustawiając wysokość należy:

- poluzować 4 pokrętła mocujące,
- ustawić wysokość K zgodnie z dokonanymi pomiarami pacjenta na polonizatorze,
- po uzyskaniu odpowiedniej wysokości dokręcić pokrętła.

Następnie należy ustawić położenie pelot biodrowych:

- poluzować dwa pokrętła blokujące,
- ustawić odpowiednie położenie pelot przesuwając je w górę lub w dół,
- dokręcić pokrętła.

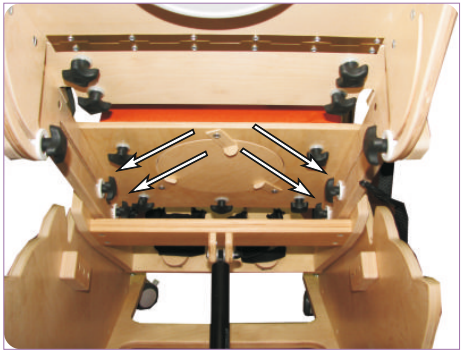







5.2 Regulacja szerokości pelot

W celu ustawienia peloty należy:

- poluzować pokrętła mocujące peloty piersiowe (1) peloty biodrowe (2),
- ustawić szerokość pelot piersiowych oraz biodrowych zgodnie z dokonanymi pomiarami pacjenta,
- dokręcić pokrętła.

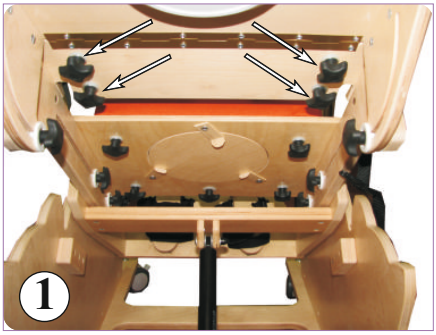

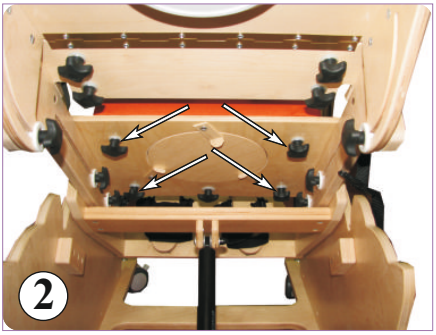





5.3 Regulacja pasów stabilizujących

Dokonując regulacji pasa należy:

- rozpiąć klamry zatrzaskowe pasa wspomagającego,
- ustawić długość głównego pasa indywidualnie do pacjenta używając rzepów umieszczonych na pelotach,
- po uzyskaniu właściwej długości pasa głównego używając klamer zatrzaskowych, wyregulować należy długości pasów wspomagających, pociągając za pas, sprawdzamy czy:
- klamry nie ulegają rozpięciu pod siła nacisku,
- klamry nie przesuwają się po pasie w wyniku niewłaściwego zamontowania.






5.4 Regulacja klina odwodzącego uda

W celu ustawienia klina należy:

- poluzować pokrętło mocujące,
- przesuwać klin w górę lub w dół do uzyskania odpowiedniego ustawienia,
- po uzyskaniu odpowiedniej wysokości ustawienia klina dokręcić pokrętło.

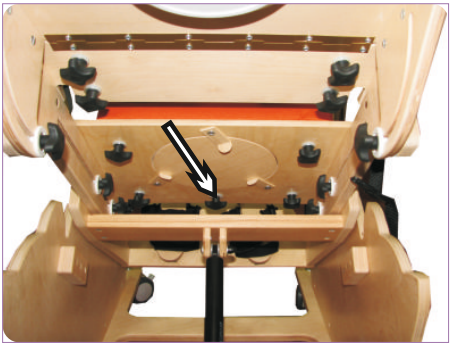



5.5 Regulacja stabilizatora stóp

W celu ustawienia stabilizatora stóp należy:

- poluzować pokrętła dociskowe,
- przesuwać stopki do uzyskania odpowiedniej pozycji,
- po uzyskaniu odpowiedniej pozycji stopek dokręcić pokrętła.





5.6 Ustawienie kąta pochylenia

W celu uzyskania żądanego kąta pochylenia należy:

- przesunąć dźwignię zabezpieczającą siłownik,
- opuszczać lub podnosić stabilizacje tułowia do uzyskania odpowiedniego kąta,
- po uzyskaniu odpowiedniego kąta pochylenia - zabezpieczyć siłownik puszczając dźwignię.




5.7 Regulacja stolika i montaż poduszki

W celu ustawienia pochylenia stolika należy:
- poluzować pokrętła dociskowe,
- opuszczać lub podnosić stolik do uzyskania odpowiedniego kąta,
- dokręcić pokrętła.

Kąt powinien być dostosowany do:
- kąta pochylenia pionizatora,
- możliwości ustawienia rąk dziecka.

Ręce powinny swobodnie spoczywać na stoliku umożliwiając wykonywanie różnych czynności manipulacyjnych dziecku. Zaleca się pozostawienie poduszki stolika u dzieci:
- u których występuje nie kontrolowana siłą nacisku z kończyn górnych na stolik,
- u których są trudności z kontrolą kończyn (atetoza).

Poduszkę montuje się poprzez włożenie trzech pasków w otwory na krawędzi stolika i przypięcie jej na rzepy po drugiej tronie blatu.

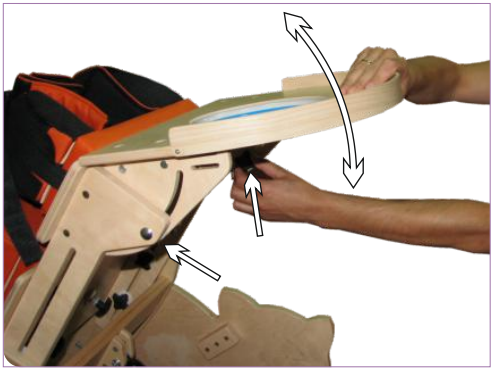



6 WYPOSAŻENIE PONADSTANDARDOWE

6.1. REF KTK_102 Stabilizator głowy

W celu zamontowania stabilizatora głowy należy:

- wyciągnąć miseczkę znajdującą się na wyposarzeniu stolika,
- pozostawić niezabezpieczony otwór w stoliku na głowę dziecka,
- poluzować pokrętła dociskowe stolika,
- ustawić stolik tak aby stabilizował głowę dziecka od przodu,
- dokręcić pokrętła dociskowe stolika,
- dopiąć pasy stabilizujące głowę i ustawić ich długość indywidualnie do dziecka.



6.2. REF KTK_401 Stolik do terapii manualnej

W celu zamontowania stolika do terapii manualnej należy:

- położyć stolik terapeutyczny na stoliku pionizatora opierając jego boczną krawędzią o opaskę.



6.3. REF KTK_103 Stopki z regulacją

W celu zamontowania stopek z rozszerzoną regulacją należy:

- zdemontować stopki standardowe
- zamontować stopki z rozszerzoną regulacją w tych samych miejscach.



7 UŻYTKOWANIE WYROBU



UWAGA! Pionizator **KOTEK I™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

7.1. Przygotowanie pacjenta

Przed rozpoczęcie użytkowania wyrobu należy zadbać o to aby:

- strój pacjenta był lekki, nie krępujący ruchów, najlepiej sportowy,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące staw skokowy,
- pacjenta nie był umieszczany w urządzeniu bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. były one zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- w przypadku wskazań do stosowania zaopatrzenia ortopedycznego (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne) założyć je.



UWAGA! Ubiór musi chronić skórę pacjenta przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

UWAGA! Decyzję o stosowaniu określonego zaopatrzenia ortopedycznego podejmuje lekarz prowadzący!

7.2. Instrukcja użytkowania wyrobu

1.Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do pionizatora i osoby pionizowanej, w bezpiecznej odległości od źródeł ognia i wysokiej temperatury
- Upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne
- Sprawdzić stan kół i hamulców
- Zablokować hamulce

2. Dopasować urządzenie do wymiarów pacjenta

3.Zwalniając dźwignię siłownika ustawić stabilizator tułowia w pozycji dopuszczalnego maksymalnego pochylenia.

4. Rozpiąć pas piersiowy i biodrowy oraz paski stopek aby móc swobodnie umieścić pacjenta w urządzeniu

Urządzenie jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała pacjenta. Główną zasadą przy dopasowywaniu urządzenia jest zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać pozycji ciała dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy użytkownika.



UWAGA! Początkowe dopasowanie pionizatora do pacjenta dokonuje wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel a kontynuują osoby przeszkolone z rodziny. Prawidłowe dopasowanie urządzenia jest niezbędne dla bezpieczeństwa i warunkuje prawidłowy przebieg rehabilitacji dziecka

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

7.3. Pionizacja

Aby móc spionizować pacjenta należy:

1. Przygotować miejsce w którym odbywać się będzie proces pionizacji. Pomieszczenie o wolnej przestrzeni brak zagrożeń (porozrzucane na podłodze zabawki lub inne przedmioty).
2. Przysunąć pionizator jak najbliżej miejsca w którym przebywa pacjent.
3. Zablokować kołka w pionizatorz, wózku lub innym urządzeniu na którym przebywa pacjent.
4. Przenieść pacjenta i ułożyć go w pionizatorze, upewniając się , że wszystkie ustawienia zostały zachowane. W razie konieczności dokonać poprawek.
5. Zapiąć pasy stabilizujące klatkę piersiową, biodra i stopy.
6. Upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały poprawnie wyregulowane i dopięte.
7. Pozostając z pacjentem w kontakcie wzrokowym i słownym, stabilizując jego ciało, odblokowujemy dźwignię zabezpieczającą siłownik i powoli przeprowadzamy pacjenta w kierunku pozycji pionowej. Po osiągnięciu żądanego kąta pochylenia należy zablokować urządzenie puszczając dźwignię blokując siłownik.

UWAGA!
Czas trwania pionizacji jest indywidualny dla każdego pacjenta. W początkowym okresie pionizacji zaleca się stopniowe wydłużanie tego czasu (okres adaptacji organizmu do zmiany pozycji). Decyzję o czasie trwania pionizacji podejmuje lekarza prowadzący lub fizjoterapeuta. Pionizacja pacjenta powinna przebiegać pod nadzorem osób przeszkolonych!

Wskazane jest odwracanie uwagi pacjenta w trakcie pionizacji przez:
- zabawy manipulacyjne,
- zabawy edukacyjne,
- stymulacje dotykowe i inne.



UWAGA! Przed każdorazowym przystąpieniem do użytkowania pionizatora, należy w pierwszej kolejności dopasować go do użytkownika!

UWAGA! Przed przystąpieniem do pionizacji należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

UWAGA! Zabrania się pozostawiania pacjenta w urządzeniu bez opieki i nadzoru opiekuna!



UWAGA! Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać pionizację, wyjąć pacjenta z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu pionizacji

Zakończenie pionizacji

Aby zakończyć pionizację należy:

1. Przygotować miejsce w którym odbywać się będzie zdejmowanie pacjenta z pionizatora. Pomieszczenie o wolnej przestrzeni brak zagrożeń.
2. Przysunąć pionizator jak najbliżej miejsca gdzie będzie przeniesiony pacjent.
3. Zablokować kołka w pionizator, łóżku ortopedycznym, wózku lub innym urządzeniu w którym będzie przebywał pacjent.
4. Pozostając z pacjentem w kontakcie wzrokowym i słownym, stabilizując jego ciało, odblokowujemy dźwignię zabezpieczającą siłownik i powoli przeprowadzamy pacjenta w kierunku pozycji pochylenia do przodu. Po osiągnięciu żądanego kąta pochylenia należy zablokować urządzenie puszczając dźwignię blokując siłownik.
5. Rozpiąć pasy stabilizujące stopy, biodra i klatkę piersiową.
6. Upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia nie blokują pacjenta.
7. Przenieść pacjenta i ułożyć go na przygotowanym urządzeniu.

8 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA! Pionizator **KOTEK I™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Przed decyzja zakupu pionizatora **KOTEK I™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze pionizatora oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania pionizatora należy zapoznać sie z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem pionizatora **KOTEK I™** należy:

- sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji fotelika;
- upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
- sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
- sprawdzić sprawność hamulców;
- sprawdzić prawidłowość działanie sprzączek;
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
- dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb pacjenta np. ustawienie pelot, podnóżka itp.;
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane
- zabezpieczyć pacjenta wszelkimi dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia pionizatora takimi jak: kamizelka, pasy stabilizujące stopy, peloty, klin międzyudowy, zagłówek. Ma to na celu zabezpieczenie pacjenta m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia;

2. Zabrania się użytkowania pionizatora w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania pionizatora jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania pacjenta w pionizatorze bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać urządzenia jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
6. Zabrania się pozostawiania pionizatora z pacjentem na terenie pochyłym lub nierównym bez opiekuna, pomimo aktywnego hamulca.
7. Zabrania się wjeżdzania/zjeżdzania pionizatorem po schodach, zarówno z pacjentem jak i bez.
8. Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania i wysiadania z pionizatora pacjent nie stawał na podnóżku.
9. Wsiadanie i wysiadanie pacjenta z pionizatora zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania pionizatora kończyny pacjenta nie dostawały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Pionizator należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Pionizator nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu pionizatora bez pacjenta należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.



UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń !

UWAGA! Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

UWAGA! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji pionizatora, ponieważ jest to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę gwarancji.



UWAGA! Pierwsze posadzenie pacjenta następuje zwykle w warunkach domowych przez autoryzowanego serwisanta lub prowadzącego terapeutę (konieczność prawidłowego dopasowania pionizatora do rozmiarów i stanu fizycznego dziecka), a kontynuują osoby przeszkolone z rodziny. Prawidłowe dopasowanie poszczególnych podpórek i obejm jest niezbędne dla bezpieczeństwa i warunkuje prawidłowy przebieg rehabilitacji dziecka!

UWAGA! Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowej na stronie 7 instrukcji.

1) AKCES-MED. Sp. z o.o. sprzedaje sprzęty sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
2) Pionizator **KOTEK I™** jest objęty 24 miesięczną gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez pacjenta. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
3) Uszkodzenia powstałe po okresie 24 miesięcy mogą być usunięte na koszt użytkownika, chyba że sprzęt jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku Użytkownik może wystąpić o refundację przez NFZ naprawy sprzętu wykonanej w ramach serwisu pogwarancyjnego.
4) Producent określa czas użytkowania wyrobu na 36 miesięcy. Po tym okresie Użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
5) W razie uszkodzenia sprzętu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy AKCES-MED (tel. 17/ 864 04 70).

9 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Pionizator będący urządzeniem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja pionizatora są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Aby Państwa pionizator zachowywał odpowiednią estetykę należy zapewnić mu właściwą konserwację. W tym celu należy stosować się do poniższych wskazówek:

1. W przypadku zabrudzenia tapicerki zaleca się mycie letnią wodą oraz miękką szmatką nasączoną łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym. Użycie zbyt mokrej szmatki może spowodować powiększenie plamy, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tkaniny przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia. Po wywabieniu plamy, tapicerkę należy opłukać przy użyciu letniej wody i czystej białej szmatki.
2. Tapicerki nie należy zamaczać!
3. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
4. Nie wolno czyścić tapicerki mocnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi, chloru.



UWAGA! Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących firma Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

5. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia. Przed ponownym użyciem urządzenia tapicerka zawsze musi być sucha!
6. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować urządzenia podczas używania go przez pacjenta.
7. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.

UWAGA! Przed ponownym użyciem pionizatora, tapicerka zawsze musi być sucha!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń;
- sprawdzić unosząc podstawę czy koła są prawidłowo dokręcone, nie zniszczone, czy hamulec zatrzymuje obracające się koło;
- sprawdzić, czy konstrukcja pionizatora nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji;
- upewnić się, czy części drewniane nie mają drzazg, czy nie odłamały się fragmenty konstrukcji lub nie występują oznaki zmęczenia materiału;
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym, zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone;
- sprawdzić, czy paski kamizelki, pasów tułowia, pasy stabilizacji stóp itp. nie są postrzępione, a sprzączki i klamry działają prawidłowo.

UWAGA! Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

UWAGA! W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.




10 OZNAKOWANIE

10.1. Symbole

CE	Deklaracja, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze		Chronić przed promieniami słonecznymi
REF	Numer katalogowy	35°C 5°C	Ograniczenie temperatury przechowywania
SN	Numer seryjny	70% 45%	Wilgotności względna przechowywania
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi		Suszyć pionowo
	Uwaga!		Nie chlorować
	Wytwórca		Nie prasować
	Data produkcji		Nie suszyć w suszarce bębnowej
LATEX	Wyrób nie zawiera lateksu		Nie stosować bielenia
	Przechowywać w suchym miejscu		Ostrożnie, delikatna zawartość
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających		Zakaz pozostawiania pacjenta bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
			Wyrób przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń

10.2. Przykładowa tabliczka znamionowa

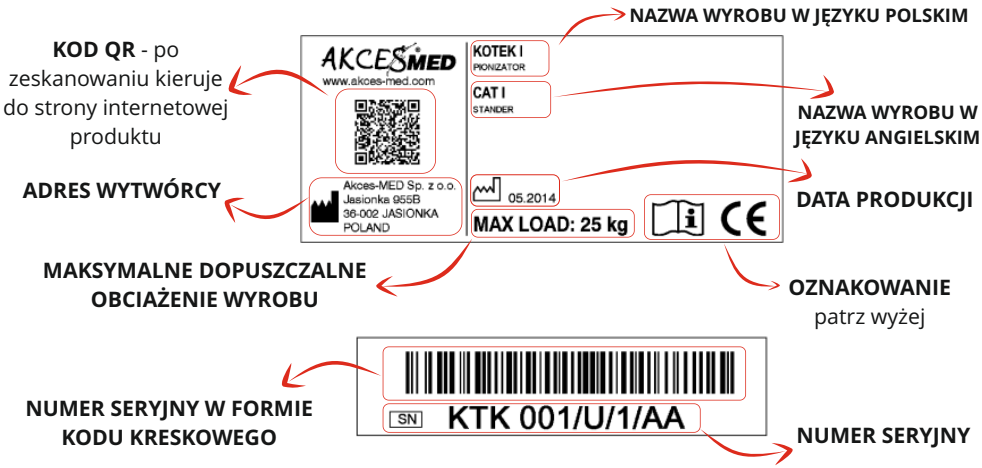

PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Akces-MED Sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com
e-mail: produkcja@akces-med.com

Autoryzowany Przedstawiciel

Data wydania: 11.08.2015 **Data ostatniej aktualizacji:** 11.04.2017

Our passion – your independence!