



# RODZINA WÓZKÓW NOVA



**Nova®**  
wózek specjalny




**Nova Evo®**  
wózek specjalny



**Nova Home®**  
wózek specjalny



## RODZINA WÓZKÓW NOVA M O D Y F I K A C J A

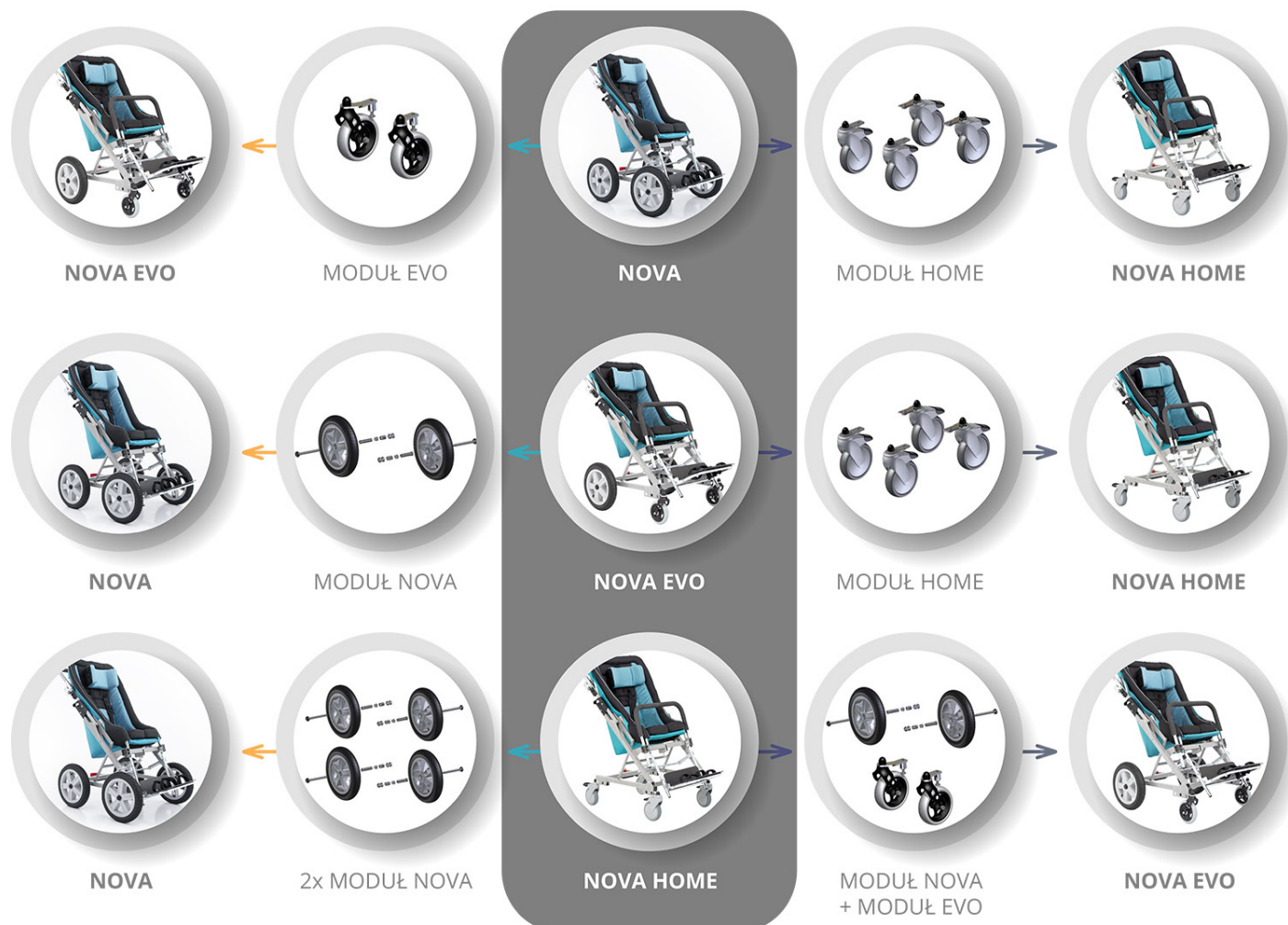

### L E G E N D A





**Nova®**  
wózek specjalny

**FP READY**



**NOVA®** to komfortowy wózek spacerowy dla osób z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu.

Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka oraz 3-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska, umożliwiają podróżowanie w komfortowej pozycji.

Wózek łatwo prowadzi się zarówno po płaskim jak i nierównym terenie. Dzięki prostej i lekkiej konstrukcji, wózek **NOVA®** można w łatwy sposób złożyć do transportu. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zajmuje niewiele miejsca w bagażniku.

Konstrukcja wózka pozwala na samodzielne ustawienie rozstawu osi kół. Możemy je zamontować szerzej dla zwiększenia stabilności wózka lub wąsko dla zwiększenia zwrotności.

Wózek dostępny jest w **3** rozmiarach.

**MEDICAL  
DEVICE**  
CLASS I



**WYRÓB  
MEDYCZNY**  
KLASA I



## WSKAZANIA DO STOSOWANIA

**Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:**

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zapotrzenie ortopedyczne).

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyt do prowadzenia wózka | Regulowany zagłówek | Funkcja kubełkowa | 5-punktowe pasy bezpieczeństwa | Poduszka siedziska | Bariarka | Tapicerka wodoodporna HYDRO™ | Tapicerka techniczna | Hamulec centralny | Składana rama | Regulowany rozstaw osi kół SmarTraction | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Koła pompowane z systemem szybkiego demontażu

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.  
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 6/05/2021

**akces-med.com**

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

**Nova®**

szczególne zalety i kolorystyka

**FP READY**

## SZCZEGÓLNE ZALETY

**Stabilna konstrukcja**

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

**Elementy odbłaskowe**

Wyrób posiada elementy odbłaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.

**Niska waga**

Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie wpływa na jego wagę.

**Łatwa obsługa**

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

**Funkcja kubelkowa**

Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta nachylenia siedziska.

**Gwarancja 24 miesiące**

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Pompowane koła gwarantują lepszą amortyzację wózka, co ogranicza niekontrolowane napięcia mięśni podczas jazdy. Wyposażone są w system szybkiego demontażu, dzięki czemu możemy uzyskać mniejsze gabaryty wózka po złożeniu.



System **SmarTraction** pozwala na samodzielne ustawienie rozstawu osi kół. Możemy je zamontować szerzej dla zwiększenia stabilności wózka lub wąsko dla zwiększenia zwrotności.




Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.



Innowacyjny system montażu tapicerki **TENSION™** sprawia, że siedzisko ma minimalną styczność z konstrukcją wózka i poddaje się ruchom ciała użytkownika łagodząc efekty napadów spastyki – jest to szczególnie ważne w przypadku osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

## KOLORYSTYKA


### TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:

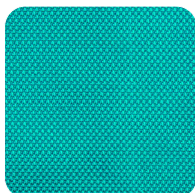

Turkusowy  
rozmiar 1



Szary  
rozmiar 2

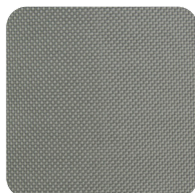

Szary  
rozmiar 3

### TAPICERKA WODOODPORNĄ HYDRO™:



WODOODPORNĄ



WYTRZYMAŁA



ŁATWA DO CZYSZCZENIA



EKOLOGICZNA




AQUA  
rozmiar 1



MELANGE  
rozmiar 2



CADET  
rozmiar 3

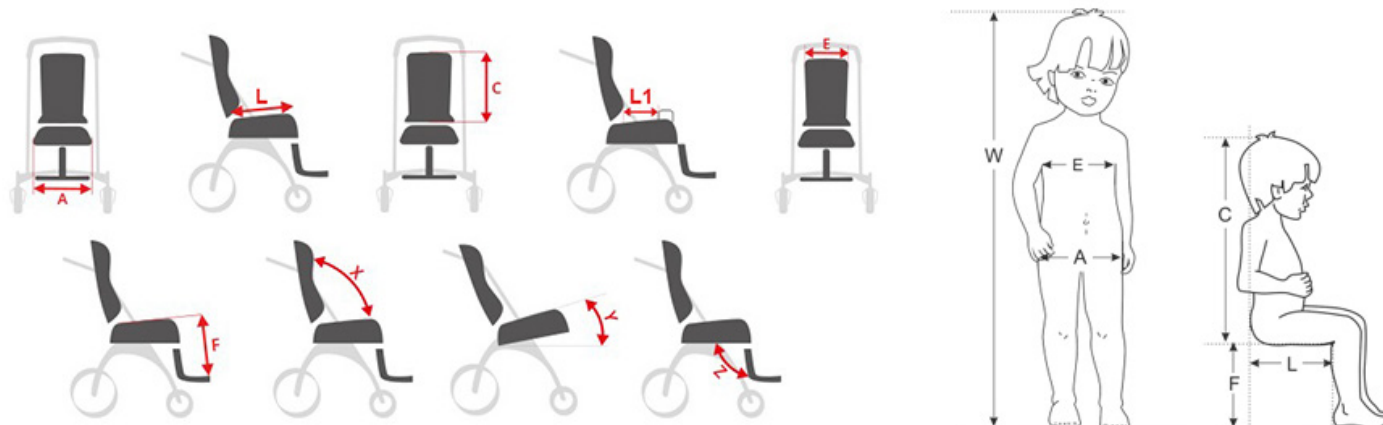

| Symbol         | Pomiar                                       | Jednostka | Rozmiar 1  | Rozmiar 2  | Rozmiar 3  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| W              | orientacyjny wzrost użytkownika*             | [cm]      | 100 – 130  | 120 – 160  | 140 – 180  |
| A              | szerokość siedziska                          | [cm]      | 31         | 36         | 41         |
| L              | głębokość siedziska                          | [cm]      | 32         | 38         | 44         |
| C <sub>1</sub> | wysokość oparcia                             | [cm]      | 62         | 70         | 84         |
| C              | wysokość zagłówka                            | [cm]      | 43 – 55    | 54 – 66    | 64 – 79    |
| E              | szerokość oparcia                            | [cm]      | 31         | 36         | 41         |
| F              | długość podnóżka                             | [cm]      | 25 – 43    | 30 – 50    | 32 – 56    |
|                | długość stopki                               | [cm]      | 21         | 24         | 27         |
|                | wysokość uchwyty do prowadzenia wózka        | [cm]      | 96         | 96         | 96         |
| X              | kąt pochylenia oparcia                       | [°]       | 97         | 97         | 97         |
| Y              | kąt pochylenia siedziska – funkcja kubelkowa | [°]       | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 |
| Z              | kąt pochylenia podnóżka                      | [°]       | 95 – 150   | 95 – 150   | 95 – 135   |
|                | max. waga użytkownika                        | [kg]      | 40         | 60         | 90         |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

\* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

| Wymiary i waga sprzętu | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość              | [cm]      | 63        | 68        | 73        |
| Szerokość po złożeniu  | [cm]      | 53        | 58        | 63        |
| Długość                | [cm]      | 112       | 126       | 152       |
| Długość po złożeniu    | [cm]      | 87        | 91        | 100       |
| Wysokość               | [cm]      | 97        | 109       | 123       |
| Wysokość po złożeniu   | [cm]      | 34        | 34        | 40        |
| Waga                   | [kg]      | 19,8      | 22        | 27,6      |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



Wózek specjalny **NOVA EVO®** to świetny kompromis pomiędzy domową rehabilitacją, a wyjazdami na długie spacery. Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka i 3-stopniowa funkcja kubełkowa siedziska zapewniają odpowiedni komfort podczas użytkowania wózka. Wygodne przemieszczanie się gwarantują skrętne koła przednie oraz tylne wyposażone w hamulec centralny.

Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do transportu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie go w nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.

**MEDICAL  
DEVICE**  
CLASS I



**WYRÓB  
MEDYCZNY**  
KLASA I



## WSKAZANIA DO STOSOWANIA

**Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:**

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Składana rama | Wypinane koła pompowane | Przednie koła skrętne | Regulowany rozstaw osi tylnych kół SmarTraction | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Poduszka siedziska | Uchwyt do prowadzenia wózka | 5-punktowe pasy | Regulowany zagłówek | Barierka | Hamulec centralny | Funkcja kubełkowa

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 6/05/2021



# Nova Evo®

szczególne zalety i kolorystyka

FP READY



## SZCZEGÓLNE ZALETY



### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



### Elementy odbłaskowe

Wyrób posiada elementy odbłaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.



### Niska waga

Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie wpływa na jego wagę.



### Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



### Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta nachylenia siedziska.



### Gwarancja 24 miesiące

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Pompowane koła tylne gwarantują lepszą amortyzację wózka, a przednie koła skrętne zdecydowanie ułatwiają manewrowanie wózkiem.



Regulowany zagłówek oraz 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają bardzo dobre dopasowanie do ciała użytkownika przy zachowaniu wygody oraz komfortu.




Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.




Innowacyjny system montażu tapicerki **TENSION™** sprawia, że siedzisko ma minimalną styczność z konstrukcją wózka i poddaje się ruchom ciała użytkownika łagodząc efekty napadów spastyki – jest to szczególnie ważne w przypadku osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

## KOLORYSTYKA


### TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:

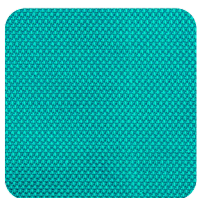

Turkusowy  
rozmiar 1

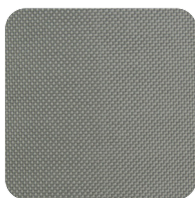

Szary  
rozmiar 2

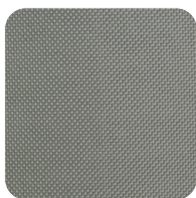

Szary  
rozmiar 3

### TAPICERKA WODOODPORNĄ HYDRO™:



WODOODPORNĄ



WYTRZYMAŁA



ŁATWA DO CZYSZCZENIA



EKOLOGICZNA



AQUA  
rozmiar 1



MELANGE  
rozmiar 2



CADET  
rozmiar 3


Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 6/05/2021

[akces-med.com](http://akces-med.com)

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | [produkcja@akces-med.com](mailto:produkcja@akces-med.com) tel. +48 (17) 864 04 70 [akces-med.com](http://akces-med.com)

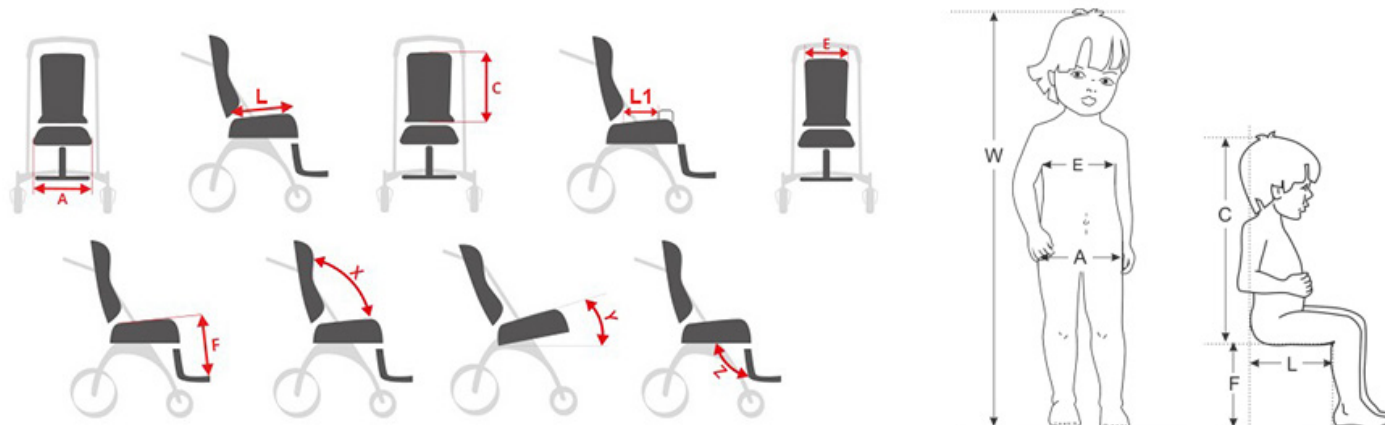

| Symbol         | Pomiar                                       | Jednostka | Rozmiar 1  | Rozmiar 2  | Rozmiar 3  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| W              | orientacyjny wzrost użytkownika*             | [cm]      | 100 – 130  | 120 – 160  | 140 – 180  |
| A              | szerokość siedziska                          | [cm]      | 31         | 36         | 41         |
| L              | głębokość siedziska                          | [cm]      | 32         | 38         | 44         |
| C <sub>1</sub> | wysokość oparcia                             | [cm]      | 62         | 70         | 84         |
| C              | wysokość zagłówka                            | [cm]      | 43 – 55    | 54 – 66    | 64 – 79    |
| E              | szerokość oparcia                            | [cm]      | 31         | 36         | 41         |
| F              | długość podnóżka                             | [cm]      | 25 – 43    | 30 – 50    | 32 – 56    |
|                | długość stopki                               | [cm]      | 21         | 24         | 27         |
|                | wysokość uchwytu do prowadzenia wózka        | [cm]      | 96         | 96         | 96         |
| X              | kąt pochylenia oparcia                       | [°]       | 97         | 97         | 97         |
| Y              | kąt pochylenia siedziska – funkcja kubelkowa | [°]       | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 |
| Z              | kąt pochylenia podnóżka                      | [°]       | 95 – 150   | 95 – 150   | 95 – 135   |
|                | max. waga użytkownika                        | [kg]      | 40         | 60         | 90         |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

\* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

| Wymiary i waga sprzętu | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość              | [cm]      | 63        | 68        | 73        |
| Szerokość po złożeniu  | [cm]      | 63        | 68        | 73        |
| Długość                | [cm]      | 112       | 126       | 152       |
| Długość po złożeniu    | [cm]      | 87        | 91        | 100       |
| Wysokość               | [cm]      | 97        | 109       | 123       |
| Wysokość po złożeniu   | [cm]      | 48        | 48        | 54        |
| Waga                   | [kg]      | 18,8      | 21        | 26,6      |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



Wózek specjalny **NOVA HOME®** to doskonałe rozwiązanie w przypadku domowej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami w obrębie narządu ruchu. Szczególnie dobrze sprawdza się u użytkowników spastycznych oraz wymagających dodatkowej stabilizacji. Głębokie siedzisko gwarantuje komfortową pozycję w wózku. Pomaga to korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu.

Wiele regulacji oraz szeroki wybór akcesoriów pozwala dopasować wyrób do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia kąta nachylenia podnóżka oraz 3-stopniowa funkcja kubelkowa siedziska sprawiają, że pozycja w wózku jest wygodna i komfortowa.

**NOVA HOME®** umożliwia bardzo proste oraz przemyślane przemieszczanie – skrętne przednie koła wyposażone są w hamulec, a tylne posiadają hamulec oraz blokadę kierunku jazdy, co świetnie sprawdza się w warunkach domowych.

Konstrukcja wózka pozwala na błyskawiczne złożenie wózka do transportu, a jego kompaktowe wymiary pozwalają na umiejscowienie go w nawet najmniejszym bagażniku samochodowym.

**MEDICAL  
DEVICE**  
CLASS I



**WYRÓB  
MEDYCZNY**  
KLASA I



## WSKAZANIA DO STOSOWANIA

**Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:**

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zapotrzenie ortopedyczne).

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Składana rama | Przednie skrętne koła pokojowe z hamulcem STOP | Tylne skrętne koła pokojowe z blokadą kierunku jazdy i hamulcem STOP | Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Poduszka siedziska | Uchwyt do prowadzenia wózka | 5-punktowe pasy | Regulowany zagłówek | Bariereka | Hamulec centralny | Funkcja kubelkowa



## SZCZEGÓLNE ZALETY



### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



### Elementy odbłaskowe

Wyrób posiada elementy odbłaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.



### Niska waga

Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie wpływa na jego wagę.



### Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



### Funkcja kubelkowa

Urządzenie posiada możliwość trójstopniowej zmiany kąta nachylenia siedziska.



### Gwarancja 24 miesiące

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Skrętne koła przednie wyposażone są w hamulec, tylne posiadają hamulec i blokadę kierunku jazdy – ułatwia to manewrowanie w wąskich pomieszczeniach domowych. Koła pokryte są jasną gumą dzięki czemu nie pozostawiają śladów na posadzkach, dodatkowo są bardzo ciche.



Regulowany zagłówek oraz 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają bardzo dobre dopasowanie do ciała użytkownika przy zachowaniu wygody oraz komfortu.




Kompaktowa konstrukcja i łatwy sposób składania sprawiają, że wózek zmieści się nawet do małych bagażników samochodowych.




Innowacyjny system montażu tapicerki **TENSION™** sprawia, że siedzisko ma minimalną styczność z konstrukcją wózka i poddaje się ruchom ciała użytkownika łagodząc efekty napadów spastyki – jest to szczególnie ważne w przypadku osób ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

## KOLORYSTYKA


### TAPICERKA TECHNICZNA (NOŚNA)™:

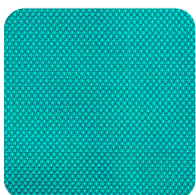

Turkusowy  
rozmiar 1

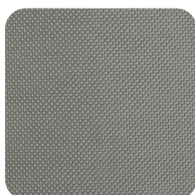

Szary  
rozmiar 2

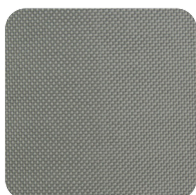

Szary  
rozmiar 3

### TAPICERKA WODOODPORNĄ HYDRO™:



WODOODPORNĄ



WYTRZYMAŁA



ŁATWA DO CZYSZCZENIA



EKOLOGICZNA




AQUA  
rozmiar 1



MELANGE  
rozmiar 2



CADET  
rozmiar 3

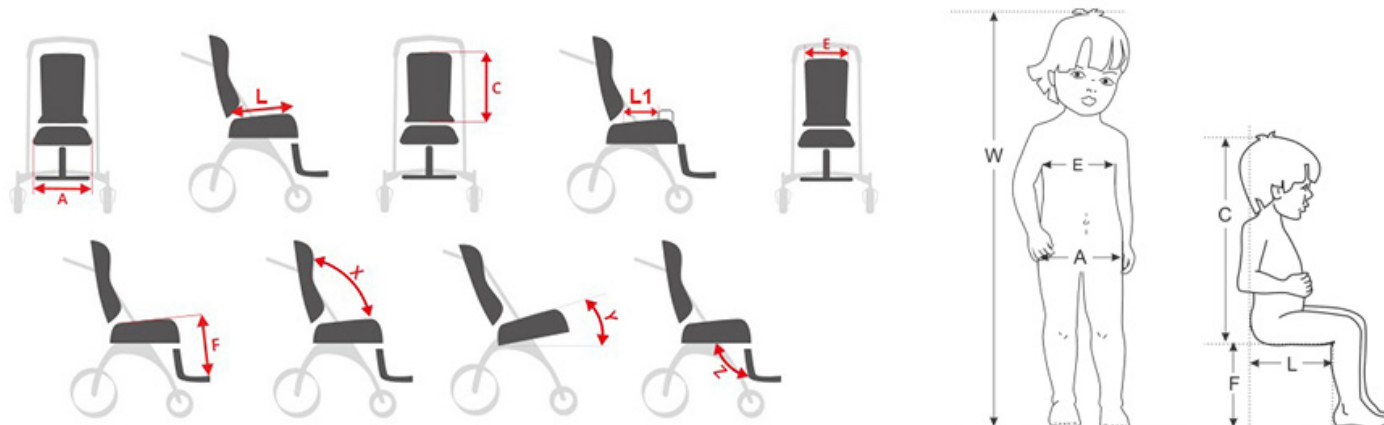

| Symbol         | Pomiar                                       | Jednostka | Rozmiar 1  | Rozmiar 2  | Rozmiar 3  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| W              | orientacyjny wzrost użytkownika*             | [cm]      | 100 – 130  | 120 – 160  | 140 – 180  |
| A              | szerokość siedziska                          | [cm]      | 31         | 36         | 41         |
| L              | głębokość siedziska                          | [cm]      | 32         | 38         | 44         |
| C <sub>1</sub> | wysokość oparcia                             | [cm]      | 62         | 70         | 84         |
| C              | wysokość zagłówka                            | [cm]      | 43 – 55    | 54 – 66    | 64 – 79    |
| E              | szerokość oparcia                            | [cm]      | 31         | 36         | 41         |
| F              | długość podnóżka                             | [cm]      | 25 – 43    | 30 – 50    | 32 – 56    |
|                | długość stopki                               | [cm]      | 21         | 24         | 27         |
|                | wysokość uchwyty do prowadzenia wózka        | [cm]      | 96         | 96         | 96         |
| X              | kąt pochylenia oparcia                       | [°]       | 97         | 97         | 97         |
| Y              | kąt pochylenia siedziska – funkcja kubelkowa | [°]       | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 | 15, 20, 25 |
| Z              | kąt pochylenia podnóżka                      | [°]       | 95 – 150   | 95 – 150   | 95 – 135   |
|                | max. waga użytkownika                        | [kg]      | 40         | 60         | 90         |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

\* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

| Wymiary i waga sprzętu | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Szerokość              | [cm]      | 51        | 56        | 61        |
| Szerokość po złożeniu  | [cm]      | 51        | 56        | 61        |
| Długość                | [cm]      | 112       | 126       | 152       |
| Długość po złożeniu    | [cm]      | 87        | 91        | 100       |
| Wysokość               | [cm]      | 97        | 109       | 123       |
| Wysokość po złożeniu   | [cm]      | 49        | 49        | 55        |
| Waga                   | [kg]      | 17,6      | 19,8      | 25,4      |

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



## STABILIZACJA TUŁOWIA



FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA  
KAMIZELKA TUŁOWIA



FP-02 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA  
KAMIZELKA TYPU H



FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KA-  
MIZELKA TYPU H



FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY  
PAS TUŁOWIA




FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE  
SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW

## STABILIZACJA MIEDNICY



FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY  
PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ  
MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY  
BRZUSZNEJ

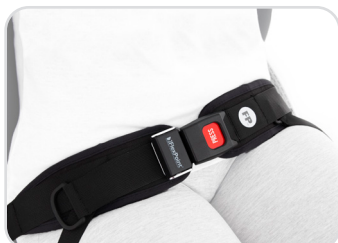

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY  
PAS BIODROWY



FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY



FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY  
ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

## STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH



FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA



FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY  
KOSTEK



FP-21 DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z  
FUNKCJĄ WENTYLACJI



FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZU-  
JĄCY

## PASY UNIWERSALNE

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH FLEX-POINT®, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI  
ZNAJDZIESZ NA [AKCES-MED.COM](https://akces-med.com)



## Bezpieczeństwo



### NVA/NVE/NVH\_001 Światła LED (2 szt.)

Białe światło z przodu i czerwone z tyłu wózka sprawiają, że wózek będzie bardziej widoczny w trakcie spacerów, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.



### NVA/NVE/NVH\_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P

Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



## Stabilizacja



### NVA/NVE/NVH\_101 Pasy odwodzące uda

Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiezieniu, a także zapobiegają zsuwaniu się użytkownika.



### NVA/NVE/NVH\_107 Pas biodrowy

Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



### NVA/NVE/NVH\_114 Kamizelka H

Działa jako stabilizator tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



### NVA/NVE/NVH\_126 Pas tułowia

Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed wypadnięciem. Anatomiczny kształt i zapięcie velcro pozwala na komfortowe dopasowanie.



### NVA/NVE/NVH\_128 Regulowany klin międzyudowy

Klin zapewnia jeszcze lepsze dopasowanie wózka do potrzeb użytkownika. Dzięki regulacji głębokości można zmienić jego położenie na siedzisku.



### NVA/NVE/NVH\_130 Kamizelka 4-punktowa

Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia jej dopasowanie.



### NVA\_NVA/NVE/NVH\_134 Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm

Mocowane są do tapicerki siedziska po obu stronach wózka. Dzięki nim można zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm.



### NVA/NVE/NVH\_137 Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm

Mocowane są do tapicerki siedziska po obu stronach wózka. Dzięki nim można zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm.



**NVA/NVE/NVH\_147 5-punktowe paski stabilizujące stopy**

Ergonomiczne zaprojektowane krzyżowe paski stóp doskonale zabezpieczają stopę oraz piętę. Zapinane na rzepy.




**NVA/NVE/NVH\_161 Sandały stabilizujące stopy i stawy skokowe**

Zabezpieczają oraz stabilizują staw skokowy. Wykonane z elastycznego materiału, rekomendowane dla osób ze wzmożonym napięciem mięśni.



**NVA/NVE/NVH\_162 Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint®**

Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint® to doskonała pomoc w poprawnej stabilizacji stóp użytkownika w wykorzystywanym przez niego sprzęcie.

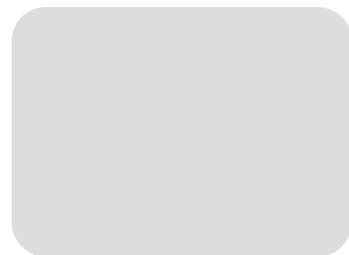

**NVA/NVE/NVH\_163 Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)**

Anatomiczny kształt pasów zapewnia odpowiednie dopasowanie ich do ciała użytkownika, poprawiając przy tym jego komfort oraz bezpieczeństwo. Ułatwiają kontrolę nad utrzymaniem nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają przed zsuwaniem się użytkownika.



**Komfort**



**NVA/NVE/NVH\_403 Stolik**

Wykonany z tworzywa sztucznego. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków.



**NVA/NVE/NVH\_405 Daszek**

Zapewnia osłonę zarówno przed słońcem jak i opadami atmosferycznymi.



**NVA/NVE/NVH\_408 Osłona przeciwdeszczowa**

Stanowi doskonałe zabezpieczenie użytkownika oraz wózka przed opadami deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się także jako osłona przed wiatrem.



**NVA/NVE/NVH\_411 Uchwyt na kubek**

Uniwersalny uchwyt montowany do ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki z napojem jest łatwy i szybki.



**NVA/NVE/NVH\_412 Poduszka Elastico siedziska**

Dokładnie dopasowuje się do ciała użytkownika. Wykonana z pianki termoaktywnej VISmemo™, pokrytej oddychającą tkaniną przestrzenną.



**NVA/NVE/NVH\_415 Osłona na koła**

Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. Chronią przed przenoszeniem zabrudzeń z opon do wnętrza pomieszczeń.



**NVA/NVE/NVH\_429 Miękka osłona na podnóżek**

Komfortowa nakładka, chroniąca stopy przed bezpośrednim kontaktem z płytą podnóżka.



**NVA/NVE/NVH\_445 Śpiwór**

Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do wzrostu użytkownika, okrywającą także podnóżek wózka. Ocieplana podszewka stanowi dodatkową ochronę przed zimnem.



**NVA/NVE/NVH\_447 Mufki zimowe**

Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje dłonie podczas spacerów.



**NVA/NVE/NVH\_448 Stolik samopoziomujący**

Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki specjalnemu workowi z granulatem można go stabilnie położyć na kolanach lub na innej nierównej powierzchni.



## Przechowywanie



### NVA/NVE/NVH\_501 Torba

Stylowa i pojemna torba zmieści wiele przydatnych drobiazgów.



### NVA/NVE/NVH\_506 Pokrowiec do przenoszenia wózka

Doskonałe rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie złożonego wózka przed uszkodzeniami (np. w czasie transportu).



### NVA/NVE/NVH\_509 Organizer

Podręczna torba zakładana na rączkę wózka. Organizer posiada dwa przydatne otwory na kubek z kawą bądź butelkę wody.



## Rozbudowa



### NVA/NVE\_625 Moduł HOME

Zamieni wózek NOVA/NOVA EVO w wersję do użytku domowego. Cztery małe koła obrotowe pozwalają na łatwe manewrowanie wózkiem w ciasnych pomieszczeniach.



### NVE/NVH\_626 Moduł EVO

Przednie koła skrętne ułatwiają manewrowanie wózkiem, a tylne pompowane poprawiają jego amortyzację. Moduł EVO to doskonałe rozwiązanie w przypadku długich spacerów czy pokonywania miejscowych przestrzeni.



### NVE/NVH\_627 Moduł NOVA

Cztery pompowane koła gwarantują komfort podczas jazdy w zróżnicowanym terenie. System SmarTraction pozwala na zmianę rozstawu osi kół, co w zależności od potrzeb umożliwia węższy rozstaw dla zwiększenia zwrotności oraz szerszy dla zwiększenia stabilności wózka.