



OmbreloTM

wózek specjalny



Ombrelo™
wózek specjalny

FP READY



Lekki, składany w formę parasolki i bardzo wytrzymały wózek dla dzieci oraz dorosłych. Posiada innowacyjne siedzisko **BodyPrint™**, które za pomocą pasów możemy dopasować do użytkownika. Siedzisko może być płaskie lub wklęsłe, wszystko zależne od potrzeb i dysfunkcji. Stały **30°** kąt pochylenia siedziska (kubetek), zmniejsza nacisk na tkankę miękką, zapobiegając odleżynom.

Wózek **OMBRELO™** jest bardzo wygodny i stabilny, a przy tym poręczny i łatwy w manewrowaniu.

Idealnie sprawdza się do przewożenia osób na badania czy zabiegi w szpitalu, jak również podczas długich spacerów na świeżym powietrzu. Bardzo prosty i łatwy w obsłudze.

Regulowane podnóżki **FlipFlap™** możemy odchylić na boki, aby ułatwić wejście do wózka i wyjście z niego. Produkt dostępny w **4 rozmiarach**, a największy z nich przeznaczony jest dla osób o wadze do **120 kg**. Jeśli masz specjalne wymagania i szukasz doskonałej stabilizacji na pewno znajdziesz dla siebie odpowiednie rozwiązanie w naszej bogatej ofercie akcesoriów.

OMBRELO™ przeszedł pozytywnie **Crash Testy** wg normy **EN 7176/19**

**MEDICAL
DEVICE**
CLASS I



**WYRÓB
MEDYCZNY**
KLASA I



WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

*Felgi standardowo dostępne są w kolorze jasnoszarym z możliwością zamiany na felgi czarne.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Składany stelaż typu parasolka | Rączki do prowadzenia wózka | 5-punktowe pasy z regulacją wysokości montażu (Chwyc i pociągnij™) | Zmienny stosunek kąta siedziska do oparcia 85° - 95° | Regulowany zagłówek | Tapicerka BodyPrint™ ze zmiennymi strefami napięcia siedziska i oparcia | Niezależne hamulce kół tylnych | Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym: tylne pompowane, przednie pełne skrętne | Niezależne odchylane podnóżki FlipFlap™ z funkcją regulacji, z 5-punktowymi paskami stabilizującymi stopy | Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie pleców | Przedłużenie oparcia | Elementy odblinkowe | Uchwyty TransFix™

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Wersja 10/05/2021

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

akces-med.com

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com



Ombrello™

szczególne zalety i kolorystyka

FP READY



SZCZEGÓLNE ZALETY



Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



Niska waga

Produkt wykonano z lekkich stopów metali co korzystnie wpływa na niską wagę urządzenia.



Wysoka wytrzymałość

Konstrukcja wózka zapewnia dużą wytrzymałość wózka – maksymalna waga użytkownika w rozmiarze 5 to 120 kg!

24

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Podnóżek Flip Flap™

Specjalny system podnóżków zapewniający szeroki zakres regulacji. Odchylane platformy ułatwiają wsiadanie, zsiadanie z wózka.



Elementy odblaskowe

Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.



5-punktowe pasy mocujące stopy z możliwością stabilizacji obwodowo lub krzyżowo.



Tapicerka **BodyPrint™**.

To unikalny system pasów, które po precyzyjnym wyregulowaniu dopasują się idealnie do kształtu ciała.



Podnóżki **FlipFlap™** z funkcją regulacji wysokości przywiedzenia i odwiedzenia stopy sprawiają, że wózek rośnie wraz z dzieckiem.



Uchwyty transportowe **TransFix™** przeznaczone do bezpiecznego przewożenia wózka wraz z użytkownikiem komunikacją miejską oraz przystosowanymi do tego pojazdami. Wózek przeszedł Crash Testy wg. normy **EN 7176/19**.

KOLORYSTYKA



ODDYCHAJĄCA



ANTYALERGICZNA




ŁATWA DO CZYSZCZENIA



EKOLOGICZNA



WODOODPORNA

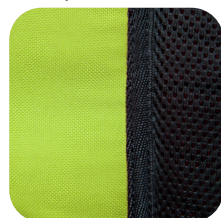

Green Grass
Rozmiar 2
(Comfort)



Hot Red
Rozmiar 3
(Comfort)



Brown Sugar
Rozmiar 4
(Comfort)



Blue Horizon
Rozmiar 5
(Flex)

Istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania 30 dni.



Tapicerka Comfort - oddychająca, przepuszczająca powietrze tapicerka przestrzenna.



Tapicerka Flex - łatwo zmywalna o zwiększonej wytrzymałości.



Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.

Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 10/05/2021

akces-med.com

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

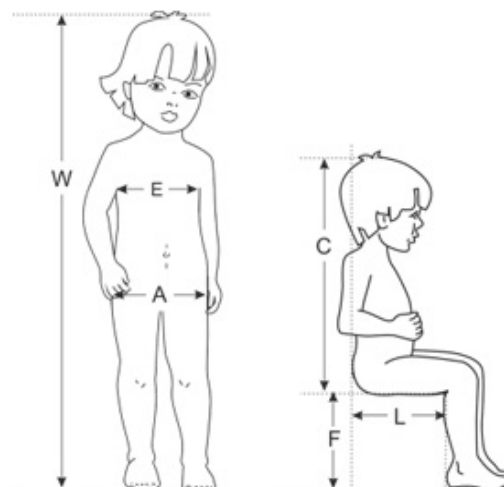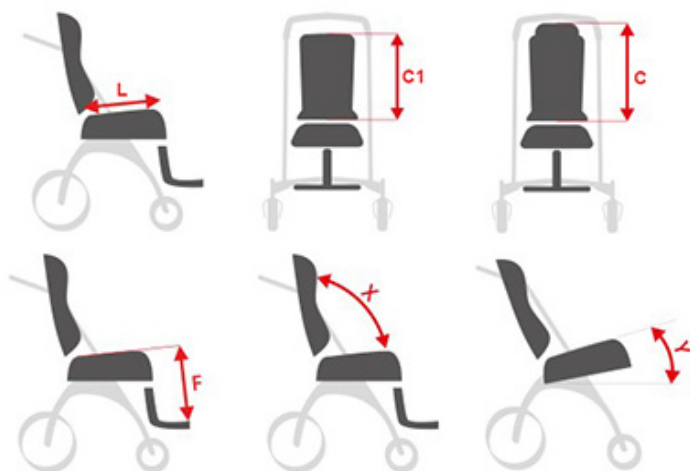

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	100 – 130	100 – 150	120 – 180	130 – 180
A/E	szerokość siedziska/oparcia	[cm]	29	34	39	43
L	głębokość siedziska	[cm]	28 – 36	27 – 38	27 – 38	35 – 42
C	wysokość oparcia (z zagłówkiem)	[cm]	46 – 72	46 – 72	53 – 76	54 – 80
F	długość podnóżków	[cm]	16 – 64	16 – 64	16 – 64	16 – 64
C ₁	wysokość oparcia (bez zagłówka)	[cm]	58	55	63	60
	długość stopki	[cm]	20	21	23	23
	wysokość rączek prowadzących	[cm]	100 – 105	100 – 105	100 – 105	100 – 105
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	90	90	90	90
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	30	30	30	30
	max. waga użytkownika	[kg]	45	55	75	120

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	57	63	67	72
Długość	[cm]	125	130	137	137
Wysokość	[cm]	101	104	101	108
Szerokość po złożeniu	[cm]	36	35	36	34
Długość po złożeniu	[cm]	130	133	133	130
Wysokość po złożeniu	[cm]	45	42	46	39
Waga	[kg]	18,5	18,5	20	20,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.



STABILIZACJA TUŁOWIA



FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA
KAMIZELKA TUŁOWIA



FP-02 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA
KAMIZELKA TYPU H



FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KA-
MIZELKA TYPU H



FP-04 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA ZE
WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

STABILIZACJA MIEDNICY




FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY
PAS TUŁOWIA




FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE
SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW




FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY
PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ
MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY
BRZUSZNEJ

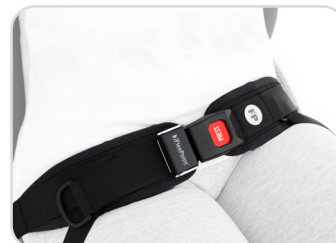

FP-11 4-PUNKTOWY DYNAMICZNY
PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ
MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY
BRZUSZNEJ

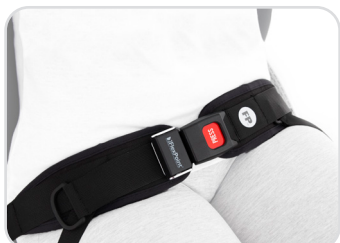

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY
PAS BIODROWY

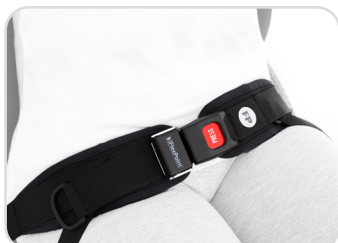

FP-13 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY
PAS BIODROWY



FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY



FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY
ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH



FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA



FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY
KOSTEK



FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZU-
JĄCY

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH FLEX-POINT®, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI
ZNAJDZIESZ NA AKCES-MED.COM



Bezpieczeństwo



OMO_001 Światła LED (2 szt.)

Białe światło z przodu i czerwone z tyłu wózka sprawia, że wózek będzie bardziej widoczny w trakcie spacerów, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.




OMO_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P

Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



OMO_012 Biodrowy pas bezpieczeństwa Qstraint

Wysokiej jakości pas biodrowy w kolorze niebieskim, wyposażony w zapięcie typu samochodowego.

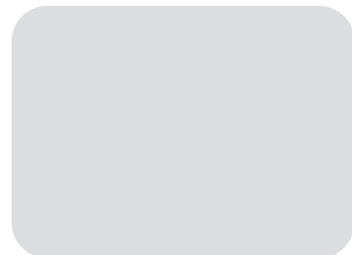

OMO_013 Barierka

Bezpieczny uchwyt dodatkowo chroni użytkownika przed wypadnięciem z wózka.



Stabilizacja



OMO_101 Pasy odwodzące uda

Pozwalają na utrzymanie nóg w odwieńczeniu, a także zapobiegają zsuwaniu się użytkownika.



OMO_107 Pas biodrowy

Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyc i pociągnij™.



OMO_113 Pas stabilizujący tułów

Pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia tułowia i pomaga w utrzymaniu prawidłowej pozycji w trakcie siedzenia.



OMO_114 Kamizelka H

Działa jako stabilizator tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyc i pociągnij™.



OMO_115 Pas łydkowy

Stanowi dodatkowe zabezpieczenie podudzi. Od przodu ogranicza wyprost, a od tyłu ogranicza ich zgięcie.



OMO_121 Zagłówek z podparciem głowy

Doskonale stabilizują nawet u osób z brakiem kontroli głowy. Możliwość zamontowania na różnej wysokości na oparciu.



OMO_124 Pelota lędźwiowa

Pozwala na lepsze podparcie pleców w odcinku lędźwiowym. Możliwość montażu na odpowiedniej wysokości.



OMO_125 Kamizelka pełna 6-punktowa

Działa jako stabilizator tułowia. Posiada duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała użytkownika za pomocą systemu Chwyc i pociągnij™.



OMO_126 Pas tułowia

Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed wypadnięciem. Anatomiczny kształt i zapięcie velcro pozwala na komfortowe dopasowanie do ciała.



OMO_128 Regulowany Klin międzyudowy

Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Klin można łatwo zdemontować.



OMO_129 Pasy odwodząco-stabilizujące uda

Pozwalają na ograniczenia przywiedzenia lub odwiedzenia nóg w zależności od potrzeb.



OMO_130 Kamizelka pełna 4-punktowa

Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia jej dopasowanie.



OMO_132 Zagłówek Elastico

Obszyty pianką termoaktywną dopasowującą się do kształtu głowy. Zapewnia bardziej komfortowe podparcie i stabilizację. Montowany w miejsce standardowego zagłówka.



OMO_133 Zagłówek z pianki całościowy

Obejmujący całą szerokość oparcia. Zwiększa bezpieczeństwo spastycznych użytkowników.



OMO_135 Boczne peloty sztywne

Pełniejsza stabilizacja kończyn dolnych wskazana u osób z nadmiernym odwiedzeniem nóg.



OMO_136 Pas udowy

Pomaga w utrzymaniu właściwej pozycji siedzącej. Taśmy z rzepem oraz ergonomiczny kształt pozwalają na lepsze dopasowanie.




OMO_160 Zagłówek Octagon™

Wypożyczony w wewnętrzne aluminiowe „żebro” obudowane miękką pianką. Efektywniej stabilizuje głowę poprzez większą precyzję dopasowania kształtu.



OMO_162 Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint®

Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint® to doskonała pomoc w poprawnej stabilizacji stóp użytkownika w wykorzystywanym przez niego sprzęcie.

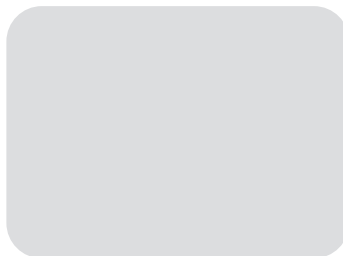

OMO_163 Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)



Komfort



OMO_402 Parasolka

Mocowana do ramy wózka doskonale chroni przed słońcem.



OMO_403 Stolik

Wykonany z tworzywa sztucznego. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków.



OMO_405 Daszek bez osłon bocznych

Zapewnia osłonę zarówno przed słońcem jak i opadami atmosferycznymi.



OMO_408 Osłona przeciwdeszczowa

Stanowi doskonałe zabezpieczenie użytkownika oraz wózka przed opadami deszczu i śniegu. Dobrze sprawdza się także jako osłona przed wiatrem.



OMO_409 Moskitiera

Osłona z delikatnego materiału, łatwa w montażu. Stanowi świetną ochronę przed insektami i owadami, szczególnie w okresie letnim.



OMO_410 Pokrowiec na zagłówek

Ułatwia utrzymanie zagłówka w czystości. Wykonany z miękkiej bawełny z elastyczną gumką ułatwiającą zakładanie.



OMO_411 Uchwyt na kubek

Uniwersalny uchwyt montowany do ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki z napojem jest łatwy i szybki.



OMO_412 Poduszka Elastico siedziska

Dokładnie dopasowuje się do ciała użytkownika. Wykonana z pianki termoaktywnej VISmemo™, pokrytej oddychającą tkaniną przestrzenną.



OMO_413 Poduszka Elastico oparcia
Dokładnie dopasowuje się do ciała użytkownika. Wykonana z pianki termoaktywnej VISmemo™, pokrytej oddychającą tkaniną przestrzenną.



OMO_415 Osłony na koła tylne
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. Chronią przed przenoszeniem zabrudzeń z opon do wnętrza pomieszczeń.



OMO_416 Śpiwór letni
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do wzrostu użytkownika, okrywającą także podnóżek wózka.



OMO_417 Śpiwór zimowy
Zabezpiecza nogi oraz tułów. Stanowi estetyczną osłonę ciała, dopasowaną do wzrostu użytkownika, okrywającą także podnóżek wózka. Ocieplana podszewka stanowi dodatkową ochronę przed zimnem.




OMO_418 Kapturek do śpiwora zimowego
Doczepiany do śpiwora zimowego. Chroni głowę przed mrozem, wiatrem i wilgocią.



OMO_419 Poduszka siedziska (profilowane uda)
Anatomiczne wycięcie na uda zwiększa komfort siedzenia.



OMO_420 Daszek z osłonami bocznymi
Zapewnia osłonę zarówno przed słońcem jak i opadami atmosferycznymi. Posiada osłony boczne jeszcze lepiej chroniące przed wiatrem.

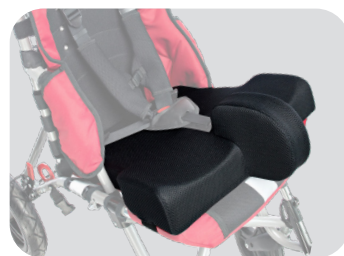

OMO_421 Poduszka siedziska (profilowany klin)
Dzięki niej pokonywanie przeszkód terenowych jest o wiele prostsze. Ułatwia pochylenie wózka, wjazdy na krawężniki, stopnie i inne pionowe elementy nawierzchni.



OMO_433 Stopka wspomagająca
Dzięki niej pokonywanie przeszkód terenowych jest o wiele prostsze. Ułatwia pochylenie wózka, wjazdy na krawężniki, stopnie i inne pionowe elementy nawierzchni.



OMO_439 Hamulec ręczny
Hamulec ręczny pozwala nagle i pewnie zatrzymać wózek. Ułatwia także manewrowanie wózkiem. Hamulec wyposażono w czterostopniową blokadę, dzięki temu spełnia funkcję hamulca postojowego.



OMO_442 Osłony na koła przednie
Łatwe w montażu i praktyczne w użyciu. Chronią przed przenoszeniem zabrudzeń z opon do wnętrza pomieszczeń.



OMO_447 Mufki zimowe
Wygodne i ciepłe mufki osłonią Twoje dłonie podczas spacerów.



OMO_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki specjalnemu workowi z granulatem można go stabilnie położyć na kolanach lub na innej nierównej powierzchni.



Przechowywanie



OMO_505 Kosz pod siedzisko

Umożliwia przewożenie drobnych elementów w wózku. Montowany jest do podstawy jezdnej wózka.



OMO_506 Pokrowiec do przenoszenia wózka

Doskonałe rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie złożonego wózka przed uszkodzeniami (np. w czasie transportu). Dopasowany do rozmiaru i kształtu wózka.



OMO_507 Pokrowiec na butlę tlenową

Mocowany jest za pomocą pasów o regulowanej długości. Wykonywany jest na wymiar, tak aby idealnie pasował do butli tlenowej.



OMO_508 Torby boczne (2szt.)

Estetyczne i praktyczne torby boczne mocowane na wysokości siedziska. Umożliwiają przechowywanie drobnych elementów i nadają wózkowi przyjazny wygląd.



OMO_509 Organizer

Podręczna torba zakładana na rączkę wózka. Organizer posiada dwa przydatne otwory na kubek z kawą bądź butelkę wody.



Rozbudowa



OMO_611 Buggypod PERLE siedzisko

Adapter umożliwiający montaż nakładki Buggypod PERLE na podstawie BuggyBoard MAXI.



OMO_612 Buggypod PERLE Adapter

Gdy Twoje dziecko jest zbyt zmęczone, aby chodzić, lub gdy jesteś w pośpiechu, BuggyBoard MAXI ułatwia Wam obu wspólną podróż.