

THERA GO

Linia produktów funkcjonalnych
i terapeutycznych



STRONA

3

Pojęcia podstawowe
i rozwój Thera Go®

STRONA

7

Thera Go®
Produkty

8 Kończyna dolna

16 Kończyna górna

22 Przegląd produktów

STRONA

24


Materiały
marketingowe



Pojęcia podstawowe

Funkcjonalna TERAPIA

Dla firmy Orliman kluczowym jest poszukiwanie rozwiązań wspomagających nowe trendy rehabilitacyjne. Różne studia wskazały, iż proces rehabilitacji jest znacznie szybszy i pozwala na zastosowanie wcześniejszej mobilizacji pacjenta gdy wspomagany jest ortotyką, co z kolei przekłada się na zadowolenie pacjenta z postępów. Ortezy zaprojektowano do zwiększenia statycznego i dynamicznego wsparcia oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa odnowienia się urazu.

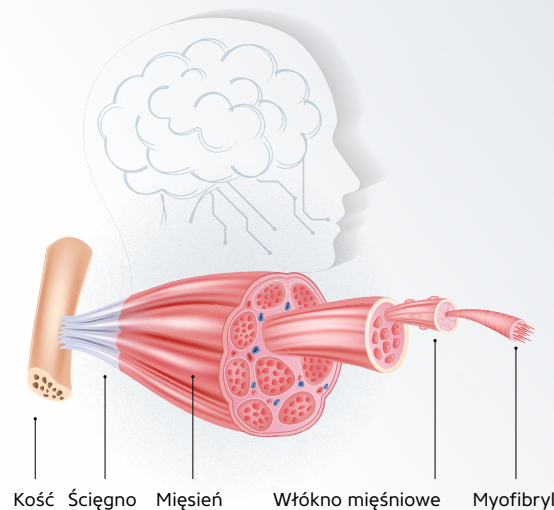

Efektywna KOMPRESJA

Wielokierunkowa kompresja zapobiega powstawaniu i rozwojowi obrzęków, obniża napięcie tkanek miękkich oraz powoduje stymulację proprioceptywną. W ten sposób bardzo pozytywnie wpływa na poprawę funkcjonowania stawu oraz mięśni, a z drugiej strony wpływa na optymalizację krążenia, zapobiegając zastojom w okolicy obręzków i także reguluje temperaturę ciała.

Estetyczne **WZORNICTWO**

Nowoczesne wzornictwo zostało zainspirowane strukturami anatomicznymi części ciała, na które produkty są zakładane, dzięki temu specyficzna budowa ortez daje użytkownikowi poczucie ochrony a jednocześnie naturalną swobodę ruchów.



Dynamiczna **REHABILITACJA**

Przedłużające się lub niechciane unieruchomienie prowadzi do funkcjonalnych ograniczeń a poprzez to zwiększa sztywność uszkodzonej tkanki/struktury. Thera Go został stworzony by zapewnić pacjentom szybszy i mniej uciążliwy powrót do sprawności po urazie. Oprócz zaplanowanej przez profesjonalistów terapii, Thera Go idealnie wspomaga pacjentów w ich codziennej aktywności i sporcie.




Technologia Thera Go®


WYGODNY I ODPORNY MATERIAŁ TEKSTYLNÝ

Materiał jest kombinacją elastycznych i nieelastycznych nici zastosowanych by umożliwić efektywną funkcjonalną rehabilitację.


- 1 Elastomer wysokiej kompresji
- 2 Miękkie wielowłókna
- 3
- 4

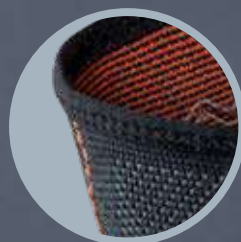

Wzmocnione krawędzie dla lepszej adaptacji anatomicznej a tym samym zwiększenie użyteczności i trwałości produktu.

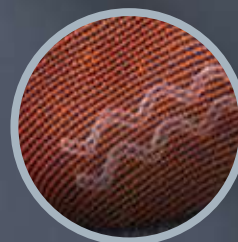

Silikonowe dodatki wewnątrz rękawa zapobiegające zsuwaniu się produktu podczas aktywności.

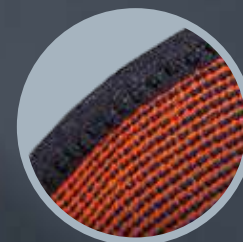

Szwy na wewnętrznych krawędziach zostały zminimalizowane i umieszczone od wewnętrznej strony w celu zminimalizowania otarć skóry.



Wsparcie terapeutyczne



Delikatny, lekki i przyjemny materiał



Doskonała przepuszczalność



Wolny od latexu

TECHNICZNE DETALE WSPIERAJĄCE REKONWALESCENCJĘ


Zastosowane wkładki wiskoelastyczne zapewniają mikromasaż podczas ruchu, gwarantując redukcję obrzęków i siniaków.



TGO340




TGO480

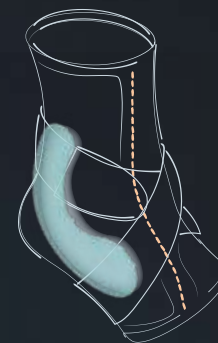

TGO490

Sztywne elementy ortez zapewniają właściwą stabilizację stawu oraz kontrolę funkcjonalną aktywności.

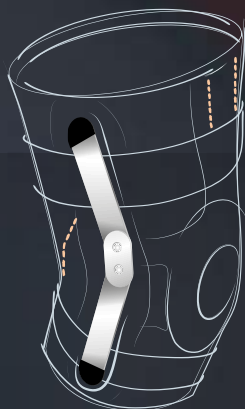


TGO487



TGO350

Taśmy dopinające zapewniają indywidualne dopasowanie siły napięcia oraz pozwalają na adaptację w zależności od fazy rehabilitacji.

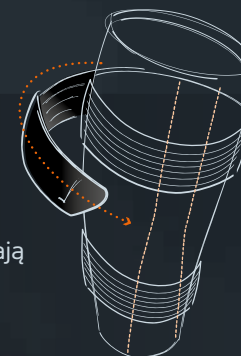

TGO484



TGO350



Gama produktowa

KOŃCZYNA DOLNA

Funkcjonalny
elastyczny
stabilizator stawu
kolanowego ze
stalkami bocznymi



TGO480

Strona 8

Funkcjonalny
stabilizator stawu
kolanowego z
szynami bocznymi z
regulacją kąta zgięcia



TGO487

Strona 10

Funkcjonalna
elastyczna orteza
uda z taśmami
dociągowymi



TGO481

Strona 12

Funkcjonalna
elastyczna orteza
podudzia z taśmami
dociągowymi



TGO484

Strona 13

Funkcjonalna
elastyczna orteza
stawu skokowego
z taśmami
stabilizującymi



TGO490

Strona 14

KOŃCZYNA GÓRNA

Funkcjonalna orteza
stawu barkowego



TGO330

Strona 16

Funkcjonalny
stabilizator łokcia z
taśmą dociągową



TGO340

Strona 18

Funkcjonalny
stabilizator
nadgarstka z taśmą
dociągową



TGO350

Strona 20



Funkcjonalny elastyczny stabilizator stawu kolanowego ze stalkami bocznymi



ROZMIARY | cm

1 A: 41-44
B: 31-34

2 A: 44-47
B: 34-37

3 A: 47-50
B: 37-40

4 A: 50-53
B: 40-43


5 A: 53-56
B: 43-46

Działanie

- Stabilizacja stawu kolanowego, zabezpieczenie oraz kompresja.
- Poprawa propriocepcji.

Wskazania

- Niestabilność rzepki.
- Wyсіki i obrzęki w przebiegu artrozy i/lub stanów zapalnych stawu.
- Fibromialgia.
- Skręcenia i kontuzje.
- Stany podrażnienia tkanek po operacjach lub pourazowo.

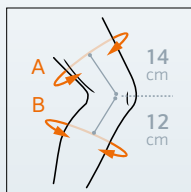

31 Długość
cm ortozy

8B

Uniwersalny
na prawą
i lewą
kończynę





DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁ



WIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJA



DOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ




WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE

THERA^{GO} 9



**Spiralne stalki dla
lepszego bocznej
stabilizacji stawu.**

Ponadto zapobiega
zwijaniu się materiału
rękawa ortezy.

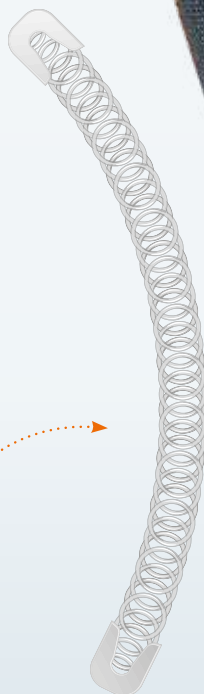

**Wiskoelastyczny pierścień
około rzepkowy, z
wzmocnioną częścią na
pyszczyk oraz redukującą
napięcie więzadła rzepki.**

Zapewnia kontrolę okolicy
rzepki oraz przynosi ulgę w bólu
poprzez mikromasaż, przyspiesza
redukcję obrzęku podczas
ruchów w stawie.



Funkcjonalny stabilizator stawu kolanowego z szynami bocznymi z regulacją kąta zgięcia



ROZMIARY | cm

1 A: 39-42
B: 29-32

2 A: 42-45
B: 32-35

3 A: 45-48
B: 35-38

4 A: 48-51
B: 38-41


5 A: 51-54
B: 41-44

Działanie

- Stabilizacja stawu kolanowego.
- Poprawa propriocepcji.

Wskazania

- Niestabilność rzepki i/lub boczno-przyśrodkowa stawu.
- Uszkodzenia łąkówek.
- Wyсіęki i obrzęki w przebiegu artrozy i/lub stanów zapalnych stawu.
- Fibromialgia.
- Skręcenia i kontuzje.
- Stany podrażnienia tkanek po operacjach lub pourazowo.

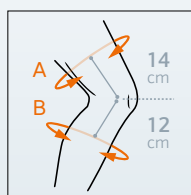

31 Długość
cm ortozy

8B

Uniwersalny
na prawą
i lewą
kończynę

J.038.00 orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia.
J.038.01 orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia dla dzieci.





DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁ



WIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJA




DOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ



WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE

THERA^{GO} 11

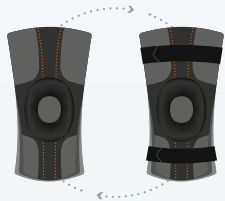

**EWOLUCYJNA
STABILIZACJA**
3 stopnie stabilizacji

Stabilizator zawiera szynę policentryczną zapewniającą płynność ruchu i stabilność boczno-przyśrodkową, zapobiega również przeprostowi, a ponadto pozwala na ograniczenie zgięcia w kątach zgięcia 30, 60 lub 90 stopni.



Łatwe do usunięcia sztywne taśmy dociągowe, których działanie zapewnia zastosowanie właściwej kompresji i przylegania szyn.

Wiskoelastyczny pierścień okołorzępkowy, ze wzmocnioną częścią na piszczel oraz redukującą napięcie więzadła rzepki.

Zapewnia kontrolę okolicy rzepki oraz przynosi ulgę w bólu poprzez mikromasaż, przyspiesza redukcję obrzęku podczas ruchów w stawie.



Funkcjonalna elastyczna orteza uda z taśmami dociągowymi



ROZMIARY | cm

1	40-44
2	44-48
3	48-52
4	52-57
5	57-62

Działanie

- Wsparcie i stabilizacja mięśni uda.
- Obrzęk tkanek głębokich i powierzchniowych na skutek urazu.
- Poprawa propriocepcji.

Wskazania

- Napięcie mięśni, kontuzje.
- Rozerwanie lub zerwanie włókien mięśniowych.
- Podrażnienia pourazowe.

Obwód uda



25 cm Długość ortozy

8:B

Uniwersalny na prawą i lewą kończynę



Zawiera łatwe do mocowania **taśmy elastyczne**, które zapewniają indywidualne dopasowanie siły kompresji, stymulującej krążenie krwi, a co najważniejsze redukcję dolegliwości bólowych w okolicy urazu..



DELIKATNY, LEKKI I PRZYJEMNY MATERIAŁ




DOSKONAŁA PRZEPUSZCZALNOŚĆ



WIELOFUNKCYJNA KOMPRESJA



WSPARCIE TERAPEUTYCZNE

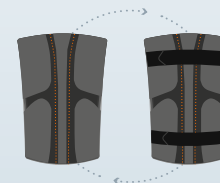

EWOLUCYJNA STABILIZACJA
2 stopnie stabilizacji

Funkcjonalna elastyczna orteza podudzia z taśmami dociągowymi



ROZMIARY | cm

1	27-29
2	29-32
3	32-36
4	36-40
5	40-45

Działanie

- Wsparcie i stabilizacja mięśni podudzia.
- Obrzęk tkanek głębokich i powierzchniowych na skutek urazu.
- Poprawa propriocepcji.


Wskazania

- Napięcie mięśni, kontuzje.
- Rozerwanie lub zerwanie włókien mięśniowych.
- Podrażnienia pourazowe.

Obwód podudzia

25 Długość
cm ortezi8:B
Uniwersalny
na prawą
i lewą
kończynę

Zawiera łatwe do usunięcia **taśmy elastyczne**, które zapewniają indywidualne dopasowanie siły kompresji, stymulującej krążenie krwi a co najważniejsze redukcję dolegliwości bólowych w okolicy urazu.

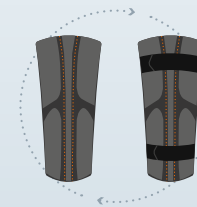DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁDOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆWIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJAWSPARCIE
TERAPEUTYCZNEEWOLUCYJNA
STABILIZACJA
2 stopnie stabilizacji

Funkcjonalna elastyczna orteza stawu skokowego z taśmami stabilizującymi



ROZMIARY | cm

1	19-21
2	21-23
3	23-25
4	25-27
5	27-29

• Działanie

- Stabilizacja stawu, wsparcie i kompresja.
- Poprawa propriocepcji.

• Wskazania

- Skręcenia i kontuzje.
- Fibromialgia.
- Wyсіki i obrzki w przebiegu artrozy i/lub stanów zapalnych stawu.
- Podrażnienia pourazowe lub pooperacyjne.

2 cm powyżej kostek



16
cm Wysokość

8:B

Uniwersalny
na prawą
i lewą
kończynę

J.036.00 orteza stabilizująca staw skokowy.

J.036.01 orteza stabilizująca staw skokowy dla dzieci.





DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁ



WIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJA




DOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ



WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE

THERA^{GO} 15

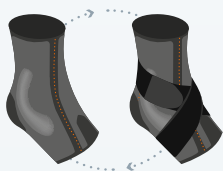

EWOLUCYJNA

STABILIZACJA


3 stopnie stabilizacji

Dwie (wewnętrzna i zewnętrzna) wkładki wiskoelastyczne dla redystrybucji kompresji oraz mikromasażu,

umożliwiają oddziaływanie na tkanki miękkie w celu zredukowania obrzęku oraz zmniejszenia odczynu zapalnego okolicy stawu, podczas aktywności.



Elastyczna taśma
dociągowa

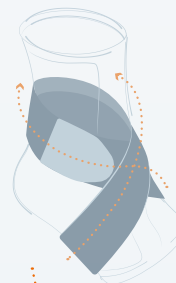

Sztywna taśma
dociągowa



Orteza wyposażona jest w dwie taśmy o różnym stopniu elastyczności, zapinane w systemie ósemkowym.

Sztywna taśma zapewnia większą stabilizację i bezpieczeństwo, elastyczna wspomaga kontrolę ruchomości stawu podczas aktywności.

Wzmocnione krawędzie dla lepszej adaptacji anatomicznej a tym samym zwiększenia użyteczności i trwałości produktu.



Funkcjonalna orteza stawu barkowego



ROZMIARY | cm


1	22-26
2	26-31
3	31-37
4	37-44
5	44-51

Działanie

- Stabilizacja stawu barkowego, zabezpieczenie i kompresja.
- Odpowiednio założona orteza zapewnia efekt elewacji kończyny górnej i odciążenia struktur stawu barkowego.
- Poprawa propriocepcji.

Wskazania

- Wzmoczone napięcie, kontuzje.
- Rozerwanie lub zerwanie włókien mięśniowych.
- Skręcenia, podwichnięcia.
- Fibromialgia.
- Zmiany zwyrodnieniowe.
- Podrażnienia pooperacyjne, pourazowe.

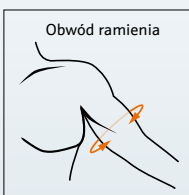

35 Długość
cm ortezy

8:B Uniwersalny
na prawą
i lewą
kończynę

L.051.00 orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Desault").

L.051.01 orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Desault") dla dzieci.





DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁ



WIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJA



DOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ



WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE

THERA**GO**® 17



*Orteza zawiera 2 skrzyżowane
taśmy stabilizujące w celu
kontroli, pozycjonowania
głowy kości ramiennej w
panewce.*

*Podwójnie regulowana
taśma stabilizująca
pozwala na regulację siły
i łatwości zapięcia,
ponadto zapewnia bardzo
duży komfort użytkowania.*

*Wzmocnione krawędzie
dla lepszej adaptacji
anatomicznej a tym samym
zwiększenia użyteczności i
trwałości produktu.*



Funkcjonalny stabilizator łokcia z taśmą dociągową



ROZMIARY | cm


1	21-23
2	23-25
3	25-27
4	27-29
5	29-31

• Działanie

- Kompresja tkanek okolicy stawu łokciowego.
- Zabezpieczenie propriocepcji.

• Wskazania

- Zapalenie przyczepów mięśniowych okolicy nadkłykcia bocznego/przyśrodkowego kości ramiennej.
- Skręcenia i kontuzje.
- Wysięki i obrzęki w przebiegu artrozy i/lub stanów zapalnych stawu.
- Podrażnienia pooperacyjne i pourazowe.

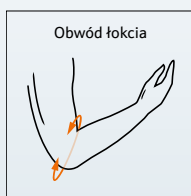

21
cm Długość

Uniwersalny
8B na prawą
i lewą
kończynę

L.050.00 orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez.
L.050.01 orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez dla dzieci.





DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁ



WIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJA




DOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ



WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE

THERA^{GO} 19

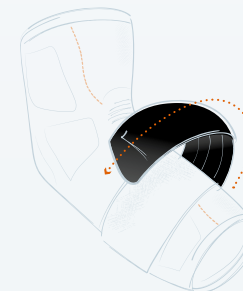

*Półsztywna taśma dociągowa
w celu indywidualnego i
stopniowego dopasowania.*

*Orteza zawiera dwie wkładki
wiskoelastyczne zapewniające
dystrybucję nacisku,*

*umożliwiają zastosowanie pożądanej
siły nacisku i dzięki temu uzyskać
efekt mikromasażu.*

*Redukcja szwów
poprawiająca
wygodę i nie
powodująca otarć.*



Funkcjonalny stabilizator nadgarstka z taśmą dociągową



ROZMIARY | cm

1	14-15
2	15-16
3	16-17
4	17-19
5	19-21

• Działanie

- Stabilizacja nadgarstka, zabezpieczenie oraz kompresja.
- Poprawa propriocepcji.

• Wskazania

- Zespół cieśni nadgarstka.
- Wyсіęki i obrzęki w przebiegu artrozy i/lub stanów zapalnych stawu.
- Fibromialgia.
- Skręcenia i kontuzje.
- Podrażnienia pooperacyjne i pourazowe.

Obwód nadgarstka



17
cm Długość

8B

Uniwersalny
na prawą
i lewą
kończynę

L.048.00 orteza na rękę i przedramię.
L.048.01 orteza na rękę i przedramię - dla dzieci.





DELIKATNY, LEKKI
I PRZYJEMNY
MATERIAŁ



WIELOFUNKCYJNA
KOMPRESJA




DOSKONAŁA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ




WSPARCIE
TERAPEUTYCZNE

THERA**GO**® 21

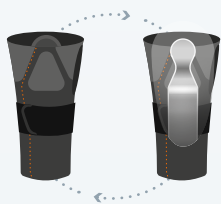

EWOLUCYJNA STABILIZACJA

3 stopnie stabilizacji

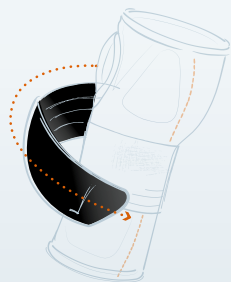

*Półsztywna taśma
dociągowa w celu
indywidualnego
i stopniowego
dopasowania.*

*Redukcja szwów
poprawiająca
wygodę i nie
powodująca otarć.*



*Plastyczna szyna
aluminiowa, wyciągana,
zapewnia właściwe
podparcie i stabilizację
nadgarstka.*



Gama produktowa



TGO481

Funkcjonalna elastyczna
orteza uda z taśmami
dociągowymi

ROZMIARY | cm

- 1 : 40-44
- 2 : 44-48
- 3 : 48-52
- 4 : 52-57
- 5 : 57-62

STABILIZACJA
EWOLUCYJNA



TGO484

Funkcjonalna elastyczna
orteza podudzia z
taśmami dociągowymi

ROZMIARY | cm

- 1 : 27-29
- 2 : 29-32
- 3 : 32-36
- 4 : 36-40
- 5 : 40-45

STABILIZACJA
EWOLUCYJNA



TGO480

Funkcjonalny elastyczny
stabilizator stawu kolanowego
ze stawkami bocznymi

ROZMIARY | cm

- 1 : A: 41-44
B: 31-34
- 2 : A: 44-47
B: 34-37
- 3 : A: 47-50
B: 37-40
- 4 : A: 50-53
B: 40-43
- 5 : A: 53-56
B: 43-46



TGO487

Funkcjonalny stabilizator stawu
kolanowego z szynami bocznymi
z regulacją kąta zgięcia

ROZMIARY | cm

- 1 : A: 39-42
B: 29-32
- 2 : A: 42-45
B: 32-35
- 3 : A: 47-50
B: 37-40
- 4 : A: 48-51
B: 38-41
- 5 : A: 51-54
B: 41-44

STABILIZACJA
EWOLUCYJNA



TGO490

Funkcjonalna elastyczna
orteza stawu skokowego z
taśmami stabilizującymi

ROZMIARY | cm

- 1 19-21
- 2 21-23
- 3 23-25
- 4 25-27
- 5 27-29

STABILIZACJA
EWOLUCYJNA



TGO330

Funkcjonalna
orteza stawu
barkowego

ROZMIARY | cm

- 1 22-26
- 2 26-31
- 3 31-37
- 4 37-44
- 5 44-51



TGO340

Funkcjonalny
stabilizator łokcia z
taśmą dociągową

ROZMIARY | cm

- 1 21-23
- 2 23-25
- 3 25-27
- 4 27-29
- 5 29-31



TGO350

Funkcjonalny
stabilizator nadgarstka
z taśmą dociągową

ROZMIARY | cm

- 1 14-15
- 2 15-16
- 3 16-17
- 4 17-19
- 5 19-21

STABILIZACJA
EWOLUCYJNA

Materiały marketingowe



Ref.: CAT#TGOPL

*Katalog
Thera Go®*
26 x 21 cm



PACKAGING

*Elementy
edukacyjne na
opakowaniach
produktów*

Ref.: EXP-THG

*Ekspozytor
produktowy*
150 x 40 cm





