



AkvosegoTM
leżaczek kąpielowy



Krzeselko kąpielowe **AKVOSEGO™** powstało z myślą o utrzymaniu właściwej higieny.

Opiekun może z łatwością samodzielnie wykonywać wszelkie czynności kąpielowe, podczas których dziecko jest właściwie zabezpieczone, a ryzyko urazu mechanicznego jest zminimalizowane.

Stabilna i komfortowa pozycja w krzeselku sprawia, że użytkownik dużo lepiej znosi kąpiel.

Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi

Regulowana głębokość siedziska i ruchome segmenty pozwalają na optymalne dopasowanie krzeselka.

Kompaktowa budowa powoduje, że **AKVOSEGO™** po złożeniu zajmuje bardzo małą przestrzeń.

W miejscach, w których krzeselko styka się z podłożem, zastosowane zostały piankowe osłony w celu wyeliminowania zarysowań.

Oferowane w **4** rozmiarach.



Wyrób Medyczny Klasy I
Class I Medical Device

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (**MPD**) – różne postaci,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane (**SM**), stwardnienie zanikowe boczne (**SLA**) i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.



KOLORYSTYKA



Blue (Rozmiar 0)



Green (Rozmiar 1)



Orange (Rozmiar 2)



Blue (Rozmiar 3)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Nieprzemakalna tapicerka wykonana z poliamidowej siatki, obojętnej na działanie wody | Regulowany stabilizator głowy | Regulowany stabilizator tułowia | Regulowany stabilizator nóg | Regulowany stelaż fotelika pokryty powłoką obojętną na działanie wody, wyposażony w osłony piankowe zabezpieczające powierzchnię wanny przed zarysowaniem | Pas biodrowo-udowy



SZCZEGÓLNE ZALETY



Wodoodporność

Konstrukcja obojętna na działanie wody. Nie chłonie wody oraz nie koroduje.



Niska waga

Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów.



Kompaktowy

Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca



Łatwa obsługa

Regulacja ustawień nie wymaga użycia narzędzi.



Bezpieczeństwo

Pasy bezpieczeństwa zabezpieczają dziecko podczas kąpieli.



Gwarancja 24 miesiące

Na wszystkie nasze produkty udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



Pianka
Poliuretanowa

DRY FLOOR TECH™. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dostawaniu się do nich wody.



Innowacyjny system przegubowy z szerokim zakresem regulacji stelaża pozwala w pełni dopasować fotelik do wymiarów i potrzeb użytkownika.



Stabilizator tułowia, stabilizator kończyn dolnych to system pasów pomagający w przyjęciu prawidłowej pozycji w foteliku. Pasy stabilizują użytkownika, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu w trakcie użytkowania sprzętu.



Stabilizator głowy z możliwością regulacji szerokości.

AKCESORIA:



Stabilizacja BodyMap®



Stabilizacja



AKS_325 Zestaw mocujący do poduszki BodyMap®
Zestaw taśm velcro umożliwia zamocowanie poduszki BodyMap® na foteliku kąpielowym AKVOSEGO™.



AKS_326 Materac stabilizujący BodyMap® K
Podciśnieniowe materace stabilizujące BodyMap® z funkcją łatwego modelowania ich do kształtu ciała użytkownika.



AKS_805 Uprząż biodrowa
Uprząż sprzedawana jest zamiast standardowego pasa biodrowo-udowego.




AKS_806 Pas biodrowo-udowy
Zapewnia doskonałą stabilizację w obrębie miednicy. Możliwość regulacji pasa gwarantuje odpowiednie dopasowanie do potrzeb użytkownika.



Rozbudowa



AKS_804 AKVO
Mobilna wodoodporna platforma do wyrobów kąpielowych dla dzieci niepełnosprawnych.

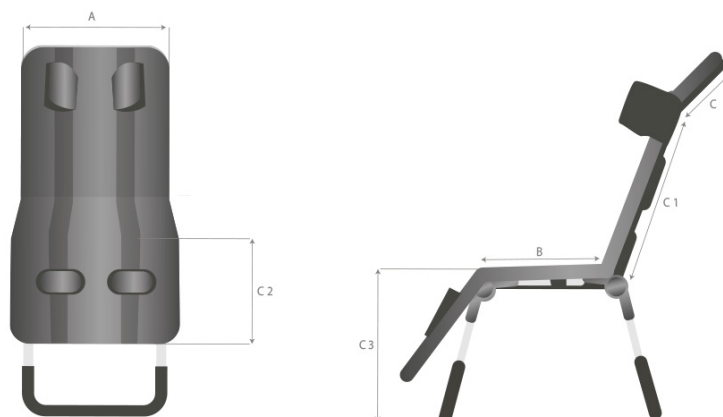

Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
A	szerokość fotelika	[cm]	37	42	45	50
B	głębokość siedziska	[cm]	23 – 28	28 – 33	32 – 40	37 – 50
C	wysokość podparcia głowy	[cm]	16	16	19	23
C ₁	wysokość oparcia	[cm]	31	40	44	50
C ₂	wysokość podparcia nóg	[cm]	26	31	36	41
C ₃	wysokość siedziska (od podłoża)	[cm]	11 – 44	11 – 44	13 – 49	15 – 54
	kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska)	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia)	[°]	205	210	210	205
	max. waga użytkownika	[kg]	25	30	50	75
	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	< 100	100 – 120	120 – 140	130 – 170

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	42	45	50
Szerokość po złożeniu	[cm]	42	45	50
Długość	[cm]	70	91	97
Długość po złożeniu	[cm]	64	76	88
Wysokość	[cm]	80	96	113
Wysokość po złożeniu	[cm]	28	29	31
Waga	[kg]	4	5	8

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.