WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI

KUKINI™

MONTAŻ AKCESORIÓW

PODUSZKI ZAWĘŻAJĄCE SIEDZISKO O 6 CM / 10 CM ● 5-PUNKTOWE PASKI STABILIZUJĄCE STOPY ● ZAGŁÓWEK OCTAGON™ ● SANDAŁKI STABILIZUJĄCE STOPY I STAWY SKOKOWE / DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK (FP-22) ● DASZEK ● OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA / MOSKITIERA ● UCHWYT NA KUBEK / UCHWYT NA TELEFON ● OSŁONY NA KOŁA ● ŚPIWÓR ● KOSZ POD SIEDZISKO ● POKROWIEC DO PRZENOSZENIA WÓZKA ZŁOŻONEGO ● DYSZEL DO ROWERU ● PRZEDNIE KOŁO SKRĘTNE

www.akces-med.com

☎ +48 17 864 04 70

✉ produkcja@akces-med.com

🖳 www.akces-med.com

• PODUSZKI ZAWĘŻAJĄCE SIEDZISKO O 6 CM / 10 CM

Poduszki montujemy przy pomocy taśm sczepnych pod poduszką siedziska wózka.











• 5-PUNKTOWE PASKI STABILIZUJĄCE STOPY

















• ZAGŁÓWEK OCTAGON™













• SANDAŁKI STABILIZUJĄCE STOPY I STAWY SKOKOWE / DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK (FP-22)





! UWAGA!

Zbyt długie paski sandałków stabilizujących stopy i stawy skokowe stanowią ryzyko wplątania się w koło przednie wózka.
Długość pasków należy dopasować poprzez odpowiednie ich przycięcie tak, aby nie zwisały swobodnie pod podnóżkiem. Należy również pamiętać o dostosowaniu ich długości tak, aby sandałki były odpowiednio mocno zamontowane na podnóżku.








• DASZEK




Daszek można zdemontować naciskając po obu stronach przyciski znajdujące się od wewnętrznej strony mocowań daszka na ramie oraz wysuwając go z prowadnic.













• OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA / MOSKITIERA








Osłonę przeciwdeszczową można dostosować do wybranej wysokości podnóżka.











• UCHWYT NA KUBEK / UCHWYT NA TELEFON






• OSŁONY NA KOŁA





• ŚPIWÓR









• KOSZ POD SIEDZISKO













Maksymalne obciążenia kosza pod siedziskiem wynosi 3 kg!

• POKROWIEC DO PRZENOSZENIA WÓZKA ZŁOŻONEGO









• DYSZEL DO ROWERU

Sprzęgło dyszla rowerowego należy zamontować do roweru zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.




Przed montażem dyszla rowerowego, należy zdemontować przednie koło wózka - patrz Instrukcja Obsługi.

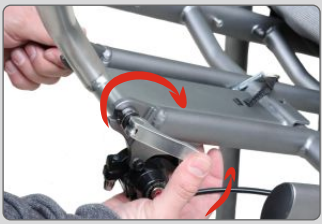




PRESS






CLICK

















• MODUŁ EVO

Przed montażem modułu EVO, należy zdemontować przednie koło wózka - patrz Instrukcja Obsługi.

Podczas montażu modułu EVO, należy bezwzględnie zabezpieczyć go przed wysunięciem poprzez:



1) Dokręcenie oraz dociśnięcie dźwigni.

Dokręcanie dźwigni odbywa się ruchem zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara.

2) Wprowadzenie w otwór dodatkowej blokady oraz zabezpieczenie jej od spodu poprzez wsunięcie w dodatkowy otwór wsuwki.





