

CUB

ODCHYLA SIĘ
SKŁADA SIĘ
BAWI WSZĘDZIE



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MOBILNOŚĆ JESZCZE BARDZIEJ MOBILNA

Łatwy w transporcie, wytrzymały i w pełni regulowany – wózek Cub z funkcją odchylenia rośnie razem z Twoim dzieckiem. Przebadany klinicznie i zaufany przez rodziny, łączy innowacyjny design z codzienną niezawodnością.

DLACZEGO ODCHYLENIE?

- Zmniejsza nacisk
- Poprawia odpoczynek i trawienie
- Wspiera prawidłową postawę



MOBILNOŚĆ W PODRÓŻY I WSPARCIE POSTURALNE

- Odchylenie od -9° do 45°
- Regulowane oparcie - wyjątkowo szeroki zakres regulacji



GOTOWY NA PRZYGODĘ!

Cub sprawdza się w podróży samolotem i świetnie radzi sobie na plaży, szlaku oraz nierównych chodnikach.



MIEŚCI SIĘ W BAGAŻNIKU KOMPAKTOWEGO SAMOCHODU

- Moduł siedziska: 13 kg
- Podstawa jezdna: 9 kg
- Przyjazny opiekunowi i łatwy do złożenia



PRZYGODY NA ZEWNĄTRZ I W POMIESZCZENIACH



NAUKA, OBIAD, ZABAWA!

Stolik aktywności to niezbędny element do rozwijania kreatywności, ćwiczenia umiejętności motorycznych i zapewnienia dziecku rozrywki.




NIESAMOWITY ZAKRES DOPASOWANIA DO WZROSTU I OPCJI

- Tylne koła 24" - z oponami pompowanymi lub pełnymi
- Większy zakres regulacji niż u konkurencji, dzięki czemu wózek „rośnie” wraz z dzieckiem aż do wieku nastoletniego, o szerokości bioder nawet 38 cm
- Podnóżki regulowane niezależnie zarówno pod kątem, jak i na wysokość



	WYMIARY CUB (mm)
szerokość siedziska	190 - 365
zakres prowadnic bioder	190 - 300
zakres głębokości siedziska	225 - 360
zakres wysokości oparcia	290 - 560
regulacja kąta między siedziskiem a oparciem	75°, 82°, 90° (pionowa), 97°, 105°, 112°, 120°, 127°, 135°
regulacja odchylenia kąta siedziska	9°, 0° (pozioma), 9°, 18°, 27°, 36°, 45°
wysokość przedniej części siedziska	395, 345
zakres długości podudzia	140 - 350
zakres wysokości rączek do prowadzenia	915 - 1260
podparcie przedramion	165 - 215
podparcie stóp	Regulowane na wysokość, kąt, głębokość i szerokość; elementy mogą być niezależne lub połączone; odpinane lub składane; kąt podudzia również regulowany.
tylne koło	Małe koło z pełną oponą i plastikowymi szprychami (16" x 1.75") lub duże koło z obręczą do napędu i pełną oponą (24 x 1 3/8") albo z oponą pompowaną (24" x 2") na metalowej obręczy rowerowej 540-25.
przednie koło	180 x 45
moduł siedziska	Aluminiowa rama składająca się w kształt litery „M”. Pasuje do podstawy stacjonarnej. Mieści się w dużym plecaku do transportu motocyklowego. Płaski spód umożliwia ustawienie na typowych meblach.
akcesorium terenowe	200 x 50
maksymalna waga użytkownika	60 kg
całkowita szerokość	635
długość bazy kół	540
całkowita długość	787
całkowita waga produktu (z kołami 16")	23,4 kg
waga modułu siedziska	13,3 kg
waga podstawy jezdnej	10,1 kg

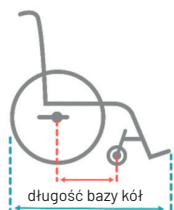

Długość całkowita



Regulacja kąta podparcia siedziska i oparcia



Regulacja nachylenia kąta siedziska




STOLIK/TACA AKTYWNOŚCI

Stolik aktywności wspiera wiele czynności - od ćwiczeń motoryki małej, przez zabawę z bliskimi, po jedzenie i naukę. Wykonany z bezpiecznego dla żywności polipropylenu, jest bardzo łatwy w czyszczeniu. Można go regulować na głębokość i wysokość.



KLIN SEPARUJĄCY KOLANA

Klin zapewnia prawidłowe ustawienie kości udowych i pomaga zapobiegać dalszym komplikacjom w obrębie nóg i bioder. Dzięki szybkozłączce element można odchylić w dół, co ułatwia transfery i chroni przed zgubieniem części. Nie jest przeznaczony jako środek unieruchamiający. Łatwy w czyszczeniu. Regulowany na wysokość, głębokość, bocznie i na szerokość.

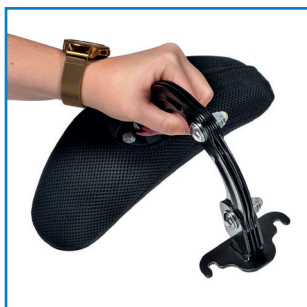

ZAGŁÓWEK I SZYBKOZŁĄCZANY UCHWYT 4-OSIOWY

Kształt zagłówka zapewnia umiarkowaną kontrolę boczną. Prawe i lewe skrzydełka można dogiąć (przez osobę z odpowiednią siłą), aby uzyskać bardziej „obejmujący” kształt. Uchwyt zagłówka umożliwia regulację w czterech osiach, porównywalną z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami na rynku.

Zagłówek jest zamocowany na przegubie kulowym, co pozwala na precyzyjne ustawienie rotacyjne. Uchwyt umożliwi regulację w przód i w tył, w górę i w dół oraz na boki względem środka. Wzmocniony uchwyt wyposażono w szybkozłączkę, dzięki której zagłówek można zdjąć bez użycia narzędzi i ponownie zamontować w tej samej, zoptymalizowanej pozycji.



AKCESORIUM TERENOWE

Akcesorium terenowe idealnie sprawdza się na zróżnicowanych nawierzchniach – nierównych, wyboistych i miękkich - gdzie układ trójkątowy sprawdzi się lepiej. Zapewnia tę przewagę bez ograniczania możliwości poruszania się w małych mieszkaniach, zatłoczonych przestrzeniach czy salach lekcyjnych. Koło montuje się w kilka sekund, bez użycia narzędzi.



TWORZONE I TESTOWANE W TERENIE

DYSTRYBUTOR
VERMEIREN POLSKA

ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Polska

www.vermeiren.pl
info@vermeiren.pl



SB Cub PL 2025-11 v1.0

